

CATALOGO RIABILITAZIONE

Una soluzione per ogni esigenza



fumagalli
Care&Reha



Member of


Hepius Group
Healthcare for a better life



Fumagalli Care&Reha - Customer Care
tel. +39 031 3356 811
ordini@fumagallicare.com

Indice

LETTINI DA VISITA E TERAPIA..... 3

Serie di lettini per riabilitazione e attività specifiche

Elenco codici e accessori141

MOVIMENTAZIONE ARTI 41

Cyclette, ergometri, cicloergometri, pedaliere, tapis roulant, panche e attrezzature palestra

RIABILITAZIONE ARTI 63

Apparecchiature per riabilitazione passiva e attiva, per arti inferiori e superiori

SUSSIDI ETC 77

La linea di sussidi progettati con il Prof. Perfetti e le attrezzature per gli esercizi di riabilitazione

ELETTROMEDICALI 85

Apparecchi per ultrasuoni, magnetoterapia, laser, elettroterapia, pressoterapia, tecar e onde d'urto

FISIOTERAPIA..... 111

Parallele, scale, spalliere, specchi, arredo e attrezzature per fisioterapia indoor e outdoor



Sezione LETTI DA VISITA, TERAPIA



Fumagalli Care e Reha offre una vasta gamma di lettini da visita e riabilitazione progettati per garantire comfort, sicurezza e versatilità. I nostri prodotti sono caratterizzati da un design ergonomico, materiali di alta qualità e facilità di pulizia, per garantire un ambiente sanitario sicuro e igienico.

Siamo impegnati a fornire non solo prodotti di alta qualità, ma anche un supporto e un servizio clienti eccellenti per la piena soddisfazione dei nostri clienti.

La scelta del lettino

Con un'attenzione particolare alla sicurezza dei pazienti e alla praticità per gli operatori sanitari, i lettini offrono soluzioni su misura per le esigenze cliniche di varie discipline mediche, scopri la nostra selezione:

- serie **EXPERT**, con letti da 2 a 8 sezioni regolabili, offre versatilità e comfort personalizzato per visite mediche e riabilitazione. Dotata di funzionalità avanzate e accessori specializzati, garantisce un ambiente professionale per un recupero ottimale dei pazienti;
- serie **SMART**, con 2-4 sezioni performanti, offrono comfort altamente efficace. Dotati di regolazioni avanzate e accessori dedicati, garantiscono supporto professionale per la riabilitazione dei pazienti. Una soluzione ideale per ambienti sanitari impegnati nella cura e nel benessere;
- serie **PRATIC**, con 2 o 3 sezioni regolabili, offre comfort e sicurezza per visite mediche e riabilitazione. Dotata di funzionalità motorizzate e accessori pratici, semplifica l'assistenza al paziente in un ambiente moderno;
- serie **FIX**, ad altezza fissa e con 2 o 3 sezioni, offre soluzioni robuste e pratiche con funzionalità essenziali, supporto affidabile e accessori specializzati per una versatilità ottimale durante la riabilitazione;
- serie **BOBATH**, con letti da 1-2 sezioni, offre una piattaforma dedicata alla terapia riabilitativa. Progettati per supportare approcci terapeutici specifici, questi letti garantiscono comfort e sicurezza con accessori specializzati, essenziali per ambienti di cura avanzata;
- serie **TRACTION**, offre letti avanzati per la riabilitazione muscolare con funzionalità di trazione regolabili. Dotati di accessori specializzati, garantiscono comfort personalizzato e supporto ottimale per la terapia in ambienti di riabilitazione;
- serie **TILT**, garantisce comfort e stabilità durante la riabilitazione, con funzionalità statiche avanzate e accessori dedicati. Ideali per ambienti sanitari, questi letti offrono supporto affidabile e contribuiscono a un recupero personalizzato ed efficace;
- serie **POSTURAL**, offre letti riabilitativi avanzati per la gestione della postura, progettati per conformarsi all'anatomia e dotati di accessori specializzati. Ideali per ambienti di riabilitazione, garantiscono comfort e supporto personalizzati per una postura corretta durante la terapia.

Ideali per ambienti di riabilitazione, offrono comfort e supporto personalizzati per favorire una corretta postura durante la terapia.

Serie EXPERT



Serie SMART



Serie PRATIC



Serie FIX



Serie BOBATH



Serie TRACTION



Serie TILT



Serie POSTURAL



EXPERT HG1

A 2 sezioni




Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

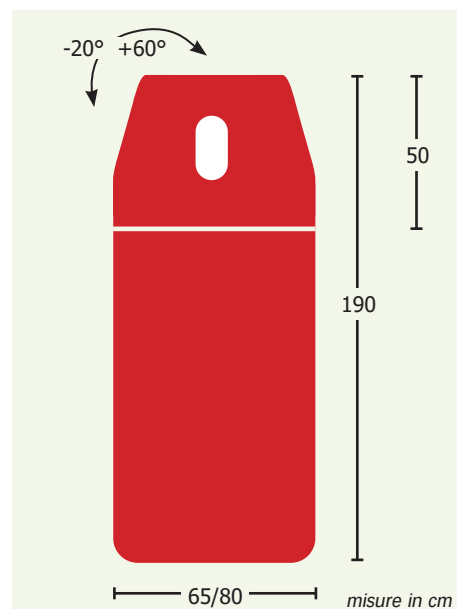

Scegli il colore del rivestimento!



PANNA



NERO



ARANCIONE



ROSSO



GIALLO



BLU



VERDE



FOGLIA

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Sponde laterali ribaltabili
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza

- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

EXPERT HG2

A 2 sezioni, posizione Trendelenburg




Posizione Trendelenburg

Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

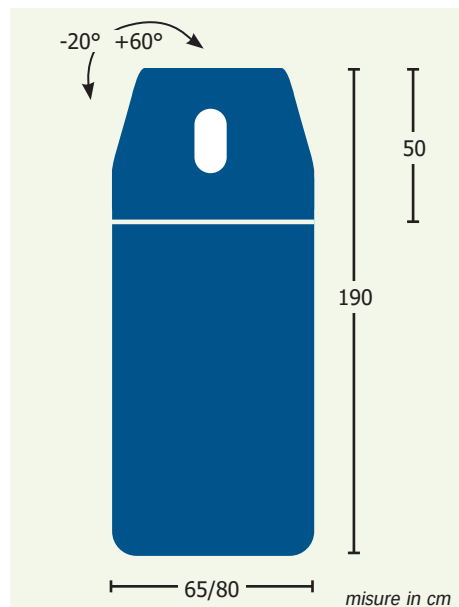

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Posizione Trendelenburg	con molla a gas +20° -20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK



EXPERT HG3

A 2 sezioni




Disponibile nelle varianti:

- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

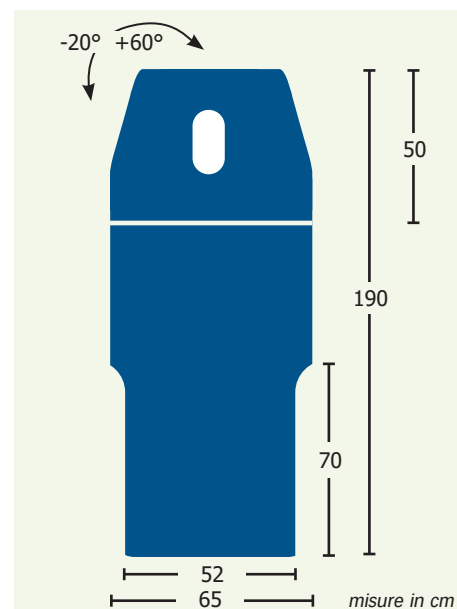

Scegli il colore del rivestimento!



PANNA



NERO



ARANCIONE



ROSSO



GIALLO



BLU



VERDE



FOGLIA

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta

- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

EXPERT HG4

A 4 sezioni




Regolazione dei braccioli

Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

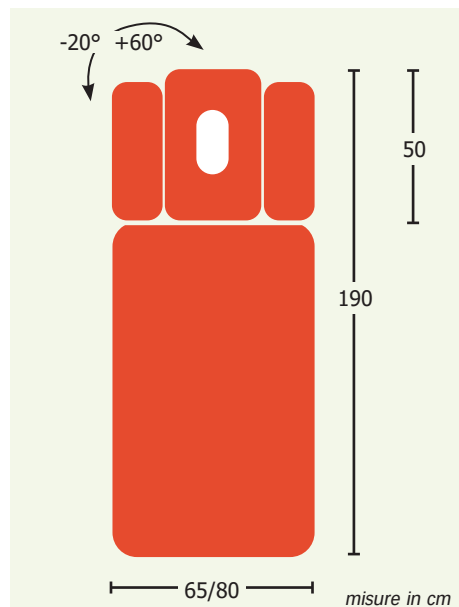

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Regolazione braccioli	manuale
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Sponde laterali ribaltabili
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK



EXPERT HG5

A 3 sezioni



Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione




Posizione Trendelenburg



RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Regolazione sezione centrale	con molla a gas +20°
Regolazione pediera	con molla a gas +75°
Posizione Trendelenburg	con molla a gas +20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

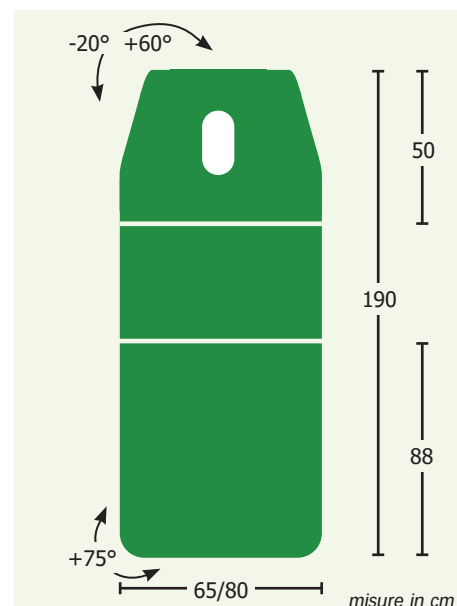

Scegli il colore del rivestimento!



PANNA



NERO



ARANCIONE



ROSSO



GIALLO



BLU



VERDE



FOGLIA

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta

- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

EXPERT HG6

A 5 sezioni




Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione



Posizione Trendelenburg

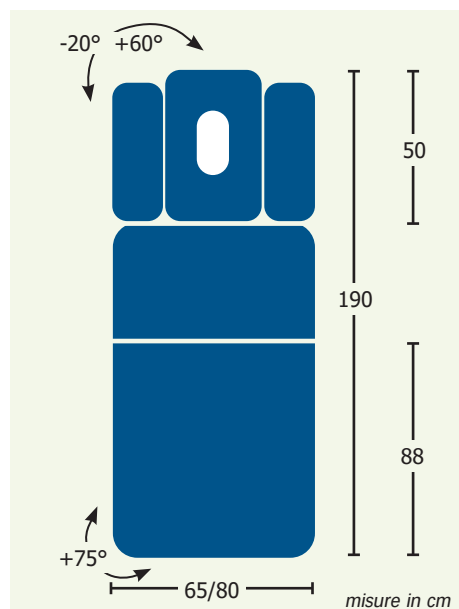

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Regolazione braccioli	manuale
Regolazione sezione centrale	con molla a gas +20°
Regolazione pediera	con molla a gas +75°
Posizione Trendelenburg	con molla a gas +20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

EXPERT HG7

A 8 sezioni




Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Regolazione braccioli	manuale
Regolazione sezione centrale	con molla a gas +20°
Regolazione pediera	con molla a gas +40° -52°
Posizione Trendelenburg	con molla a gas +20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

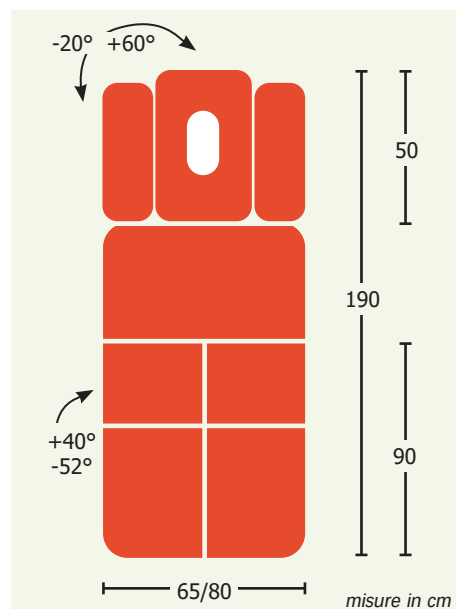

Scegli il colore del rivestimento!



PANNA NERO



ARANCIONE ROSSO GIALLO



BLU VERDE FOGLIA

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta

- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

EXPERT HG8


A 3 sezioni



Disponibile nelle varianti:

- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

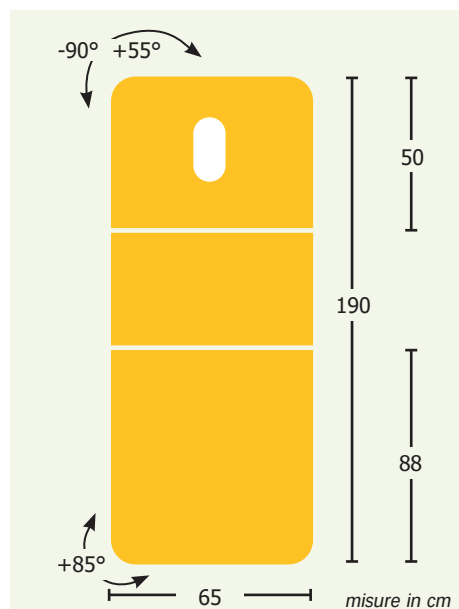

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 56-96 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +55° -90°
Regolazione sezione centrale	fissa
Regolazione pediera	con molla a gas +85°
Posizione Trendelenburg	con molla a gas +20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza

- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

SMART HG1

A 2 sezioni




Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 49-81 cm
Lunghezza	203 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas 0° +85°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	35 cm
Passaggio sollevatore	14,5 cm
Peso	60 kg

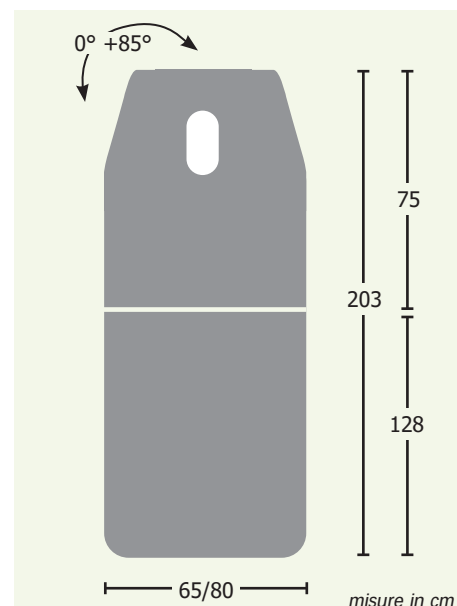

Scegli il colore del rivestimento!



ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Sponde laterali ribaltabili
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza

- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

SMART HG2


A 2 sezioni



Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

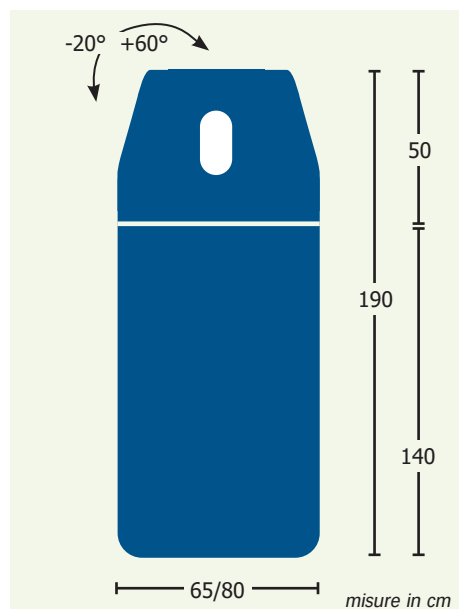

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 49-81 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	35 cm
Passaggio sollevatore	14,5 cm
Peso	60 kg

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Sponde laterali ribaltabili
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK



SMART HG3

A 3 sezioni



Disponibile nelle varianti:


- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione



RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 49-81 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +65° -65°
Sezione centrale	fissa
Regolazione pediera	con molla a gas +85°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	35 cm
Passaggio sollevatore	14,5 cm
Peso	60 kg

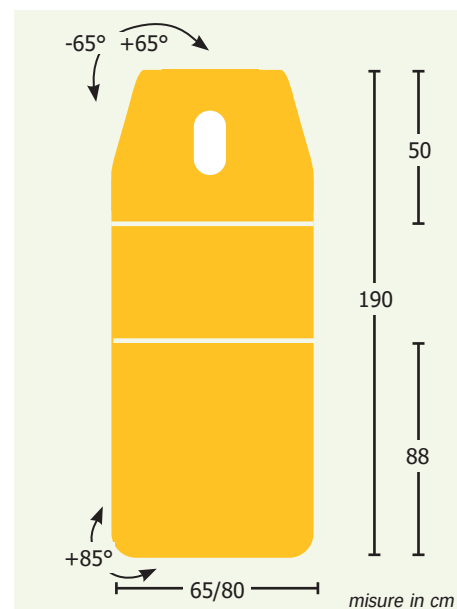

Scegli il colore del rivestimento!



ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza

- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

SMART HG4

A 4 sezioni




Regolazione dei braccioli

Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 65/80
- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare
- imbottitura standard o comfort

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

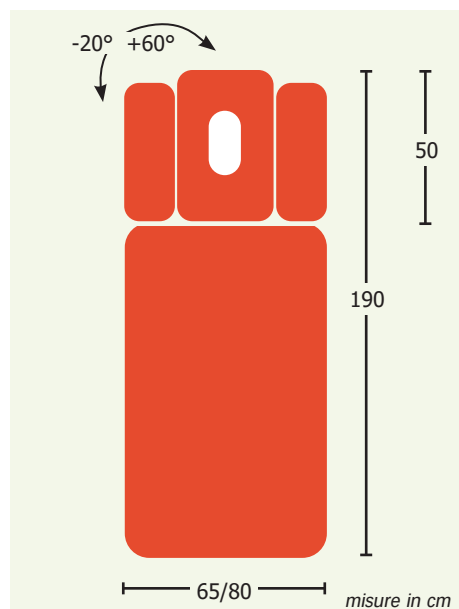

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 49-81 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 / 80 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	35 cm
Passaggio sollevatore	14,5 cm
Peso	60 kg

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Sponde laterali ribaltabili
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

PRATIC 2

A 2 sezioni



Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 62/68/80/90
- base con aggiunta di 4 ruote,
- telaio con asta flebo in alluminio cm 100-145 h




Ruote, da scegliere in fase di ordine

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica 52-82 cm			
Lunghezza	184 cm	202 cm	202 cm	202 cm
Larghezza	62 cm	68 cm	80 cm	90 cm
Carico lavoro max	150 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Regolazione testata: 0° +60°	cremagl.	elettrica		
Foro per la respirazione completo di tappo	standard			
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM			
Densità e spessore imbottitura	25 (kg/m³) / 5 cm			
Scostamento piano	59 cm	69 cm	69 cm	69 cm
Peso	48 kg	60 kg	70 kg	77 kg

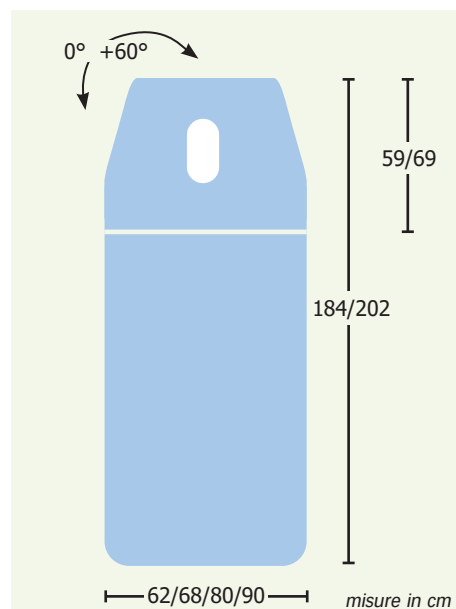

Scegli il colore del rivestimento!



BLU



NERO



BIANCO

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta, a scelta lato piedi o testa
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Pedaliera elettrica per elevazione letto
- Spondine ribaltabili

PRATIC 3

A 3 sezioni




Ruote, da scegliere in fase di ordine

Disponibile nelle varianti:

- base con aggiunta di 4 ruote,
- telaio con asta flebo in alluminio cm 100-145 h

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

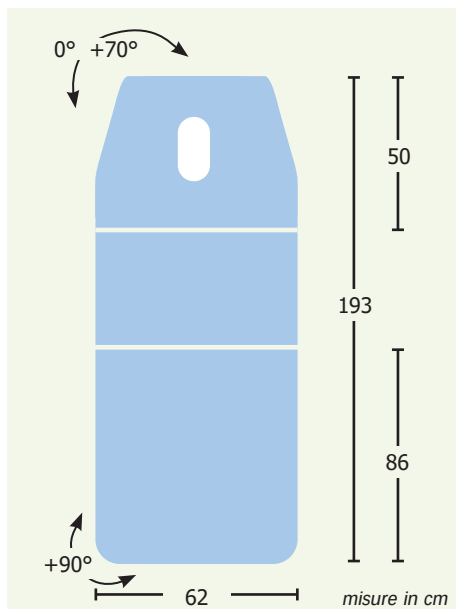

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica 52-92 cm
Lunghezza	193 cm
Larghezza	62 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	eletticamente 0° +70°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 5 cm
Scostamento piano	50-88 cm
Peso	48 kg

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta lato piedi
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Pedaliera elettrica per elevazione letto
- Braccioli in PU



PRATIC GINECOLOGICO

A 3 sezioni - per visita ginecologica

Completo di:

- reggicoscce ruotabili a 360°, regolabili in altezza
- vaschetta raccogli liquidi in acciaio Inox

Disponibile nelle varianti:

- base con aggiunta di 4 ruote,
- telaio con asta flebo in alluminio cm 100-145 h




Ruote, da scegliere in fase di ordine

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica 52-92 cm
Lunghezza	193 cm
Larghezza	62 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	elettricamente 0° +70°
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 5 cm
Scostamento piano	50-88 cm
Peso	48 kg

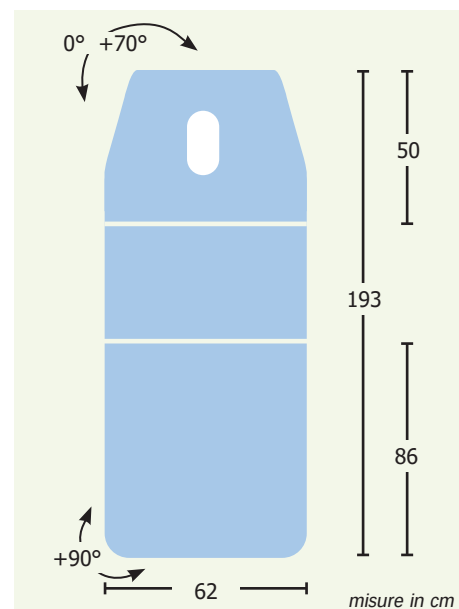

Scegli il colore del rivestimento!



BLU



NERO



BIANCO

ACCESSORI


- Supporto rotolo carta
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Pedaliera elettrica per elevazione letto

FIX HG1

A 2 sezioni, fisso



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

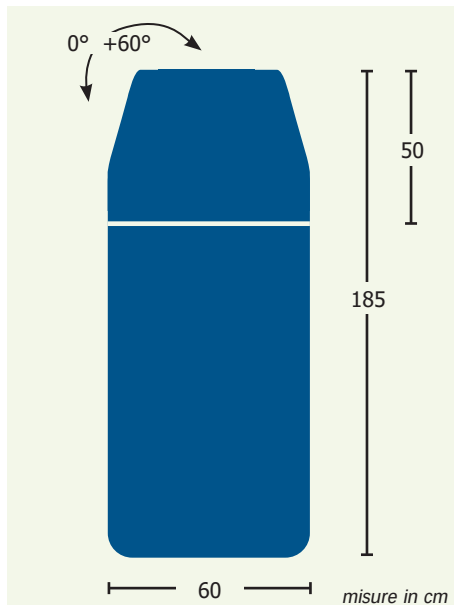

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 79 cm
Lunghezza	185 cm
Larghezza	60 cm
Carico lavoro max	180 kg
Regolazione testata	0° +60°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	25 (kg/m ³) / 5 cm
Peso	33 kg

Struttura in acciaio verniciato

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Confezione da 6 lenzuolini di carta a 2 veli

Scegli il colore del rivestimento!



BLU



NERO



BIANCO

FIX HG2

A 3 sezioni, fisso




Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 79 cm
Lunghezza	185 cm
Larghezza	60 cm
Carico lavoro max	180 kg
Regolazione testata	0° +70°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	25 (kg/m ³) / 5 cm
Peso	35 kg

Struttura in acciaio verniciato

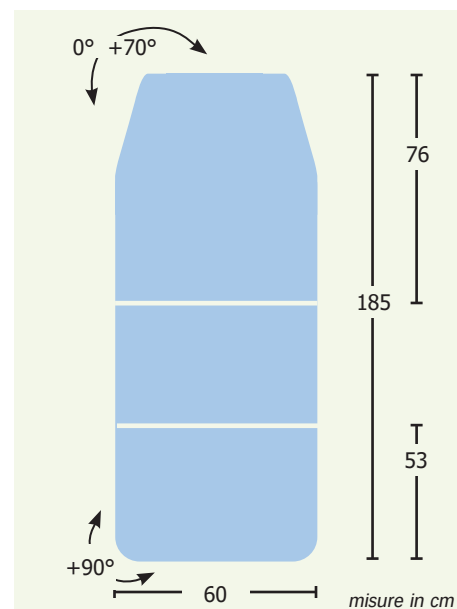

Scegli il colore del rivestimento!



BLU



NERO



BIANCO

ACCESSORI


- Supporto rotolo carta
- Confezione da 6 lenzuolini di carta a 2 veli

FIX HG3

A 3 sezioni - per visita ginecologica



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

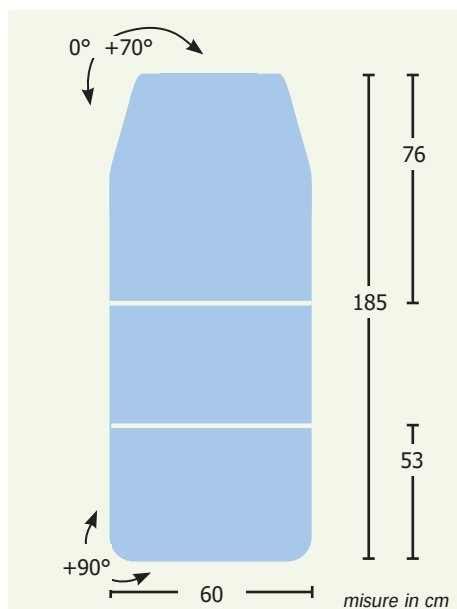

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 79 cm
Lunghezza	185 cm
Larghezza	60 cm
Carico lavoro max	180 kg
Regolazione testata	0° +70°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	25 (kg/m³) / 5 cm
Peso	39 kg

Struttura in acciaio verniciato

ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Confezione da 6 lenzuolini di carta a 2 veli

Scegli il colore del rivestimento!



BLU



NERO



BIANCO

FIX HG4

A 2 sezioni, fisso, telaio in legno




Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 74/90

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 78 cm
Lunghezza	189 cm
Larghezza	74/90 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	manuale +60°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Densità e spessore imbottitura	25 (kg/m ³) / 5 cm
Scostamento piano	50 cm
Peso	48 kg

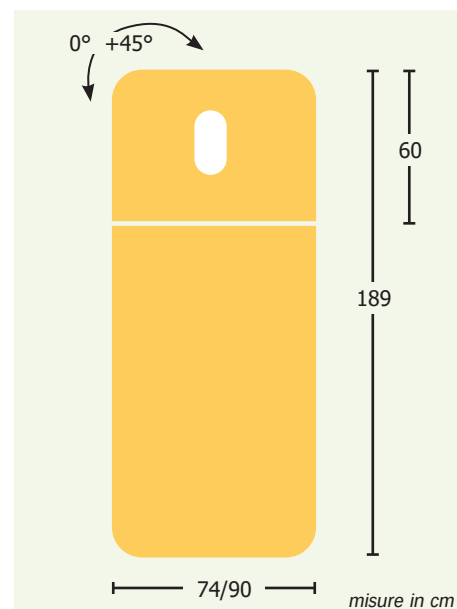

Scegli il colore del rivestimento!



BLU



NERO



BIANCO

ACCESSORI


- Supporto rotolo carta
- Confezione da 6 lenzuolini di carta a 2 veli

FIX HG5 A VALIGETTA

A 3 sezioni, in acciaio, chiudibile a valigia



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

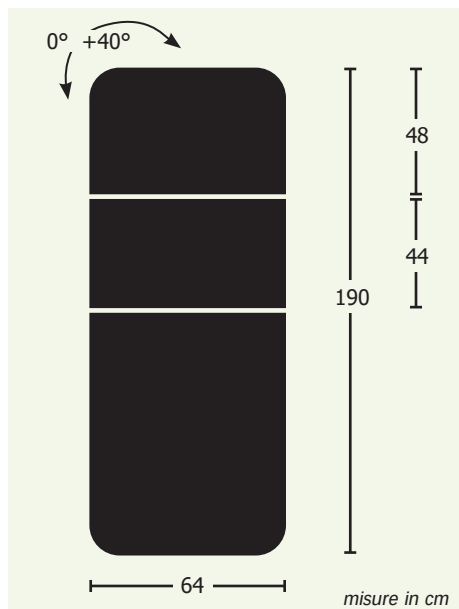

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 72 cm
Lunghezza	187 cm
Larghezza	64 cm
Dimensione chiuso	95x65x15 cm
Carico lavoro max	95 kg
Regolazione testata	manuale +40°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 2 cm
Peso	20 kg

Disponibile solo con rivestimento colore NERO

ACCESSORI

- Borsone porta-lettino

BOBATH HG1

A 1 sezione




Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 100/120

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica 47-80 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	100 / 120 cm
Carico lavoro max	200 kg
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	32 cm
Passaggio sollevatore	17 cm
Peso	70 kg

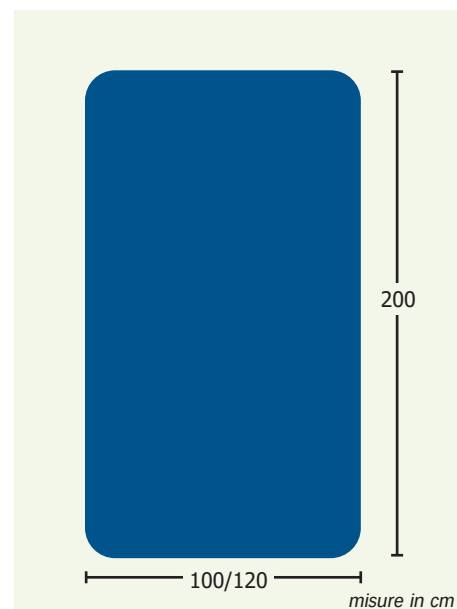

Scegli il colore del rivestimento!



PANNA



NERO



ARANCIONE



ROSSO



GIALLO



BLU



VERDE



FOGLIA

ACCESSORI

- Serie di quattro ruote
- Doppia pedaliera
- Sponde laterali ribaltabili
- Magnete di sicurezza

- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

BOBATH HG2

A 2 sezioni




Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 100/120
- regolazione testiera con cremagliera o molla a gas

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

Regolazione a cremagliera
o con molla a gas

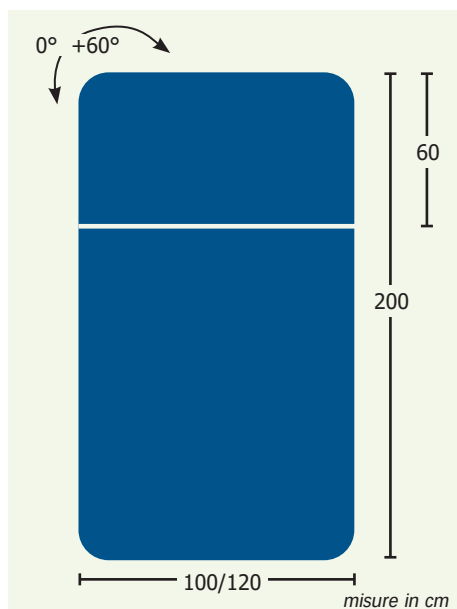

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica 47-80 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	100 / 120 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	+60° con molla a gas o cremagliera
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Scostamento piano	32 cm
Passaggio sollevatore	17 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Serie di quattro ruote
- Doppia pedaliera
- Sponde laterali ribaltabili
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

BOBATH HG3


A 1 sezione



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica 49-90 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	180 cm
Carico lavoro max	250 kg
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	30 cm
Passaggio sollevatore	15 cm
Peso	100 kg

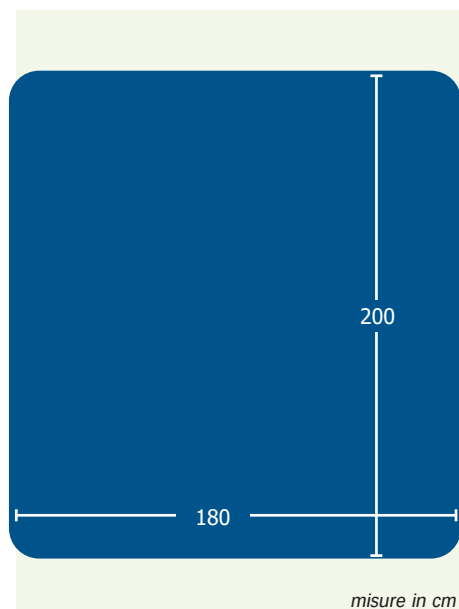

Scegli il colore del rivestimento!



ACCESSORI

- Serie di quattro ruote
- Doppia pedaliera
- Sponde laterali ribaltabili
- Magnete di sicurezza

- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

BOBATH HG4


A 1 sezione



Disponibile nelle varianti:

- larghezza del piano cm 120/180

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

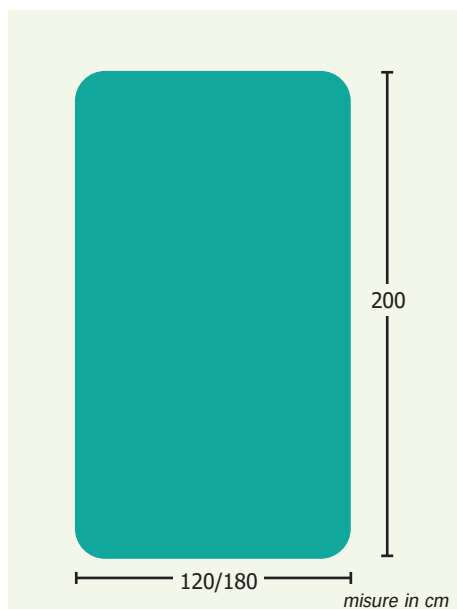

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 50 cm (piedini regolabili)
Lunghezza	200 cm
Larghezza	120 / 180 cm
Carico lavoro max	200 kg
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Peso	50 kg

BOBATH HG5

A 2 sezioni, fisso




Regolazione testata manuale

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 50 cm (piedini regolabili)
Lunghezza	200 cm
Larghezza	120 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	manuale +60°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Peso	50 kg

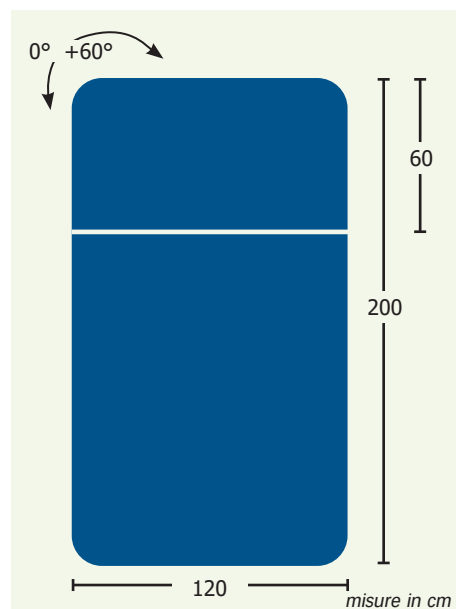

Scegli il colore del rivestimento!



PANNA



NERO



ARANCIONE



ROSSO



GIALLO



BLU



VERDE




FOGLIA

TRACTION HG1

A 3 sezioni



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

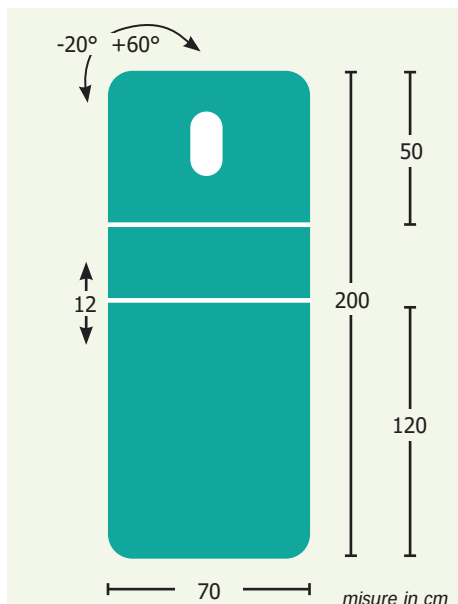

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica 55-86 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	70 cm
Carico lavoro max	200 kg
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Regolazione sezione centrale	fissa
Pianale	scorrevole 12 cm
Supporti cromati	standard
Ruote	diam. 75 cm
Foro per la respirazione completo di tappo	standard
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Scostamento piano	32 cm
Passaggio sollevatore	12 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI INCLUSI IN DOTAZIONE:

- Imbragatura pelvica, disp. in 2 misure
- Imbragatura toracica, disp. in 2 misure
- Mentoniera con archetto
- Bilancino

ACCESSORI

- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera

- Cuscino a trapezio cm 40x50x30
- Cuscino a cuneo cm 45x45x15
- Cuscino semicilindro cm 30x16x8

- Presa UK



TRACTION HG2

A 2 sezioni




Rotazione laterale torace

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 65 cm (piedini regolabili)
Lunghezza	200 cm
Larghezza	70 cm
Carico lavoro max	200 kg
Inclinazione schienale	10°
Pianale	scorrevole 12 cm
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Peso	70 kg

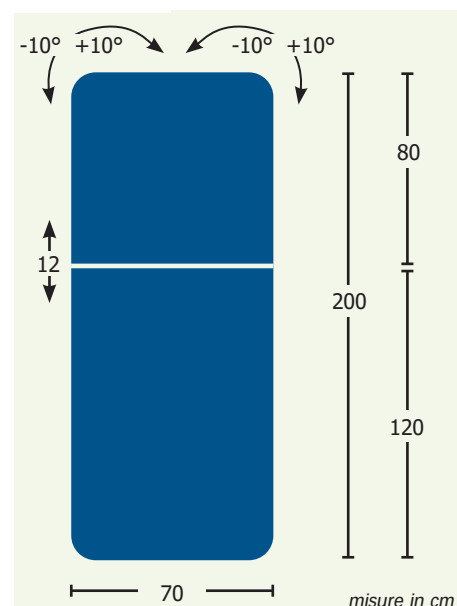

Scegli il colore del rivestimento!



ACCESSORI INCLUSI IN DOTAZIONE:

- Imbragatura pelvica, disp. in 2 misure
- Imbragatura toracica, disp. in 2 misure
- Mentoniera con archetto
- Bilancino
- Cuscino a trapezio cm 40x50x30
- Cuscino a cuneo cm 45x45x15
- Cuscino semicilindro cm 30x16x8

TILT HG1

Tavolo da statica a 1 sezione




Disponibile nelle varianti:

- pedana intera o separata

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione



Disponibile con **pedana intera**, fissa, o **separata**, regolabile indipendentemente.

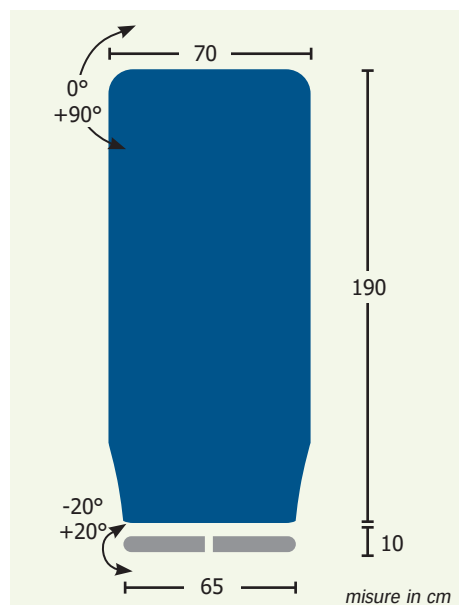

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 50 cm
Dimensioni piano imbottito	190 x 65 cm
Dimensioni ingombro	200 x 70 cm
Carico lavoro max	150 kg
Regolazione inclinazione	elettrica 0° +90°
Con di leva emergenza sgancio motore	
Completo di 4 ruote di cui 2 con freno	Ø 12,5 cm
Completo di cinghie ferma pazienti	3
Pedana poggipiedi	Intera: fissa Separata: reg. manuale +20° -20°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Passaggio sollevatore	15 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Supporti ascellari
- Fascia imbottita ferma pazienti
- Cinghie ferma pazienti h.10 cm
- Tavolino
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK



TILT HG2


Tavolo da statica a 4 sezioni



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 50 cm
Dimensioni piano imbottito (foro + tappo)	190 x 65 cm
Dimensioni ingombro	200 x 70 cm
Carico lavoro max	150 kg
Regolazione inclinazione (leva emergenza)	elettrica 0° +90°
Regolazione testata	con molla a gas +30° -80°
Completo di 4 ruote di cui 2 con freno	Ø 12,5 cm
Completo di cinghie ferma pazienti	5
Completo di supporti ascellari	2
Pedane poggiapiedi	reg. manuale +20° -20°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Passaggio sollevatore	15 cm
Peso	70 kg

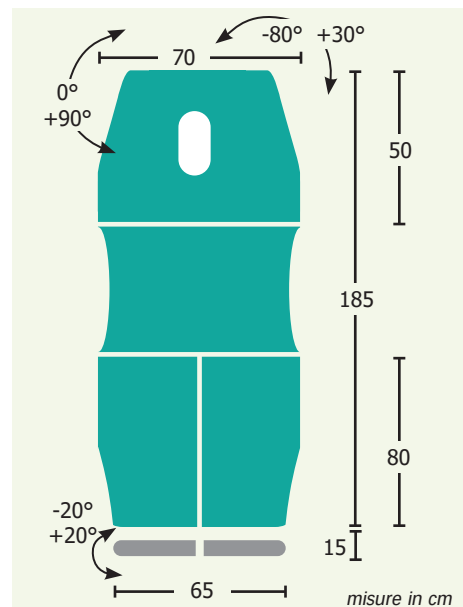

Scegli il colore del rivestimento!



ACCESSORI


- Fascia imbottita ferma pazienti
- Cinghie ferma pazienti h.10 cm
- Tavolino
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

TILT HG3

Tavolo da statica a 2 sezioni



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

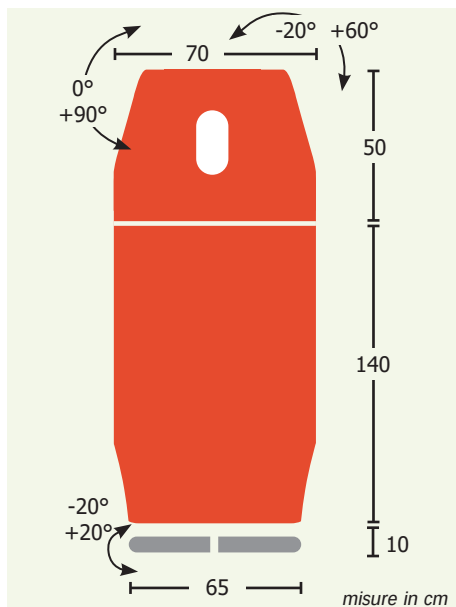

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	elettrica 54-96 cm
Dimensioni piano imbottito (foro + tappo)	190 x 65 cm
Dimensioni ingombro	200 x 70 cm
Carico lavoro max	150 kg
Regol. inclinazione (leva emerg. sgancio)	elettrica 0° +90°
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Completo di 4 ruote di cui 2 con freno	Ø 10 cm
Completo di cinghie ferma pazienti	3
Pedane poggipiedi	reg. manuale +20° -20°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Passaggio sollevatore	15 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Supporti ascellari
- Fascia imbottita ferma pazienti
- Cinghie ferma pazienti h.10 cm
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK



TILT HG4


Tavolo da statica a 4 sezioni



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	elettrica 54-96 cm
Dimensioni piano imbottito (foro + tappo)	190 x 65 cm
Dimensioni ingombro	200 x 70 cm
Carico lavoro max	150 kg
Regolazione inclinazione (leva emergenza)	elettrica 0° +90°
Regolazione testata	con molla a gas +30° -80°
Completo di 4 ruote di cui 2 con freno	Ø 10,0 cm
Completo di cinghie ferma pazienti	5
Pedane poggipiedi	reg. manuale +20° -20°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Passaggio sollevatore	15 cm
Peso	70 kg

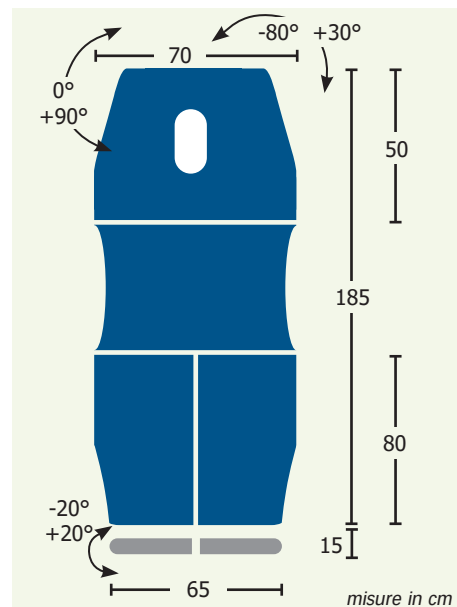

Scegli il colore del rivestimento!



ACCESSORI

- Supporti ascellari
- Fascia imbottita ferma pazienti
- Cinghie ferma pazienti h.10 cm
- Tavolino
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

POSTURAL HG1

A 4 sezioni




Disponibile nelle varianti:

- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

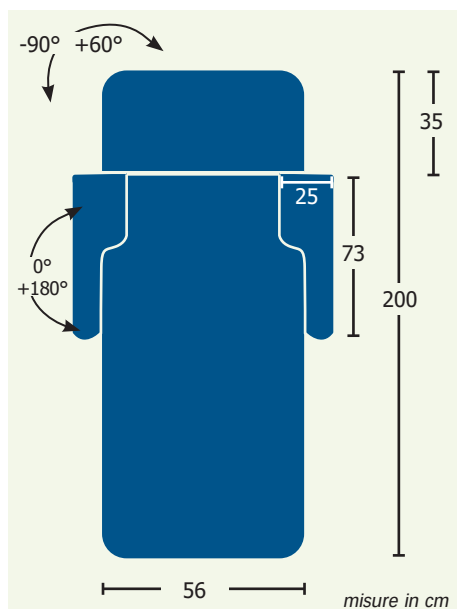

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 56-100 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	56 cm
Carico lavoro max	200 kg
Appoggia braccia scorrevoli e ruotabili	180°
Regolazione pediera	con molla a gas +60° -90°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	100 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	assente
Passaggio sollevatore	12 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Asta regolabile in altezza, corda e gancio
- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK



POSTURAL HG2


A 4 sezioni, fisso



Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Altezza	fissa - 74 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	56 cm
Carico lavoro max	180 kg
Appoggia braccia scorrevoli e ruotabili	180°
Regolazione pediera	con molla a gas +60° -90°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	100 (kg/m ³) / 4 cm
Peso	60 kg

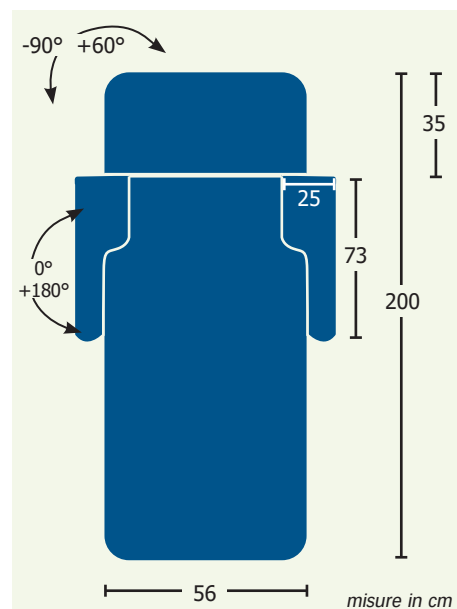

Scegli il colore del rivestimento!



ACCESSORI

- Asta regolabile in altezza, corda e gancio
- Supporto rotolo carta
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Doppio clic di sicurezza

POSTURAL HG3


A 4 sezioni



Disponibile nelle varianti:

- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

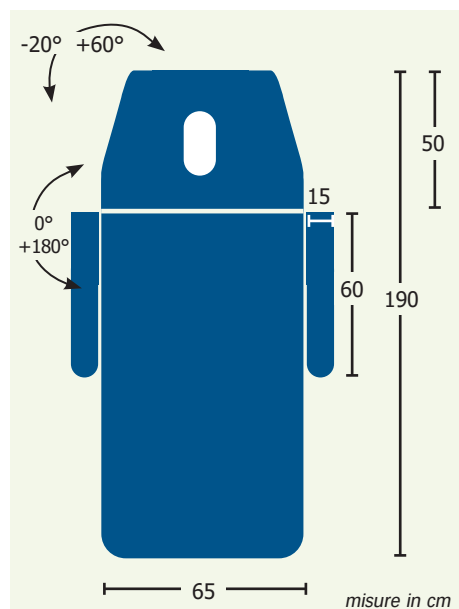

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 cm
Carico lavoro max	200 kg
Appoggia braccia scorrevoli e ruotabili	180°
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m ³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

ACCESSORI

- Asta regolabile in altezza, corda e gancio
- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza
- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK



POSTURAL HG4

A 5 sezioni




Disponibile nelle varianti:

- regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- comando a pedale oppure a pedaliera circolare

Per tutti i codici vedere nell'ultima sezione

RIFERIMENTI TECNICI

Regolazione altezza	elettrica o idraulica 45-90 cm
Lunghezza	190 cm
Larghezza	65 cm
Carico lavoro max	200 kg
Appoggia braccia scorrevoli e ruotabili	180° - reg.manuale
Regolazione testata	con molla a gas +60° -20°
Regolazione sezione centrale	con molla a gas +20°
Regolazione pediera	con molla a gas +75°
Posizione Trendelenburg	+20°
Imbottitura e rivestimento	ignifughi classe 1IM
Densità e spessore imbottitura	30 (kg/m³) / 4 cm
Scostamento piano	17 cm
Peso	70 kg

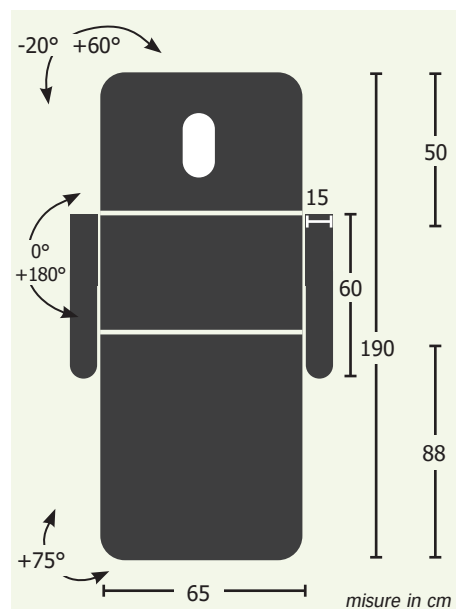

Scegli il colore del rivestimento!




ACCESSORI

- Supporto rotolo carta
- Serie di quattro ruote
- Confezione da 6 lenzuolini di carta
- Magnete di sicurezza

- Doppio clic di sicurezza
- Presa Svizzera
- Presa UK

Sezione MOVIMENTAZIONE ARTI

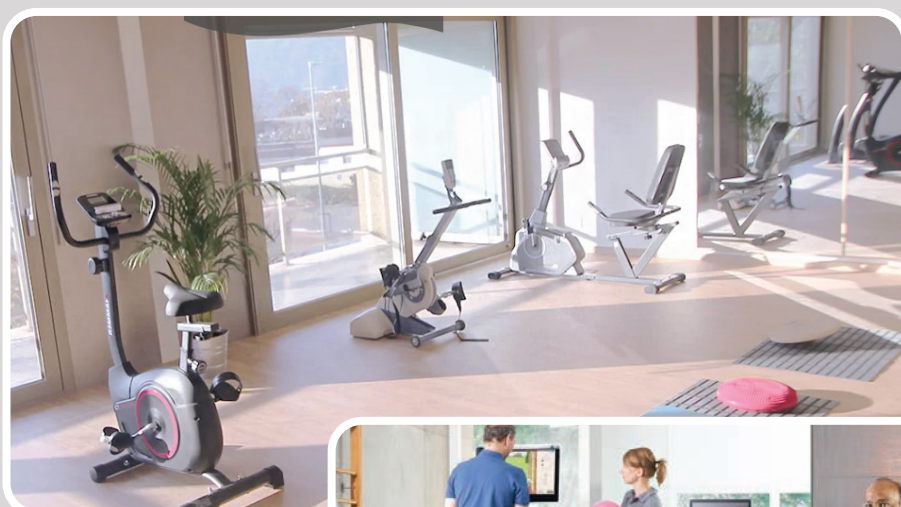

I cicloergometri, gli ergometri, le pedalieri e i tapis roulant rappresentano soluzioni complete per la riabilitazione ed il benessere. Con un'ampia gamma di impostazioni di resistenza e programmi di allenamento, consentono una personalizzazione per utenti di tutti i livelli. Grazie alla loro versatilità, permettono di migliorare la resistenza cardiovascolare, aumentare la forza muscolare e bruciare calorie in modo efficace. Con un design ergonomico e funzionalità all'avanguardia, questi dispositivi sono ideali per l'uso domestico e professionale.

RUN-700

Cyclette da riabilitazione e prove da sforzo



cod. HGC281001

MODELLO T - PROVE DA SFORZO

Specifiche tecniche

- Dimensioni 53 x 110 x 130 cm
- Portata massima 180 Kg

Caratteristiche

- Freno elettrodinamico controllato da computer con misurazione della coppia dipendente o indipendente dal numero dei giri
- Sistema di retroazione frenata con cella di carico
- Monitor 10.1" touch screen resistivo
- Porta RS232/ USB (virtual RS232) opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Ergoline
- Resistenza 0-700 Watt costanti
- Variazione elettronica dello sforzo
- Trazione a catena
- Velocità 3-130 RPM
- Visualizzazione tramite scala colorata di led delle pedalate (RPM) dal lato opposto al display nel guscio consolle
- Incremento sforzo 1 Watt
- Accesso facilitato per l'utente
- Sella regolabile in altezza per stature da 120 cm a 210 cm
- Certificato di conformità CE 93/42/CEE
- Compatibilità con fascia toracica Polar1 H7, H9 e H10 BLE (Bluetooth Low energy) attraverso dongle certificato non fornite dal fabbricante

Componenti di serie

- Ruote per lo spostamento
- Cavo RS232
- Manubrio regolabile 360° e Consolle girevole 180°

Componenti aggiuntivi

- Sella regolabile orizzontalmente - cod. HGC281004



cod. HGC281002

MODELLO TR - DA RIABILITAZIONE

Specifiche tecniche

- Dimensioni 53 x 110 x 130 cm
- Portata massima 180 Kg

Caratteristiche

- Freno elettrodinamico indipendente dal numero dei giri
- Monitor 10.1"
- Porta RS232/ USB (virtual RS232) opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Ergoline
- Resistenza 0-700 Watt costanti
- Variazione elettronica dello sforzo Alimentatore 100-240V~ 50-60 Hz 1.6-0.7A
- Trazione a catena
- Velocità 3-130 RPM
- Visualizzazione tramite scala colorata di led delle pedalate (RPM) dal lato opposto al display nel guscio consolle
- Incremento sforzo 1 Watt
- Accesso facilitato per l'utente
- Sella regolabile in altezza per stature da 120 cm a 210 cm
- Certificato di conformità CE 93/42/CEE
- Compatibilità con fascia toracica Polar1 H7, H9 e H10 BLE (Bluetooth Low energy) attraverso dongle certificato non fornite dal fabbricante

Componenti di serie

- Ruote per lo spostamento
- Cavo RS232
- Manubrio regolabile 360° e Consolle girevole 180°

Componenti aggiuntivi

- Sella regolabile orizzontalmente - cod. HGC281004
- Pedali regolabili - cod. HGC281003

BRX

Cyclette



cod. HGC282006



cod. HGC282007



cod. HGC282008

MODELLO 100

Specifiche tecniche

- Dimensioni 1087 x 558 x 1372 mm
- Portata massima 150 Kg

Caratteristiche

- Sistema di frenaggio resistenza magnetico con regolazione elettronica dello sforzo
- Massa volante peso 12 kg
- Console con display LCD retro-illuminato multicolor con supporto regolabile per smartphone e tablet
- Informazioni scan, distanza, tempo, calorie, pulsazioni, velocità, RPM, recovery, 1 manuale, 12 preset, 4 user, 4 HRC, body fat tester, watt
- Sella regolazione verticale e orizzontale
- Distanza pedale/sella min 70 cm, max 95 cm (L'utente può verificare l'usabilità dell'attrezzo prendendo le proprie misure dal tallone al cavallo, tenendo conto che durante l'allenamento la gamba non deve mai essere completamente distesa)
- Manubrio regolazione inclinazione
- Regolazione dello sforzo motorizzata su 16 livelli
- Rilevazione cardio hand pulse
- Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Pedivella 3 pezzi
- Pedali extra large con cinghietto regolabile

MODELLO 9500

Specifiche tecniche

- Dimensioni 1220 x 610 x 1540 mm
- Portata massima 180 kg

Caratteristiche

- Sistema di frenaggio resistenza Ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione
- Sistema di alimentazione tramite generatore elettrico integrato - non necessita di collegamento alla rete elettrica.
- Console 3 display a led bianco + 1 display con grafico a LED bianco
- Informazioni tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt - Programmi di allenamento: 1 libero, 12 preset, 4 user, 1 HRC, Watt, Recovery, Body fat tester
- Dotazione Accesso facilitato
- Sella EASY FIT SYSTEM con regolazione micrometrica orizzontale e verticale. Dotata di dispositivo di sgancio per una regolazione verticale più efficiente e confortevole
- Manubrio multipresa con appoggio ergonomico per avambracci
- Regolazione dello sforzo elettronica su 32 livelli
- Rilevazione cardio tramite hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Pedali extra large ed ergonomici per un comfort ottimale

MODELLO EASY

Specifiche tecniche

- Dimensioni 860 x 500 x 1360 mm
- Portata massima 110 Kg

Caratteristiche

- Sistema di frenaggio resistenza magnetico con regolazione manuale dello sforzo
- Massa volante peso 8 kg
- Console con display LCD
- Informazioni distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, odometro
- Sella regolazione verticale e orizzontale
- Distanza pedale/sella min 64 cm, max 88 cm (L'utente può verificare l'usabilità dell'attrezzo prendendo le proprie misure dal tallone al cavallo, tenendo conto che durante l'allenamento la gamba non deve mai essere completamente distesa)
- Manubrio regolazione inclinazione
- Rilevazione cardio hand pulse
- Pedivella 3 pezzi

BRXR

Ergometro



cod. HGC284000

MODELLO 9500

Specifiche tecniche

- Dimensioni 1725 x 750 x 1220 mm
- Peso massimo utilizzatore 180 kg

Caratteristiche

- Sistema di frenaggio resistenza ergometro con sistema di frenaggio magnetico ad induzione
- Sistema di alimentazione tramite generatore elettrico integrato - non necessita di collegamento alla rete elettrica.
- Console 3 display a led bianco + 1 display con grafico a LED bianco
- Informazioni tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, Watt - Programmi di allenamento: 1 libero, 12 predefiniti, 4 user, HRC, Watt, Recovery, Body fat tester
- Regolazione dello sforzo elettronica su 32 livelli
- Rilevazione cardio tramite hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Pedali extra large ed ergonomici per un comfort ottimale
- Schienale ampio e avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole. Sedile con regolazione orizzontale.



cod. HGC284001

MODELLO 3000

Specifiche tecniche

- Dimensioni 1730 x 670 x 1120 mm
- Portata massima 160 Kg

Caratteristiche

- Sistema di frenaggio resistenza ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo
- Massa volante peso 16 kg
- Console display LCD - white backlight - supporto per smartphone e tablet in dotazione inclinazione regolabile micrometrica
- Informazioni velocità, calorie, tempo, distanza, pulsazioni, RPM, programma in uso - programmi: Manuale, 12 predefiniti, Recovery, Race, 4 user, 4 HRC, Watt
- App Ready sistema Bluetooth intelligente integrato che consente di usufruire delle app più motivanti e divertenti specifiche per l'allenamento con bike.
- Include iConsole+ App con mappe, itinerari, fitness plan e dati di allenamento.
- Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso)
- Sella regolazione orizzontale. Ampio schienale con inclinazione regolabile per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
- Rilevazione cardio hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Pedivella 3 pezzi

Certificazioni CE-ROHS-EN957

OPERA LIVING

Cicloergometro



cod. HGC283028



cod. HGC283027

MODELLO BASE

Il cicloergometro Opera Living Base è un rigeneratore articolare di movimento realizzato per soddisfare esigenze riabilitative anche avanzate, in concreto con il fisioterapista. Costituisce l'attrezzatura di ogni palestra per la riabilitazione e fisioterapia. È particolarmente indicato in tutte le patologie che necessitano di una migliore mobilità e aumento di tonotrofismo muscolare, per il recupero della coordinazione motoria e del controllo dei movimenti per i pazienti che soffrono di artrosi, artrite, cattiva circolazione, ictus, per chi ha subito protesi all'anca ed al ginocchio. Indipendentemente dalle predisposizioni e dalle capacità, con Opera Living ogni persona può effettuare il movimento. Possibilità di muovere sia gambe che braccia, avanti e indietro, movimento lento o veloce, movimento attivo o passivo.

- Meccanismo Glip Lever che permette la riabilitazione delle articolazioni degli arti superiori.
- Permette la personalizzazione degli esercizi e dei programmi di riabilitazione.
- Coppe contenitive per i piedi con particolare dispositivo per la mobilità delle caviglie.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 50 x 37 x 52 mm

Componenti aggiuntivi per entrambi i modelli

- Supporto ergonomico arto inferiore - cod. HGC283029
- Supporto ergonomico arto superiore - cod. HGC283030
- Impugnatura verticale - cod. HGC283031

MODELLO PLUS

Il cicloergometro Opera Living Plus è un dispositivo per la riabilitazione e rigeneratore articolare di movimento, realizzato, per soddisfare esigenze riabilitative anche avanzate, in concreto con il fisioterapista. Costituisce l'attrezzatura di ogni palestra per la riabilitazione e fisioterapia.

È particolarmente indicato in tutte le patologie che necessitano di una migliore mobilità e aumento di tonotrofismo muscolare, per il recupero della coordinazione motoria e del controllo dei movimenti per i pazienti che soffrono di artrosi, artrite, cattiva circolazione, ictus, per chi ha subito protesi all'anca ed al ginocchio. Indipendentemente dalle predisposizioni e dalle capacità, con Opera Living ogni persona può effettuare il movimento. Possibilità di muovere sia gambe che braccia, avanti e indietro, movimento lento o veloce, movimento attivo o passivo.

- Il cicloergometro con meccanismo "Glip Level" permette la riabilitazione delle articolazioni degli arti superiori.
- Permette la personalizzazione degli esercizi e dei programmi di riabilitazione.
- Coppe contenitive per i piedi con particolare dispositivo per la mobilità delle caviglie.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 53 x 49 x 95 mm

- Impugnatura tetra - cod. HGC283032
- Cinghie di bloccaggio - cod. HGC283033



FREEDOM

Cicloergometro



Indicato per chi soffre di artrosi, artrite, cattiva circolazione, chi ha subito un intervento di protesi, anca, ginocchio oppure patologie importanti come paraplegia, tetraplegia, distrofia, ictus. Altissime prestazioni realizzate su misura per ogni esigenza.

Il cicloergometro è disponibile in 2 versioni: il modello BASE ha 1 motore per la riabilitazione degli arti inferiori e manopole di appoggio per gli arti superiori, il modello COMPLETE ha 2 motori che gestiscono le manopole per gli arti superiori e i pedali.

Caratteristiche

- Piastra superiore con manopole regolabile in altezza per permettere una perfetta postura.
- Inclinazione asse centrale in ben 7 posizioni.
- Regolazione continua del raggio.
- Pedale ergonomico per la corretta posizione dell'arto inferiore.
- La manopola Grip Leaver garantisce sicurezza e stabilità.
- Monitor ampio e luminoso, scheda di controllo semplice e compatta.
- La visualizzazione dei parametri al termine della terapia consentono un controllo da parte del fisioterapista e/o dei familiari.
- Regolazione velocità, direzione, rotazione, timer, resistenza.
- Feedback tono muscolare.
- Sistema elettronico antispasmo con inverter.
- Movimento più armonioso per garantire una terapia piacevole e costante anche in presenza di patologie importanti.
- Predisposizione accessori per arti inferiori e superiori personalizzabili secondo l'esigenza.
- Telecomando applicabile sul monitor.
- Terapia passiva, assistita – attiva.

FREEDOM COMPLETE - per arti superiori ed inferiori

cod. HGC283026

Specifiche tecniche

- Dimensioni 52 x 75 x 110 mm
- 2 motori, per la gestione delle manopole e dei pedali

FREEDOM BASE - per arti inferiori

cod. HGC283025

Specifiche tecniche

- Dimensioni 52 x 75 x 110 mm
- 1 motore, per la gestione dei pedali



THERA TRAINER-TIGO

Cicloergometro



Allenamento attivo

THERA-TRAINER TIGO permette un allenamento della forza muscolare e della resistenza tramite esercizi progressivi con livelli di resistenza di frenatura variabili.

Allenamento a settori

Il cicloergometro permette di attivare in modo mirato il lato del corpo maggiormente interessato, supportando tramite feedback visivo l'attività e i progressi.

Allenamento passivo ed assistivo

Il cicloergometro consente di mobilitare passivamente la muscolatura e le articolazioni, in modo graduale, cauto e sicuro: i sensori riconoscono l'attività del paziente.

THERA-TRAINER TIGO è un cicloergometro che consente di allenare costantemente ed in maniera efficace la forza, la resistenza e la mobilità durante ogni fase del percorso di riabilitazione, per consentire un più rapido miglioramento delle capacità motorie e raggiungimento degli obiettivi terapeutici.

Un cicloergometro compatto per la riabilitazione sia attiva sia passiva degli arti inferiori ad uso domiciliare, è indicato per coloro che desiderano continuare a casa la terapia riabilitativa iniziata in clinica, favorendo così il recupero e il mantenimento delle capacità motorie.

Piccolo, maneggevole ed efficace, THERA-Trainer Tigo può essere fornito nella variante con motore per gli arti superiori: un sistema ad incastro rende possibile applicare diversi tipi di supporti per le braccia, senza dover utilizzare attrezzi. Può essere inoltre adattato alle esigenze di bambini ed adolescenti.

Biofeedback per terapia individuale

Dotato di programmi di biofeedback che permettono agli utenti di rilevare le funzioni corporee, che altrimenti passerebbero inosservate: il software di allenamento consente infatti di rilevare processi, attività e segnali nel corpo, misurare e rilevare i parametri di allenamento tramite segnali acustici o visivi.

Tigo è personalizzabile in base alle esigenze dell'utente oppure disponibile in diverse configurazioni.

TIGO - modelli e versioni



Componenti di serie per tutti i modelli

- unità di base con rotelle
- display di facile lettura
- indicatori relativi alla terapia
- sistema antispasmo
- poggipiedi sagomato, con invito per il posizionamento delle gambe
- motore da 200W

Componenti aggiuntivi per tutti i modelli

- Dispositivo anti-ribaltamento ad uso autonomo - cod. HGC283010
- Fermapiedi - cod. HGC2830011
- Fermapolpacci - cod. HGC2830012
- Supporto avambracci da inserire sulle impugnature standard - cod. HGC2830013
- Supporto avambracci con impugnatura per tetraplegici - cod. HGC283014
- Supporto avambracci-impugnatura a barra-cod. HGC283015
- Pacchetto software per terapia individuale con cicloergometro per schermo a colori da 7" - cod. HGC283016
- Therasoft - cod. HGC283017
- Pacchetto software CL per la terapia di gruppo versione avanzata - cod. HGC283018
- Stazione multimediale - cod. HGC283019

MODELLO TIGO 562 cod. HGC283000

Per pazienti con peso corporeo max. di 180 kg, è dotato di display a colori 2,7", altre componenti di serie:

- poggipiedi con pedivella per la regolazione del raggio in due posizioni
- maniglia di sicurezza

Disponibile in versione **562R** (cod. HGC283001) con portata fino a 120 kg, include in aggiunta:

- poggipiedi con regolazione continua del raggio
- maniglia di sicurezza
- supporto per attrezzi



Sistema di fissaggio degli arti inferiori semplice e senza punti di compressione

TIGO



MODELLO TIGO 566 cod. HGC283002
Portata massima 180 kg, dotato di display a colori 2,7", inoltre include:

- poggipiedi con regolazione del raggio in due gradazioni
- dispositivo per allenare gli arti superiori con pedivelle lunghe
- adattatori per maniglie
- maniglie per terapia

Disponibile in versione **566R** (cod. HGC283003) con portata fino a 120 kg, include in aggiunta:

- poggipiedi con regolazione continua del raggio
- supporto per attrezzi

MODELLO TIGO 630 cod. HGC283004
Per pazienti con peso corporeo max. di 180 kg, ha display con schermo a colori 7" e funzione touch inclusa. Inoltre è dotato di:

- poggipiedi con regolazione del raggio in due gradazioni
- maniglia di sicurezza
- pacchetto software cicloergometro per comando e display

La versione **630R** (cod. HGC283005) è adatta a pazienti con peso massimo di 120 kg e comprende in aggiunta:



- poggipiedi con regolazione continua del raggio
- supporto per attrezzi

MODELLO TIGO 632 cod. HGC283006
Portata 180 kg, è dotato di display a colori 7" con funzione touch. Inoltre include:

- poggipiedi con regolazione del raggio in due gradazioni
- dispositivo per allenare gli arti superiori, con pedivelle lunghe
- adattatori per maniglie
- maniglie per terapia
- pacchetto software cicloergometro per comando e display

Disponibile in versione **632R** (cod. HGC283007) con portata fino a 120 kg, include in aggiunta:

- poggipiedi con regolazione continua del raggio
- supporto per attrezzi

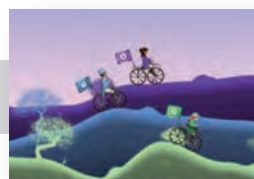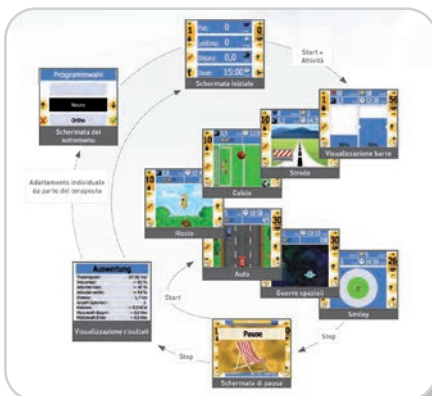

Software motivante

Attraverso il gioco si ricevono gli stimoli necessari per innescare i cambiamenti neuroplastici: THERA-TRAINER TIGO è un dispositivo per l'allenamento di elevata qualità che motiva le persone a migliorare le proprie capacità motorie.

PEDALIERA ELETTRICA

Attiva e passiva



cod. HGC285010

MODELLO PER ARTI INFERIORI

Specifiche tecniche

- Dimensioni 49x40x30 cm
- Peso 4,5 kg

Caratteristiche

- 15 livelli intensità (9 passivi + 6 attivi)
- Display LCD
- Telecomando (batterie CR2025)
- Pedali ergonomici con cinturino regolabile
- Piedini in gomma antiscivolo
- Cinturino incluso
- Alimentazione 220V - 50Hz



cod. HGC285011

MODELLO DUAL PER ARTI INFERIORI E SUPERIORI

Specifiche tecniche

- Dimensioni 46x41x92 cm
- Peso 12 kg

Caratteristiche

- 20 livelli d'intensità (10 passivi + 10 attivi)
- Doppio display LCD
- Pannello di controllo
- Pedali ergonomici con cinturino regolabile
- Impugnature ergonomiche
- Parte superiore regolabile in profondità
- Regolabile in altezza
- Piedini in plastica posteriori regolabili
- Alimentazione 110V/220V - 90W

CYCLETTE

Attiva, accesso facilitato



cod. HGC281010

Specifiche tecniche

- Dimensioni 98x48x128 cm - H seduta da terra regolabile 80-97 cm
- Peso 25 kg
- Portata massima 150 kg

Caratteristiche

- 8 livelli d'intensità
- Display LCD (batterie AAA)
- Sensori per la rilevazione del battito cardiaco
- Manopola regolazione intensità
- Pedali con fascia fermapiède regolabile
- Piedini in plastica regolabili
- Ruotine per il trasporto
- Seduta regolabile in profondità
- Manopola regolazione altezza
- Volano in ferro 5 kg

Thera Trainer MOBI 540

Pedaliera



cod. HGC285000

Il piccolo e pratico attrezzo attivo per esercitare gambe e parte superiore del corpo: Thera Trainer MOBI 540 è un maneggevole cicloergometro per l'esercizio attivo dei muscoli di gambe e della parte superiore del corpo.

È stato progettato per persone anziane o persone con lievi limitazioni fisiche. Thera Trainer MOBI è pensato per l'uso quotidiano a casa o per essere utilizzato dove sia necessario spostarlo facilmente come in cliniche, in strutture mediche o case di cura per anziani. Questo piccolo cicloergometro è dotato di un motore ad alte prestazioni che consente l'allenamento motorizzato (quindi assistito da motore - passivo) oppure l'allenamento con la propria forza muscolare (attivo) sia per le gambe che per le braccia.

Specifiche tecniche

- Dimensioni L50xP46-56xH43 cm
- Portata massima fino a 140 kg - Altezza utilizzatore 120-200 cm

Caratteristiche

- Alimentazione 240 V - 50/60 Hz
- Motore elettrico: Potenza di uscita 100 W, Potenza d'ingresso 120 W, Uscita continua 50 W
- Emissione del rumore LpA<70 dB (A)

Componenti di serie

- Comando con display a colori 2,7" di facile lettura
- Indicazioni relative alla terapia effettuata
- Manopole per terapia
- Poggipiedi sagomato

Componenti aggiuntivi

- Polsino per maniglia - cod. HGC285001

Classificazione medica prodotto: IIa

Requisiti CE 0297 che include:

- DIN-EN 60601-1-DIN-EN 60601-1-2
- DIN-EN 60601-1-11-DIN-EN 12182
- DIN-EN 13485
- Direttiva Dispositivi Medici 93/42/EEC
- Direttiva Macchine 2006/42/EC
- Direttiva 2011-65/EU (RoHS II)

WELLY

Pedaliera



cod. HGC286000



cod. HGC286001



cod. HGC286002

MODELLO WELLY COMBI

Utile per eseguire gli esercizi per gli arti inferiori o superiori, anche contemporaneamente. Adatta per ginnastica passiva e riabilitazione post-traumatica e fisioterapia.

Specifiche tecniche

Dimensioni 720 x 635 x 950/1048 mm

Caratteristiche

- Computer conta pedalate totali/tempo/calorie/scan/velocità.
- 5 programmi predefiniti
- Regolazione velocità motorizzata
- Velocità di rotazione da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
- 2 motori a corrente continua 230 VCC - 2 x 70 W
- Pedalata avanti e indietro
- Pedali forma ergonomica, con cinturino fermapiède
- Manopole forma ergonomica
- Altezza regolabile

Certificazioni CE-ROHS

MODELLO WELLY E

La minibike elettrica è l'attrezzo ideale per quelle persone che hanno bisogno di fare del movimento assistito ma hanno problemi di spazio. Può essere utilizzata sia per la parte superiore del corpo che per gli arti inferiori, appoggiandola ad un tavolo. E' dotata di un pratico display, posizionato sul telecomando, dove è possibile tenere sempre sotto controllo il tempo, le calorie ed il numero di pedalate. La pedalata può essere regolata sia in avanti che all'indietro con una velocità che va dai 28 ai 76 giri al minuto, su 12 differenti livelli.

Specifiche tecniche

Dimensioni 490 x 400 x 290 mm

Caratteristiche

- Utilizzo esercizi arti inferiori o superiori, adatta alla ginnastica assistita
- Informazioni conta-pedalate totali/tempo/calorie/scan/velocità.
- 5 programmi predefiniti
- Regolazione della velocità motorizzata con telecomando con schermo LCD
- Velocità di rotazione da 28 a 76 giri/minuto su 12 livelli
- Motore a corrente continua 230 Volts / 60 Watt
- Pedalata avanti e indietro, pedali forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani, con cinturino fermapiède

Certificazioni CE-ROHS

MODELLO WELLY S

Adatto alla ginnastica assistita e fisioterapia di arti inferiori o superiori (appoggiata su un tavolo).

Specifiche tecniche

Dimensioni 485 x 410 x 270 mm

Caratteristiche

- Utilizzo esercizi arti inferiori o superiori per ginnastica assistita e fisioterapia
- Pedali forma ergonomica per un'impugnatura confortevole anche delle mani. Con cinturino fermapiède
- Regolazione dello sforzo regolabile manualmente

Certificazioni CE

RUN 2011/TR

Tapis roulant



cod. HGC287000

Specifiche tecniche

- Dimensioni cm 70x188x142h - Superficie di camminamento: 140 x 48 cm;
- Portata massima 150 kg;

Caratteristiche

- Monitor 10.1" touch screen resistivo;
- Porta RS232 opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Trackmaster (compatibile con ECG: CubeStress, Cardioline, Edan, XScribe, Mortara, Customed, Labtech, Medical Econet, BTL, Cosmed, Fukuda, Schiller...);
- Velocità Max 20.0 km/h; Velocità Min 0.1 km/h; Variazione minima 0.1 km/h;
- Inclinazione Max 22%; Inclinazione Min 0%; Variazione Inclinazione 0.5 - 1%;
- Variazione elettronica velocità e inclinazione;
- Sistema di auto-centraggio del nastro; Sistema di auto-lubrificazione del nastro;
- Trasformatore toroidale 1700 VA; Inverter Monofase 230V~ 1.5 KW;
- Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuito Ausiliario Inclinazione: 18 Vac; Circuito Ausiliario Consolle: 12 Vcc; Motore 2 HP AC;
- Motore 2 HP AC; Potenza Assorbita Max dal motore 2000 VA; Potenza Assorbita Nominale 1500 VA;
- Potenza Sonora < 30 DB;
- Tavola Ammortizzata;
- Stop emergenza a pulsante ed a strappo;

Componenti di serie

- Ruote per lo spostamento;
- Cavo di alimentazione;
- Cavo RS232;

Componenti aggiuntivi

- Inclinazione -3%, +19%;
- Corrimani lunghi;
- Kit Ascellare;
- Barre corrimani aggiuntivi regolabili
- Supporto anticaduta per corrimani lunghi
- Bilancino + corpetto per supporto anticaduta
- Rampa d'accesso

RUN 2011/TR Ortopedico

Tapis roulant



cod. HGC287001

Specifiche tecniche

- Dimensioni cm 70x188x142h - Superficie di camminamento: 140 x 48 cm;
- Portata massima 150 kg;

Caratteristiche

- Monitor 10.1" touch screen resistivo;
- Porta RS232 opto isolata per collegamento con ECG attraverso il protocollo Trackmaster (compatibile con ECG: CubeStress, Cardioline, Edan, XScribe Mortara, Customed, Labtech, Medical Econet, BTL, Cosmed, Fukuda, Schiller...);
- Velocità Max 20.0 km/h; Velocità Min 0.1 km/h; Variazione minima 0.1 km/h;
- Inclinazione Max 22%; Inclinazione Min 0%; Variazione Inclinazione 0.5 - 1%;
- Variazione elettronica velocità e inclinazione;
- Sistema di auto-centraggio del nastro; Sistema di auto-lubrificazione del nastro;
- Trasformatore toroidale 1700 VA; Inverter Monofase 230V~ 1.5 KW;
- Alimentazione 220~240Vac 50/60 Hz 10Amp;
- Circuito Ausiliario Inclinazione: 18 Vac; Circuito Ausiliario Consolle: 12 Vcc; Motore 2 HP AC;
- Motore 2 HP AC; Potenza Assorbita Max dal motore 2000 VA; Potenza Assorbita Nominale 1500 VA;
- Potenza Sonora < 30 DB;
- Tavola Ammortizzata;
- Stop emergenza a pulsante ed a strappo;

Componenti di serie

- Ruote per lo spostamento;
- Cavo di alimentazione;
- Cavo RS232;
- Corrimano lungo fino a fine corsa;
- Kit Ascellare;
- Seggiolino;

Componenti aggiuntivi

- Inclinazione -3%, +19%;
- Barre corrimani aggiuntivi regolabili
- Supporto anticaduta per corrimani lunghi
- Bilancino + corpetto per supporto anticaduta
- Rampa d'accesso

EVO

Tapis roulant



cod. HGC288000

MODELLO WALKER

Specifiche tecniche

- Dimensioni aperto 1635 x 700 x 1315 mm
- Dimensioni chiuso 1130 x 715 x 1400 (con corrimani smontati)
- Portata massima 110 Kg

Funzioni console

- display LCD 113x63 mm retro-illuminato blue backlight
- sistema rilevazione frequenza cardiaca tramite hand-pulse
- comandi velocità e start/stop su corrimano
- tasti scelta rapida velocità: 1-2-3-4-5-6-7-8 Km/h
- console con supporto per smartphone / tablet
- cintura di supporto lombare regolabile con velcro e moschettoni in dotazione
- Informazioni fornite dalla console: velocità, frequenza cardiaca, distanza, tempo, consumo calorico, programma in esecuzione.

Caratteristiche

- Motore 2/3 (Peak) HP DC
- Velocità 0,4 - 8,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
- Inclinazione manuale su 3 livelli (corrimani removibili)
- Programmi 1 libero, 12 presetati, target: tempo, distanza, calorie
- Sistema di ammortizzazione piano di corsa su 6 elastomeri
- Piano di corsa 430 x 1270 mm - spessore nastro 1,6 mm
- Diametro dei rulli anteriore ø46 mm - posteriore ø42 mm



cod. HGC288001

MODELLO TRX 9000

Specifiche tecniche

- Dimensioni aperto 2160 x 930 x 1720 mm
- Portata massima 180 Kg

Funzioni console

- 7 display LED retro-illuminati blue backlight + 1 display con diagramma
- Dotazioni: hand pulse.
- Ricevitore wireless per fascia cardio integrato, ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - ingresso USB.
- Supporto per smartphone / tablet.
- APP READY 3.0 Sistema Bluetooth intelligente integrato.
- Compatibile con Zwift e Kinomap (abbonamento non incluso).
- Informazioni fornite dalla console: velocità, pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, calorie, temperatura, step

Caratteristiche

- Motore MOTORE 6/8 (PEAK) HP AC
- Velocità 0,5 - 25,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
- Inclinazione 19% su 20 livelli
- Superficie di corsa nastro autolubrificante spessore 2,5 mm
- Programmi 1 libero, 8 presetati, 5 user, HRC
- Piano di corsa 560 x 1600 mm

EAN 8029975805481

ASX 2000

Stazione all-in-one



Supporto gambale con rulli



cod. HGC289000

Specifiche tecniche

- Dimensioni 1990 x 1500 x 2200 mm
- Portata massima 135 kg

Caratteristiche

- J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight).
- Regolabile 314-1814 mm su 31 livelli interasse 50 mm
- Bilanciere: 1980mm, scorrimento su cuscinetti a sfera, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 12 posizioni (523 - 1733 mm), passo 110 mm.
- Diametro porta dischi da 50 mm e da 25 mm
- Dotazioni 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm e 25 mm, 10 ferma dischi a molla ø49 mm, 10 ferma dischi a molla ø47 mm.
- Attachments: cavigliera, landmine, 2 maniglie trazioni, bilanciere curl.
- PULLEY regolabile 339-1839 mm su 21 livelli interasse 75 mm
- Struttura a sezione rettangolare 50x70 mm
- spessore 2 mm e quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm

Componenti di serie

- 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 4 porta dischi ø50 mm e 25 mm, 10 ferma dischi a molla ø49 mm, 10 ferma dischi a molla ø47 mm. Attachments : cavigliera, landmine, 2 maniglie trazioni, bilanciere curl.
- J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS
- Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 314-1814 mm su 31 livelli interasse 50 mm

Certificazioni CE-EN ISO 20957-1/957-4 EAN 8029975805849

PANCA PROFESSIONAL WBX90

Porta-bilanciere con leg extension e arm curl, richiudibile



cod. HGC289001

Specifiche tecniche

- Dimensioni chiuso 895 x 925 x 1855 mm
- Dimensione arm curl (incluso) 430 x 260 x 50 mm
- Portata massima 120 kg

Caratteristiche

- Sedile imbottito - con rivestimento bicolore, dimensione 405 x 400 x 50 mm
- Regolazione/Inclinazione sedile regolabile su 3 livelli (0-30°)
- Schienale imbottito con rivestimento bicolore, dimensione schienale 770 x 290 x 50 mm
- Regolazione/Inclinazione schienale regolabile su 5 livelli (0-90°)
- Rulli in foam ad alta densità
- Peso massimo supporto bilanciere 120 kg
- Peso massimo leg extension 50 kg
- Altezza/distanza supporti bilanciere regolabile 1075/1275/900 mm
- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione quadrata 50X50X1.5mm

Componenti di serie

- panca porta-bilanciere
- leg extension
- arm curl

Componenti aggiuntivi

- Bilanciere, cm Ø 2,5xL215, kg 9, chiusura a vite - cod. HGC289002
- Dischi in ghisa gommati, confezione a pesi differenti:
 - 0,5 kg (conf. 20 pz.) - cod. HGC289003
 - 1 kg (conf. 20 pz.) - cod. HGC289004
 - 2 kg (conf. 10 pz.) - cod. HGC289005
 - 5 kg (conf. 4 pz.) - cod. HGC289006
 - 10 kg (conf. 2 pz.) - cod. HGC289007
 - 15 kg (conf. 1 pz.) - cod. HGC289008
 - 20 kg (conf. 1 pz.) - cod. HGC289009
- tappetino insonorizzante, dimensioni differenti:
 - 120x80x0,6 cm (conf. 6 pz.) - cod. HGC289010
 - 180x90x0,6 cm (conf. 6 pz.) - cod. HGC289011
 - 180x90x0,9 cm (conf. 6 pz.) - cod. HGC289012
 - 200x100x0,6 cm (conf. 4 pz.) - cod. HGC289013
 - 200x100x0,9 cm (conf. 4 pz.) - cod. HGC289014
- adattatore leg extension per dischi olimpionici (non inclusi) - cod. HGC289015

PANCHE PIANE



cod. HGC289020

MODELLO WBX-400 INCLINABILE E DECLINABILE

Specifiche tecniche

- Struttura in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 70x50x2 mm e 60x40x2 mm
- Dimensioni del prodotto 1297 x 607 x 462 mm
- Peso massimo struttura (utilizzatore + carico pesi) 400 Kg

Caratteristiche

- Imbottitura spessore 65 mm
- Regolazione/Inclinazione sedile: 2 livelli (0-17°)
- Regolazione/Inclinazione schienale: 8 livelli (-17-85°)
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio

Componenti di serie

- Maniglia e ruote di trasporto incluse



cod. HGC289021

MODELLO GBX-3000 A INVERSIONE

Specifiche tecniche

- Dimensioni standard 780x1540x1550/2250mm - Dimensioni chiuso 500x780x2060 mm
- Peso del prodotto 34 kg - Peso massimo struttura 150 kg
- Per altezza utente da 147 a 198 cm

Caratteristiche

- Rotazione schienale su 5 livelli (5° - 25° - 50° - 75° - 90°) + rotazione libera
- SISTEMA DI INCLINAZIONE PRESS&LOCK: consente di bloccare lo schienale a qualunque livello di rotazione
- Utilizzo: allungamento e rilassamento muscoli della schiena
- Sistema di sicurezza: barra di sicurezza centrale con blocca caviglie regolabile
- Schienale confort multi-wave spessore 60 mm
- Impugnature laterali ergonomiche anti scivolo

Componenti di serie

- Maniglia e ruote di trasporto incluse



Sezione RIABILITAZIONE ARTI



Le attrezzature per la riabilitazione degli arti offrono soluzioni avanzate per il recupero e il potenziamento delle funzioni motorie. Con una gamma diversificata di strumenti e dispositivi, favoriscono un recupero mirato e efficace dopo lesioni o interventi chirurgici agli arti. Ideali per professionisti della riabilitazione e pazienti, queste attrezzature garantiscono risultati ottimali e una rapida ripresa.

FISIOTEK 3000

per arti inferiori



Apparecchiatura per la riabilitazione passiva degli arti inferiori, indicata sia per il recupero del movimento articolare sia per patologie trattate chirurgicamente e non chirurgicamente.

MODELLO: 3000GS Cod. HGC290000

Specifiche tecniche

- Mobilizzazione ginocchio anca
- Controllo velocità in estensione
- Controllo velocità in flessione
- Controllo forza
- Controllo tempo di lavoro
- Incremento automatico estensione
- Incremento automatico flessione
- Pausa in estensione
- Pausa in flessione
- Cicli riscaldamento (warm up) con tasto dedicato
- Utilizzo memory card
- Appoggio piede regolabile
- Limite incremento automatico estensione
- Limite incremento automatico flessione
- Ripetizioni al limite di estensione
- Ripetizioni al limite di flessione
- Ampiezza movimento ginocchio $-10^{\circ} \div 120^{\circ}$
- Ampiezza movimento anca (arto medio) $-7^{\circ} \div 115^{\circ}$
- Velocità $0,8^{\circ} \div 3,5^{\circ}/\text{sec.}$
- Forza $0 \div 40 \text{ kg}$
- Peso $9,5 \text{ kg}$

MODELLO: 3000TS Cod. HGC290001

Specifiche tecniche

- Mobilizzazione ginocchio, anca e caviglia
- Controllo velocità in estensione
- Controllo velocità in flessione
- Controllo forza
- Controllo tempo di lavoro
- Incremento automatico estensione
- Incremento automatico flessione
- Pausa in estensione
- Pausa in flessione
- Cicli riscaldamento (warm up) con tasto dedicato
- Ampiezza movimento ginocchio $-10^{\circ} \div 110^{\circ}$
- Ampiezza movimento anca (arto medio) $-7^{\circ} \div 115^{\circ}$
- Ampiezza movimento caviglia $-20^{\circ} \div 0^{\circ} \div 40^{\circ}$
- Velocità $0,8^{\circ} \div 3,5^{\circ}/\text{sec.}$
- Forza $0 \div 40 \text{ kg}$
- Peso 14 kg

Componenti aggiuntivi

- Tastiera mobile di programmazione, con display grafico-cognitivo e simboli grafici auto-esplicativi - cod. HGC290002
- Carrello per interno, con appoggi in materiale antiscivolo e mensola di servizio - cod. HGC290003
- Optional per arti minori di 72 cm (solo per modello 3000 TS). Consente l'escursione da 0° a 110° per arti lungh. 61-72 cm e da 0° a 135° per arti lungh. 72-100 cm - cod. HGC290004

FISIOTEK LT

per arti superiori



Per SPALLA - cod. HGC290005



Per GOMITO - cod. HGC290006



Per POLSO - cod. HGC290007

MODELLO: LT 5R PER SPALLA cod. HGC290005

Il Fisiotek LT-5R é una apparecchiatura che consente la mobilizzazione passiva della spalla, attraverso diversi movimenti disponibili; permette di essere utilizzato con paziente seduto o supino. Questo modello si caratterizza per la semplicità, la maneggevolezza e la qualità del movimento. Il posizionamento del paziente risulta facile e agevole. Movimenti eseguiti sulla spalla:

- Elevazione in flessione range: 0°; 180°
- Rotazione interna-esterna range: 90°; 0°; 90°
- Adduzione-abduzione: completo range fisiologico

Componenti aggiuntivi

- Kit batterie+caricabatteria,cod.HGC290008
- Supporto per il movimento di rotazione interna-esterna - cod. HGC290009

MODELLO: LT G PER GOMITO cod. HGC290006

Apparecchiatura molto compatta che consente la mobilizzazione passiva del gomito attraverso i movimenti di flessione-estensione e di pronazione-supinazione. La base poggia su 5 ruote piroettanti con freno, questo consente di spostare agevolmente l'apparecchio e di bloccarlo nella posizione desiderata. E' regolabile in altezza e permette di essere utilizzato con paziente seduto. La tastiera mobile fornita con l'apparecchio, consente al paziente di fermare ed avviare il movimento, tramite i tasti STOP e START. Movimenti eseguiti sul gomito (con opportuni accessori):

- Flesso-estensione 0°; 150°
- Pronazione-supinazione 90°; 0°; 90°

Componenti aggiuntivi

- Kit batterie+caricabatteria,cod.HGC290008

MODELLO: LT P PER POLSO cod. HGC290007

Apparecchiatura che consente la mobilizzazione passiva del polso attraverso i movimenti di flessione-estensione e di deviazione ulno-radiale. La base poggia su 5 ruote piroettanti con freno, questo consente di spostare agevolmente l'apparecchio e di bloccarlo nella posizione desiderata. Permette di essere utilizzato con paziente seduto. La tastiera mobile fornita con l'apparecchio, consente al paziente di fermare ed avviare il movimento, tramite i tasti STOP e START. Movimenti eseguiti sul polso (con opportuni accessori):

- Flesso-estensione 80°; 0°; 80°
- Deviazione ulno-radiale 20°; 0°; 30°

Componenti aggiuntivi

- Kit batterie+caricabatteria,cod.HGC290008

LINEA GEA

pedana stabilometrica per arti inferiori



cod. HGC291000

MODELLO: SUPER

La pedana è leggera e trasportabile, sviluppata appositamente per i fisioterapisti, gli osteopati, i chiropratici e i posturologi che operano in contesti specialistici multi disciplinari.

Include una serie di accessori per una valutazione posturale di base e permette di evidenziare le modificazioni posturali del paziente con semplici test per i vari recettori del corpo: occhio, vestibolo, recettori rachidei, piedi, occlusione dentale.

Dimensioni: cm 65x56x5h - Peso 3 kg

Utilizzo

- Test of balance: tramite una serie di test non invasivi della durata complessiva di circa 5 minuti (Test of Balance - TOB), è possibile avere un'indicazione sulle capacità di mantenimento dell'equilibrio. Il test è composto da quattro prove in successione: occhi aperti, occhi chiusi, occhi aperti e successivamente chiusi con cuscino morbido sotto i piedi.



cod. HGC291001

MODELLO: PLUS

GEAPLUS è una pedana stabilometrica statica che registra il centro di pressione per un'analisi multi parametrica dell'equilibrio del soggetto.

La sua ampia base di appoggio e i sostegni laterali consentono, rispetto alla pedane tradizionali, un impiego clinico molto ampio. GEAPLUS è la base di tutto quello che serve per una valutazione ed una riabilitazione dell'equilibrio completa ed efficace.

Utilizzo

- Test dedicato per il recupero propriocettivo tramite il Balance-pad
- Esercizi di biofeedback per il recupero di base della capacità di mantenimento dell'equilibrio tramite:
 - ◆ Esercizi statici durante i quali il monitor mostra la posizione istantanea del Centro di Pressione (COP) in relazione a dei riferimenti fissi sul monitor.
 - ◆ Esercizi di controllo del baricentro in relazione ai movimenti involontari fatti dal paziente sui piani antero-posteriore e latero-laterale.
 - ◆ Esercizi neuromotori: questi consentono al paziente di lavorare al limite della sua stabilità. Vengono mostrati, sul monitor, dei targets che il paziente deve raggiungere spostando il suo Centro di Pressione.



cod. HGC291002

MODELLO: PRO

Composto da una pedana stabilometrica statica e da un attuatore pneumatico che consente una modalità dinamica per la regolazione della rigidità della base d'appoggio.

Utilizzo

La sua resistenza attiva programmabile ne permette l'utilizzo dalla prima fase riabilitativa al costante perfezionamento delle prestazioni atletiche senza cambiare strumento.

La pedana può essere utilizzata in modalità monopodolica o bipodolica e la sua estesa base di appoggio consente gesti motori complessi.

Completa di una console di comando su ruote con integrati computer e monitor per la massima praticità.



cod. HGC291003

MODELLO: HD

Sofisticato strumento per la riabilitazione, l'allenamento propriocettivo e dell'equilibrio.

La pedana stabilometrica ha una reale attivazione dinamica ed è uno strumento sofisticato per la riabilitazione, l'allenamento propriocettivo e dell'equilibrio.

Grazie alla sua versatilità è utilizzabile ad ogni età e condizione fisica. La sua attivazione programmabile ne permette l'utilizzo dalla prima fase riabilitativa al costante perfezionamento delle prestazioni atletiche.

Utilizzo

La pedana può essere utilizzata in modalità monopodolica o bipodolica con venti differenti livelli di instabilità e resistenza.

Il suo motore pneumatico consente per la prima volta in una pedana stabilometrica di riattivare in modo multisensoriale il soggetto sottoposto al training.

Il software del sistema permette all'operatore di oggettivare lo stato di organizzazione sensoriale per il mantenimento dell'equilibrio del paziente.

Un avanzato programma di allenamento a difficoltà crescente, facilita una riattivazione neuro-moto-sensoriale del soggetto.

KAIROS II

per arti superiori



cod. HGC291004



Il sistema Kairos nasce da una rivoluzionaria idea che unisce tecnologia d'avanguardia ad un'accurata progettazione biomeccanica: il risultato è una macchina per l'allenamento funzionale e la riabilitazione neuromuscolare unica nel suo genere.

Il design è ergonomico ed essenziale: per generare forza non utilizza il pacco pesi, ma l'energia dell'aria compressa controllata in modo intelligente e semplice tramite un computer touch screen integrato.

Viene equipaggiata con cilindri pneumatici appositamente sviluppati per attività specifiche di allenamento e per tipologia di utilizzatore. La macchina può essere facilmente potenziata, cambiando semplicemente l'attuatore ad aria compressa.

Inoltre, è dotato di un sensore dedicato al monitoraggio in tempo reale della forza per un'esperienza di allenamento ancora più efficace e divertente ad ogni esercizio.

Il suo impiego è per tutti: si adatta perfettamente a chi fa sport per tenersi in forma e agli atleti di alto livello, per allenarsi in completa sicurezza fino alla soglia massima.

Dimensioni: cm 120x31x250-270h

GABBIA PER RIABILITAZIONE

attrezzature per puleggio terapia



cod. HGC292000

Lettino escluso

Struttura in acciaio verniciato autoportante, con griglie da mm 5 in rete maglia cm 5x5 zinco cromate. Appoggio su piedini regolabili.

Specifiche tecniche

- Carico di lavoro in sicurezza kg 300
- Dimensioni cm 290x124x210h
- Peso della struttura kg 125

Componenti aggiuntivi (ordinabili anche singolarmente con codice del singolo pezzo)

Kit completo cod. HGC292001 composto da:

- talloniera - cod. HGC292002
- coppia cavigliere talloniera - cod. HGC292003
- gambale - cod. HGC292004
- cinturino - cod. HGC292005
- cavigliera - cod. HGC292006
- fascia per sollevamento gambe - cod. HGC292007
- braccio - cod. HGC292008
- testa - cod. HGC292009
- bacino - cod. HGC292010
- fascia per sollevamento completo - cod. HGC292011
- tallone - cod. HGC292012
- fune lungh. mt 20 - cod. HGC292013
- 2 maniglie (1 pezzo cod. HGC292014)
- 8 carrucole (1 pezzo cod. HGC292015)
- 8 moschettoni (1 pezzo cod. HGC292016)
- 8 ganci forma "S" (1 pezzo cod. HGC292018)
- 2 cavigliere con gancio (1 pezzo cod. HGC292017)
- 6 sacchetti peso differente (1 per peso):
 - sacchetto di sabbia da 0,5 kg con occhiello - cod. HGC292019
 - sacchetto di sabbia da 1 kg con occhiello - cod. HGC292020
 - sacchetto di sabbia da 2 kg con occhiello - cod. HGC292021
 - sacchetto di sabbia da 3 kg con occhiello - cod. HGC292022
 - sacchetto di sabbia da 4 kg con occhiello - cod. HGC292023
 - sacchetto di sabbia da 5 kg con occhiello - cod. HGC292024

ERCOLINA

attrezzature per puleggio terapia



cod. HGC292101

MODELLO: ERCOLINA SINGOLA

Struttura in acciaio verniciato, unica stazione a doppio rinvio a corda per terapia riabilitativa.

Carico di lavoro regolabile per un peso max di kg 8.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 30x28x195h cm



cod. HGC292102

MODELLO: ERCOLINA DOPPIA

Struttura in acciaio verniciato a due stazioni a doppio rinvio completa di piano imbottito e rivestito in similpelle lavabile ed ignifuga classe 1IM.

Carico di lavoro regolabile per un peso max di kg 8 per lato.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 102x28x185h cm



cod. HGC292103

MODELLO: POLIERCOLINA

Struttura in acciaio verniciato con parti scorrevoli cromate.

Composta da 2 ercoline laterali a doppio rinvio e da una spalliera centrale con montanti in acciaio verniciato e con 13 pioli in legno.

Carico di lavoro regolabile per un peso max di kg 8 per lato.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 145x28x240h cm

Componenti aggiuntivi per tutti i modelli

- Disco in ghisa verniciato, foro diam. mm 25 - cod. HGC292028
- Sacchetto di sabbia da 0,5 kg con occhiello - cod. HGC292019
- Sacchetto di sabbia da 1 kg con occhiello - cod. HGC292020
- Sacchetto di sabbia da 2 kg con occhiello - cod. HGC292021
- Sacchetto di sabbia da 3 kg con occhiello - cod. HGC292022
- Sacchetto di sabbia da 4 kg con occhiello - cod. HGC292023
- Sacchetto di sabbia da 5 kg con occhiello - cod. HGC292024
- Cavigliera con gancio - cod. HGC292017
- Talloniera - cod. HGC292002



cod. HGC292050

MODELLO: POLIERCOLINA 3000

Pacco pesi in acciaio 50 kg selezionabili su 20 livelli, carter di protezione integrale con superficie a specchio, sistema di carrucole e pulegge in alluminio anodizzato con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

Sistema di cavi in acciaio rivestiti in poliuretano.
In dotazione coppia maniglie pulley.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 636x165x1980 mm
- SUPER SLIM: 16,5 cm di profondità
- Peso del prodotto 103 Kg
- Struttura pre-assemblata da fissare al muro, verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio.



cod. HGC292051

MODELLO: POLIERCOLINA 3500

Pacco pesi in acciaio 2 x 50 kg selezionabili su 20 livelli, carter di protezione integrale con superficie a specchio, sistema di carrucole e pulegge in alluminio anodizzato con cuscinetti a sfera HIGH PERFORMANCE

Sistema di cavi in acciaio rivestiti in poliuretano.
In dotazione coppia maniglie pulley.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 970x165x1980 mm
- SUPER SLIM: 16,5 cm di profondità
- Peso del prodotto 172 Kg
- Struttura pre-assemblata da fissare al muro, verniciatura doppio strato a polveri epossidiche, antigraffio.

Componenti aggiuntivi per tutti i modelli

Disco in ghisa nera Tri grip per foro Ø50 mm, ideale per chi desidera svolgere esercizi di tonificazione muscolare. Il disco è realizzato con materiale di qualità in grado di garantire la massima durata nel tempo ed è dotato di impugnature tri grip che permette una presa in piena sicurezza. Il disco è disponibile con pesi differenti e in 2 versioni, con rivestimento gommato e senza.

- Disco in ghisa gommato Kg. 1,25 - cod. HGC292052
- Disco in ghisa gommato Kg. 2,5 - cod. HGC292053
- Disco in ghisa gommato Kg. 5 - cod. HGC292054
- Disco in ghisa gommato Kg. 10 - cod. HGC292055
- Disco in ghisa gommato Kg. 15 - cod. HGC292056
- Disco in ghisa gommato Kg. 20 - cod. HGC292057
- Disco in ghisa gommato Kg. 25 - cod. HGC292058



RUOTA DEI LAPIDARI

attrezzature per riabilitazione arti



cod. HGC293000



cod. HGC293001

RUOTA DEI LAPIDARI

Dispositivo per la riabilitazione della spalla e del gomito. Ruota regolabile in altezza con frizione per regolare lo sforzo. Dotata di struttura in acciaio verniciato con parte scorrevole cromata, è disponibile a parete oppure a pavimento.

Specifiche tecniche

- Altezza 160 cm
- Larghezza 110 cm
- Profondità della ruota a parete 30 cm
- Profondità della ruota a pavimento 66 cm
- Base solo della ruota a pavimento 90 x 60 cm

ATTREZZATURE

per riabilitazione arti



SCALETTA PER LE MANI cod. HGC294000

Scaletta in legno indicata per esercizi di riabilitazione della mano.

Specifiche tecniche

Larghezza 30 cm - Altezza 60 cm



SPIRALE VERTICALE cod. HGC294001

Per la torsione e la prono-supinazione della mano e del braccio.

Specifiche tecniche

Base in legno: dimensioni 40x17x30h cm

Altezza vite senza fine 20 cm



SPIRALE ORIZZONTALE cod. HGC294002

Per la prono-supinazione della mano e dell'avambraccio.

Specifiche tecniche

Base in legno: dimensioni 40x17x25h cm




VITE SENZA FINE cod. HGC294003

Per la rotazione della mano.

Specifiche tecniche

Base in legno: dimensioni 40x17x20h cm

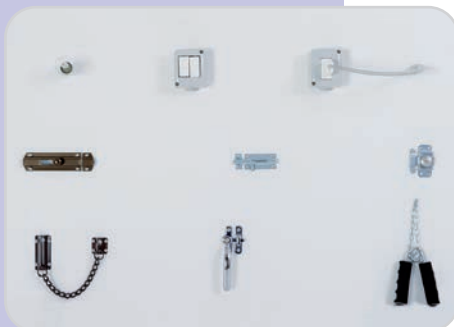

PANNELLO PER ERGOTERAPIA cod. HGC294004

Per la riabilitazione degli arti superiori, composto da 9 elementi che simulano le attività quotidiane:

1. avvitare/svitare una lampadina
2. accendere/spegnere un interruttore
3. collegare/scollegare una spina elettrica
4. far scorrere un chiavistello
5. girare un chiavistello
6. far scorrere un cricchetto a scorrimento
7. agganciare una catenella per porta
8. aprire/chiudere una maniglia
9. aprire/chiudere un manubrio a forza

Specifiche tecniche

Dimensioni 100x60 cm


ATTREZZATURE

per riabilitazione arti



MANUBRIO A FORCA cod. HGC294005


Strumento utilizzato per la riabilitazione della mano e del polso con impugnatura in spugna. Confezione 2 pezzi.

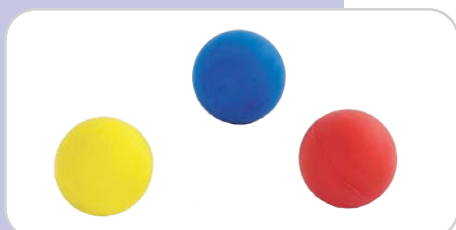

PALLINE IN SPUGNA cod. HGC294006

Pallina in gommapiuma morbida, leggera e colorata, ideale per la rieducazione funzionale delle dita e della mano.

Dimensioni Ø 7 cm

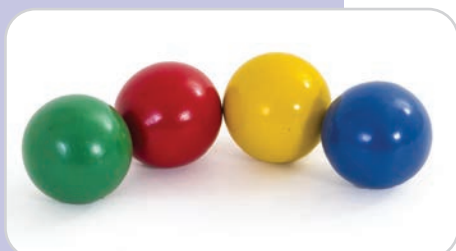

SFERE IN LEGNO cod. HGC294007

Sfere in legno ideali per la rieducazione funzionale delle dita e della mano. Confezione da 4 pezzi, colori assortiti.

Dimensioni Ø 6 cm



DISCHI IN LEGNO cod. HGC294008

Dischi in legno colorato ideali per la rieducazione funzionale delle dita e della mano. Confezione da 4 pezzi, colori assortiti.

Dimensioni Ø 6x3 cm.



PEDANINA ACCELERATORE cod. HGC294009

In legno verniciato con all'interno un cuscino a cuneo rivestito in similpelle, è adatta per gli esercizi della caviglia e del piede.

Dimensioni 24x14x15h cm

ATTREZZATURE

per riabilitazione arti



ESERCITATORE PER DITA


HGC294010 - modello Light
HGC294011 - modello Medium
HGC294012 - modello High



UOVA SILICONE

Esercitatore per la presa della mano, permette di scegliere tra diversi livelli di resistenza.

HGC294015 - modello x-soft - gialla
HGC294016 - modello soft - rossa
HGC294017 - modello medio - verde
HGC294018 - modello resistente - blu
HGC294019 - modello x-resistente - nero

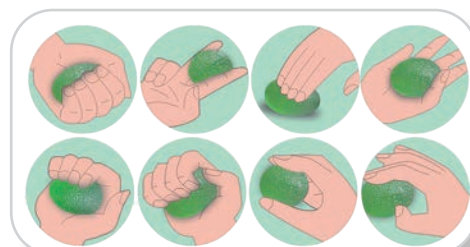

ESERCITATORE DITA SET 3 PZ. cod. HGC294025

Un set che offre 3 diversi livelli di resistenza: leggero - medio - alto



BARRE FLESSIBILI

L'attrezzo ha superficie ondulata per realizzare esercizi di presa ed allenare la forza tramite flessione, torsione o vibrazione.

HGC294027 - soft - gialla
HGC294028 - media - verde
HGC294029 - resistente - rossa

ATTREZZATURE

per riabilitazione arti



ESERCITATORE DITA

Esercitatore per la distensione delle dita, ha diversi livelli di resistenza.

HGC294020 - modello x-soft - giallo

HGC294021 - modello soft - verde

HGC294022 - modello medio - rosso

HGC294023 - modello resistente - blu

HGC294024 - modello x-resistente - nero



DINAMOMETRO cod. HGC294026

In plastica, l'indicatore rimane al massimo livello fino all'azzeramento ed è calibrato a 0-75 kg.

TAVOLO

per l'utilizzo di tutte le attrezzature



TAVOLO CON SEZIONE CENTRALE INCLINABILE cod. 100112



Regolabile in altezza con pistone a gas, consente di adeguare il piano di appoggio anteriore, pur occupato dai sussidi, alle esigenze dell'esercizio ed alla dimensione del paziente. La parte centrale di cm.60 di larghezza è inclinabile, mentre le due laterali si mantengono orizzontali per consentire che le braccia restino in appoggio.

Dimensioni cm 90x60x62/95h

Sezione SUSSIDI ETC



Il "Metodo Perfetti" è un approccio riabilitativo che nasce intorno agli anni '60 dal pensiero italiano del Prof. Carlo Perfetti. Nasce in Italia la miglior risposta riabilitativa agli esiti di ictus, emiplegia e spasticità. Le intuizioni del Prof. Carlo Perfetti hanno determinato una svolta nel contesto riabilitativo specialmente all'interno della riabilitazione post ictus. Fino alla nascita del Metodo Perfetti, la riabilitazione dell'ictus cerebrale e dell'emiplegia si riduceva al rinforzo muscolare e alla stimolazione di riflessi. Il Metodo Perfetti traduce in riabilitazione ed esercizi lo sviluppo ed il progresso delle conoscenze in ambito medico-scientifico, considerando finalmente anche i processi cognitivi per il recupero del movimento.

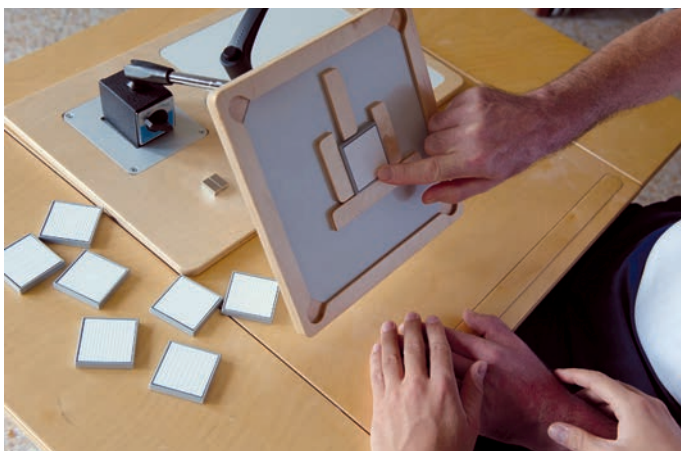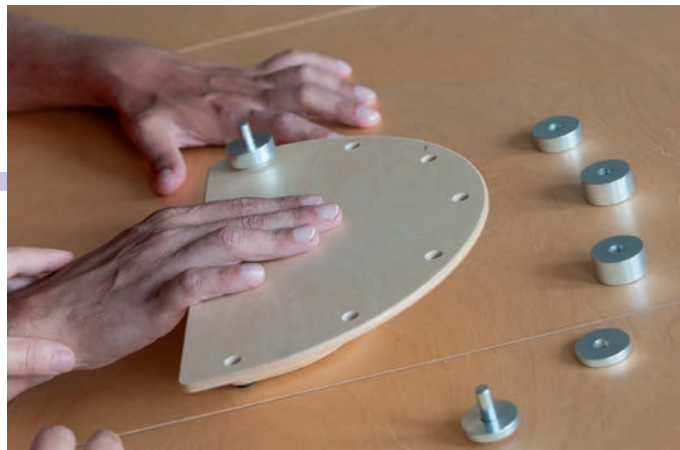

Serie Mano

Sussidi



Un nuovo concetto, un nuovo pensiero, un nuovo progetto di collaborazione: nasce la serie di Sussidi Mano.

«Non si può tentare di comprendere il profondo significato della attività della mano se non si tiene conto del rapporto che questo segmento, attraverso tutte le funzioni alle quali partecipa, ha con la mente dell'uomo.»

Carlo Perfetti, "Lo specchio del cervello"

Con un approccio tecnologico e professionale, che ha permesso di coniugare le esigenze di funzionalità e semplicità nell'applicazione pratica degli esercizi, Fumagalli Care&Reha in collaborazione con il Centro Studi Riabilitazione Neurocognitiva di Villa Miari ha progettato una nuova serie di Sussidi, dedicati specificatamente agli esercizi per la Mano con un approccio diverso: ampliare i piani di lavoro per permettere esercizi anche sul piano tridimensionale, coinvolgendo anche tutto l'arto superiore. «Parlando di informazioni alcuni studiosi preferiscono fare ricorso al termine "costruire", anziché quello di raccogliere, in quanto costruire sta a significare che le informazioni non sono contenute, già pronte, all'interno della realtà, ma che vengono derivate dal tipo di interazione, cioè dal rapporto che si instaura, anche attraverso i movimenti della mano, tra il sistema uomo e il mondo. In questa ottica si può quindi tentare di interpretare i movimenti della mano come facenti parte di quelle operazioni che servono per interagire con il mondo al fine di costruire le informazioni che a loro volta servono per modificare il sistema uomo.»

Carlo Perfetti, "Lo specchio del cervello"



Il risultato, frutto di un continuo confronto e scambio di informazioni, è una serie composta da elementi diversi, che permettono di lavorare su esperienze tattili e di rieducazione a movimenti complessi, con tessere con sagome e superfici differenti, con possibilità di posizionare la mano in posizioni infinite per permettere alla persona di elaborare l'esercizio nel modo che più le è consono: l'ausilio visto come lo strumento per mettere in relazione terapeuta e malato un aiuto, un facilitatore e non un impedimento.

«La possibilità di porre in atto diverse modalità di conoscenza nei confronti dello stesso oggetto e delle sue diverse caratteristiche è consentita dal fatto che l'uomo può atteggiare le dita sull'oggetto in una maniera anziché un'altra, può effettuare pressioni diverse, ... può combinare diversamente i movimenti dei diversi segmenti che compongono la mano. Ma per poter rispondere a questo compito, ..., il segmento mano deve godere di una certa libertà di scelta tra le diverse possibilità di movimento che concedono di costruire le diverse informazioni.»

Carlo Perfetti, "Lo specchio del cervello"

Serie 1

Sussidi




La Serie 1 permette di eseguire una serie di esercitazioni che possono coinvolgere tutti i segmenti dell'arto superiore fin dalle fasi iniziali del trattamento, allorché è opportuno guidare il paziente al controllo sulla reazione allo stiramento evitando compiti che richiedano contrazioni muscolari in maniera implicita o esplicita. È costituito da un tabellone inclinabile sul quale si trovano gli alloggiamenti per una serie di tessere a contatto delle quali il terapeuta deve guidare la mano del paziente che dovrà effettuarne il riconoscimento ad occhi chiusi.


Il sussidio include, inoltre, una serie di sezioni in legno con forme differenti, che permettono di realizzare esercizi mirati alla riabilitazione dei diversi segmenti dell'arto superiore e inferiore. Infine, i piattelli oscillanti completano i sussidi a disposizione del terapeuta per realizzare il percorso riabilitativo.




Piattaforma sagomata con arco per pronosupinazione della mano

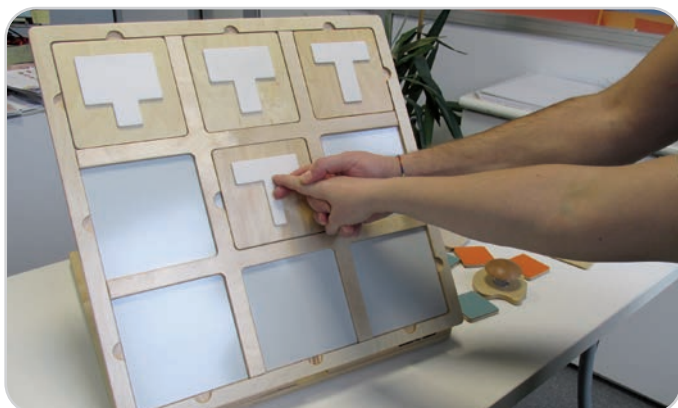

Tabellone inclinabile in legno con tessere magnetiche per il riconoscimento delle diverse forme ad occhi chiusi

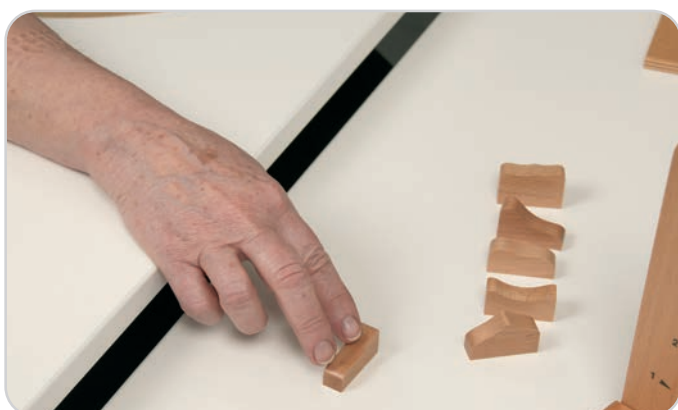

Ondine in legno per la singolarizzazione delle dita

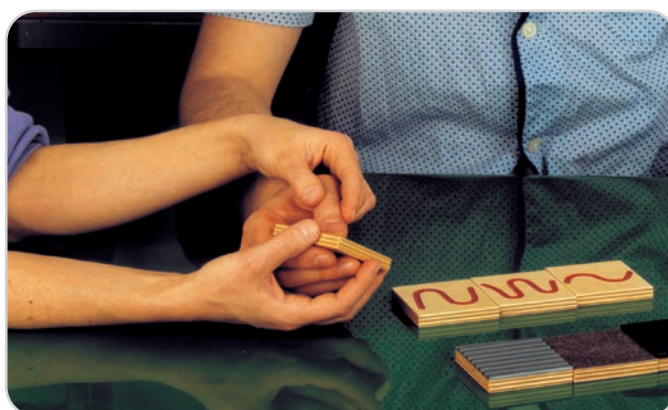

Tessere superfici tattili a ondine e "diverse curve"

Serie 2

Sussidi



La Serie si compone di una serie di piattaforme di diversa forma e tipo di inclinazione, che possono essere utilizzate per esercitazioni con l'arto superiore e inferiore sia in stazione eretta che posizione seduta.

Completa la serie il piano con rulli, utilizzabile anche con le piattaforme, che permette esercizi per il trattamento dell'arto inferiore secondo diverse modalità, da effettuare in diverse posizioni.



Piattaforma tonda con perno centrale



Piano rettangolare con cerniera trasversale, con inclinometro e cuscinetti in espanso con diverse densità



Particolare del piano rettangolare con cerniera longitudinale, 2 agganci con pesi su rulli.

Serie 3

Sussidi




La Serie 3 si compone di 3 tipologie di sussidi che permettono un'ampia gamma di esercizi che vanno dalle fasi iniziali (esercizi secondo modalità di primo grado ed in posizione seduta) fino alle prime fasi dell'acquisizione della stazione eretta.

Il piano inclinabile è utilizzabile per esercitazioni particolari anche con l'arto superiore, le tavolette basculanti possono integrare gli esercizi realizzati con la Serie 1 e sono utilizzabili anche con l'arto inferiore, e il sussidio mobile per soppesamenti che permettono di realizzare esercitazioni nei confronti di informazioni ponderali con le dita della mano.



Sistema basculante per arto superiore o inferiore, con 3 tavolette serigrafate, cuscinetti in espanso ed emisfere di diverse altezze e diametro

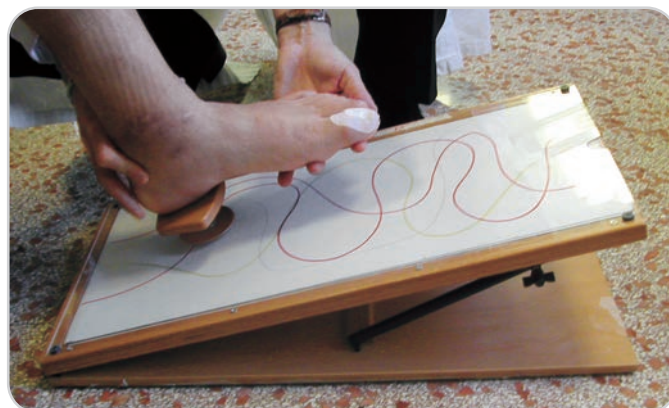

Piano inclinabile con diverse traiettorie da percorrere con il piattello sotto la pianta del piede



Riconoscimento della diversa consistenza dei cuscinetti in espanso sulle spalle.



Esercizio su piano inclinato con arto inferiore.

Serie 4

Sussidi




La Serie 4 include 3 piattaforme con molle a resistenza regolabile, che consentono, in una fase evoluta del recupero del paziente, lo svolgimento di esercizi definiti "di trasferimento controllato di carico".

Le piattaforme permettono esercizi di bilanciamento e soppesamento sia con l'arto superiore sia inferiore, inoltre, la piattaforma con indicatore e possibilità di rotazione gli esercizi possono essere portati in modo graduale fino alla esecuzione attiva di traiettorie poste di fronte al sussidio.



Piattaforma tonda con molle, regolabili in quanto a resistenza e tabellone con tessere.

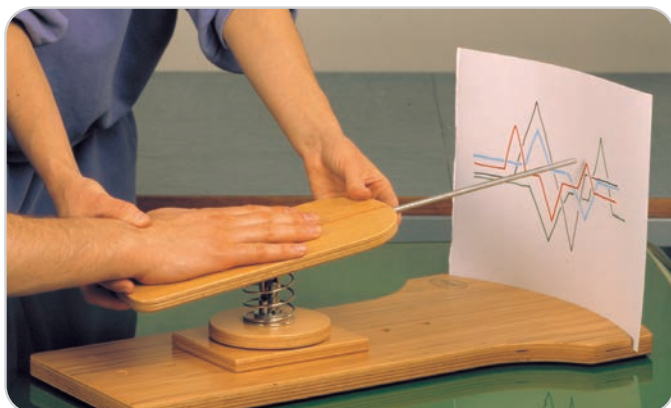

Piattaforma oscillante con possibilità di rotazione ed indicatore per arto inferiore e superiore.



Esercizio di "trasferimento controllato di carico".

ATTREZZATURE



TAVOLO CON SEZIONE CENTRALE INCLINABILE

Regolabile in altezza con pistone a gas, consente di adeguare il piano di appoggio anteriore, pur occupato dai sussidi, alle esigenze dell'esercizio ed alla dimensione del paziente. La parte centrale di cm.60 di larghezza è inclinabile, mentre le due laterali si mantengono orizzontali per consentire che le braccia restino in appoggio.

Codice e dimensione

100112 - Dimensioni cm 90x60x62/95h




APPOGGI PARALLELI PER STAZIONE ERETTA

Permettono di realizzare i migliori sostegni per la stazione eretta, in modo da consentire la necessaria stabilità per l'esecuzione degli esercizi con gli arti inferiori.

Codice e dimensione

100110 - Dimensioni cm 114x82x77/105h

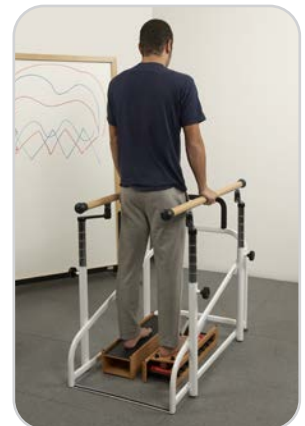


SGABELLO CON RUOTE

Realizzato con telaio in metallo, ha piano imbottito e superficie in materiale facilmente sanificabile, utile per il terapeuta durante gli esercizi a terra.

Codice e dimensione

216502 - Dimensioni cm 40x35x30h

Sezione ELETTROMEDICALI

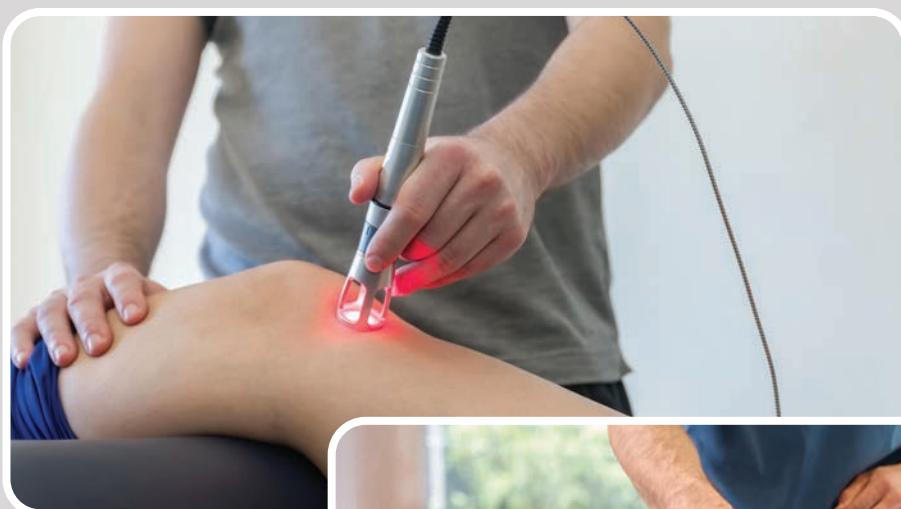

Le apparecchiature elettromedicali per la riabilitazione fondono innovazione e tecnologia per migliorare la qualità della vita dei pazienti. La gamma completa di soluzioni avanzate sono progettate per supportare ogni fase del percorso riabilitativo con la massima efficacia. I prodotti, affidabili e all'avanguardia, sono pensati per facilitare il lavoro dei professionisti e favorire il recupero ottimale dei pazienti. Scoprite come le nostre apparecchiature possono trasformare la riabilitazione in un'esperienza positiva e sicura.

POLYTER EVO

modulare



cod. HGC300000

L'innovativa modularità espandibile!

Polyter Evo è un dispositivo versatile che può essere implementato in base alle proprie esigenze. Si tratta di un'apparecchiatura "viva" in quanto è possibile espanderla con nuovi moduli in qualsiasi momento, in completa autonomia. L'innovativa concezione di modularità espandibile consente di avere in un unico contenitore una o più tecnologie.

Componenti di serie

- Valigetta rigida completa di chiave, ruote, maniglia telescopica, vano portaccessori, fusibili e cavo alimentazione
- Programma Singolo e Multitherapy
- Software Aggiornabile tramite USB
- Alimentazione a rete o a batteria
- Display Touch screen a colori 7"

MODULI PER COMPLETARE

MODULO ULTRASUONI cod. HGC30001

Manipolo multifrequenza 1/3 MHz con sensore di contatto integrato

Uscite 1

Protocolli memorizzati Sì

Modalità di lavoro Continua/Pulsata (10- 100% in step da 10%)

Potenza in modalità pulsata: da 0.1 a 3 W per cm²

Potenza in modalità continua Da 0.1 a 2 W per cm²

Componenti di serie

- Manipolo 1/3 MHz diametro 5 cm², auto calibrante, immergibile in acqua, dotato di segnale luminoso e di contatto

Componenti aggiuntivi

- Manipolo ultrasuoni 1/3 MHz, area emittente 5 cm² - cod.HGC30002
- Manipolo ultrasuoni 1/3 MHz, area emittente 8 cm² - cod.HGC30003

MODULO MAGNETOTERAPIA cod. HGC30004

- 1 canale
- Emissione continua o pulsata
- Protocolli memorizzati sì
- Potenza 100 gaussù
- Frequenza da 1 a 100 Hz
- Duty Cycle da 10% a 100%

Componenti di serie

- Magnete per controllo emissione campi magnetici
- Coppia applicatori
- Fascia elastica 1000x50 mm
- Fascia elastica 600x50 mm

Componenti aggiuntivi

- Applicatori magnetoterapia (16x10x3.5 cm) - cod. HGC30005

MODULI

MODULO LASER A BASSA POTENZA cod. HGC30006

- 1 canale
- Frequenza da 100 Hz a 10.000 Hz
- Emissione continua e pulsata
- Calcolo automatico della fluenza (J)
- Generatore con possibilità di pilotare manipoli monodiodici e multidiodici
- Lunghezza d'onda: 905 nm
- Protocolli memorizzati sì
- Visualizzazione/modifica area di trattamento in cm²
- Riconoscimento del manipolo collegato
- Manipoli laser dotati di sensore di contatto

Componenti di serie

- Manipolo laser 25 mW
- Occhiale di protezione laser IR modello OLV
- Interlock

Componenti aggiuntivi

- Manipolo laser 905 nm - 1 diodo 25 mW - cod. HGC30007
- Manipolo laser 905 nm - 1 diodo 100 mW - cod. HGC30008
- Manipolo laser 905 nm - 3 diodi 100 mW - cod. HGC30009
- Manipolo laser 905 nm - 5 diodi 100 mW - cod. HGC30010
- Occhiale di protezione laser modello OLV - cod. HGC30011

MODULO ELETTROTHERAPIA cod. HGC30013

- 25 forme d'onda: bassa e media frequenza
- Funzionamento: tensione costante, corrente costante
- Canali 2 indipendenti sincronizzabili
- Funzionamento In CC e CV con inversione di polarità automatica degli elettrodi a metà trattamento
- Forma d'onda 25 forme: bassa/media frequenza, ionoforesi, TENS
- Intensità max 100 mA

Componenti di serie

- Cavo ET a 2 canali (2 mm)
- Elettrodi 60x85 mm
- Spugne per elettrodi 60x85 mm
- Elettrodi 50x50 mm
- Spugne per elettrodi 50x50 mm
- Fasce elastiche 1000 mm
- Fasce elastiche 600 mm

Componenti aggiuntivi

- Cavo uscita modulo elettroterapia - cod. HGC30014
- Elettrodo multiuso in gomma conduttiva mm 50x50 (2 mm) - cod. HGC30015
- Elettrodo multiuso in gomma conduttiva mm 60x85 (2 mm) - cod. HGC30016
- Spugna per elettrodo 50x50 mm - cod. HGC30017
- Spugna per elettrodo 60x85 mm - cod. HGC30018
- Fascia elastica lunga (1000x50 mm) - cod. HGC30019
- Fascia elastica corta (600x50 mm) - cod. HGC30020

MODULO LASER AD ALTA POTENZA cod. HGC30012

- Potenza massima 4 W
- Emissione continua e pulsata
- Lunghezza d'onda: 980 nm
- Uscite 1
- Protocolli memorizzati sì
- Frequenza regolabile da 100 Hz a 10.000 Hz
- Potenza massima 4 W
- Lunghezza d'onda 980 nm

Componenti di serie

- Manipolo laser
- Occhiale di protezione laser IR modello YG3
- Interlock
- Pedale HPLS con protezione richiudibile 9005

MODULO TECAR cod. HGC30021

- Modalità capacitiva/resistiva
- Potenza fino a 200 W
- Emissione continua e pulsata
- Modalità di lavoro in atermia, ipertemia, omotermia
- Uscite 1
- Funzione Capacitiva/Resistiva
- Potenza massima 200 W

Componenti di serie

- Manipolo resistivo ad inforco 1
- Elettrodi resistivi ϕ 30-50-70 mm 3
- Manipolo capacitivo ad inforco 1
- Elettrodi capacitivi ϕ 30-50-70 mm 3
- Piastra in acciaio 1
- Gel conduttivo 1000 ml 1

Componenti aggiuntivi

- Manipolo capacitivo ad inforco - cod. HGC30022
- Manipolo resistivo ad inforco - cod. HGC30023
- Inserto trattamenti resistivi ϕ 30 mm - cod. HGC30024
- Inserto trattamenti resistivi ϕ 50 mm - cod. HGC30025
- Inserto trattamenti resistivi ϕ 70 mm - cod. HGC30026
- Inserto trattamenti capacitivi ϕ 30 mm - cod. HGC30027
- Inserto trattamenti capacitivi ϕ 50 mm - cod. HGC30028
- Inserto trattamenti capacitivi ϕ 70 mm - cod. HGC30029
- Manipolo bipolare ad inforco ϕ 45mm - cod. HGC30030
- Manipolo bipolare ad inforco ϕ 70mm - cod. HGC30031
- Kit per applicazioni in movimento (cavo + 10 piastre adesive) - cod. HGC30032
- Piastra adesiva per applicazioni in movimento (10 pz) - cod. HGC30033
- Gel conduttivo 1000 ml - cod. HGC30034
- Piastra in acciaio (1 pz) - cod. HGC30035



ONDE D'URTO



Le onde d'urto sono onde acustiche che trasportano alta energia. Vengono trasmesse attraverso la superficie della pelle e diffuse radialmente nel corpo, nella zona del dolore.

SHOCKMED possiede uno scarico automatico della condensa del circuito pneumatico, che permette di aumentare l'affidabilità del dispositivo, riducendo allo stesso tempo la manutenzione ordinaria richiesta all'operatore.

MODELLO MED cod. HGC301000

Specifiche tecniche

- Modalità emissione CONTINUA AUTO/MANUALE
- Display Touch screen a colori 10.1"
- Pressione massima 5 Bar
- Frequenza 20 Hz
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200 e memorizzabili su USB

Componenti di serie

- Applicatore SWT (incluso kit)
- Kit intercambiabile applicatore
- Trasmettitore multi-focalizzato 9 mm
- Trasmettitore multi-focalizzato 15 mm
- Trasmettitore focalizzato 15 mm
- Gel 1000 ml
- Valigia per applicatore

Componenti aggiuntivi per entrambi i modelli

- Kit intercambiabile per applicatore - cod. HGC301002
- Trasmettitore focalizzato 15 mm - cod. HGC301003
- Trasmettitore focalizzato 35 mm - cod. HGC301004
- Trasmettitore multi-focalizzato 9 mm - cod. HGC301005
- Trasmettitore multi-focalizzato 15 mm - cod. HGC301006

MODELLO MED SP cod. HGC301001

Specifiche tecniche

- Modalità emissione CONTINUA AUTO/MANUALE
- Display Touch screen a colori 10.1"
- Pressione massima 4 Bar
- Frequenza 15 Hz
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200 e memorizzabili su USB

Componenti di serie

- Applicatore SWT (incluso kit)
- Kit intercambiabile applicatore
- Trasmettitore multi-focalizzato 9 mm
- Trasmettitore multi-focalizzato 15 mm
- Trasmettitore focalizzato 15 mm
- Gel 1000 ml
- Valigia per applicatore

TECAR



Il trattamento tecar garantisce sollievo immediato e riduce i tempi di recupero.

Questa tecnologia, nella nuova versione HP è provvista di 3 frequenze di lavoro : garantisce la totale efficacia nei trattamenti terapeutici desiderati ed è in grado di stimolare i tessuti dall'interno, accelerando i naturali processi riabilitativi.

La terapia tecar consente un'azione profonda e omogenea, senza dispersione di energia, assicurando:

1. Sensibile diminuzione del dolore
2. Riduzione di contratture e tensioni muscolari
3. Riassorbimento degli edemi

MODELLO HT2043 cod. HGC302006

- Display Touch Screen a colori 10.1"
- Manipoli porta-elettrodi capacitivi, resistivi, bipolari
- Potenza massima 250 W
- Frequenza 445 kHz, 900 kHz, 1.2 MHz
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200 e memorizzabili su USB

Componenti di serie

- Manipolo capacitivo
- Manipolo resistivo
- Manipolo bipolare 50 mm
- Inserti per trattamenti capacitivi 30/50/70 mm
- Inserti per trattamenti resistivi 30/50/70 mm
- Piastra in acciaio
- Gel conduttivo 1000 ml

Componenti aggiuntivi per entrambi i modelli

- Manipolo capacitivo - cod. HGC302008
- Manipolo resistivo - cod. HGC302009
- Inserto trattamenti resistivi ϕ 30 mm - cod. HGC300024
- Inserto trattamenti resistivi ϕ 50 mm - cod. HGC300025
- Inserto trattamenti resistivi ϕ 70 mm - cod. HGC300026
- Inserto trattamenti capacitivi ϕ 30 mm - cod. HGC300027

MODELLO HT2044 cod. HGC302007

- DisplayTouch Screen a colori 10.1"
- Manipoli porta-elettrodi capacitivi, resistivi, bipolari
- Potenza massima 250 W
- Frequenza 445 kHz
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200 e memorizzabili su USB

Componenti di serie

- Manipolo capacitivo
- Manipolo resistivo
- Manipolo bipolare 50 mm
- Inserti per trattamenti capacitivi 30/50/70 mm
- Inserti per trattamenti resistivi 30/50/70 mm
- Piastra in acciaio

- Inserto trattamenti capacitivi ϕ 50 mm - cod. HGC300028
- Inserto trattamenti capacitivi ϕ 70 mm - cod. HGC300029
- Manipolo bipolare 30 mm - cod. HGC302016
- Manipolo bipolare 70 mm - cod. HGC302017
- Piastra in acciaio - cod. HGC300035
- Flacone Gel conduttivo 1000 ml - cod. HGC300034

TECAR



cod. HGC303000

MODELLO REACARE

Dispositivo di diatermia capacitiva-resistiva con trattamenti dedicati alla riabilitazione e allo sport, personalizzabili grazie alle memorie libere. È ideale per trattare dolori articolari, artrosi al ginocchio ed edema, ma anche per aiutare gli sportivi a recuperare dopo un infortunio. SK361-05

Specifiche tecniche

- Display a colori
- Programmi: 24 REHAB, 10 SPORT
- Modalità CUSTOM
- 10 Memorie Libere
- Potenza 160 W, frequenza 400÷600 kHz, modulazione fino a 100 Hz

Componenti di serie

- Manipolo resistivo
- Manipolo capacitivo
- Elettrodi capacitivi 60 mm e 35 mm Ø
- Elettrodi resistivi 60 mm e 35 mm Ø
- Piastra di ritorno
- Confezione crema

Componenti aggiuntivi per entrambi i modelli

- Manipolo Bipolare 50mm - cod. HGC303002
- Manipolo Capacitivo - cod. HGC303003
- Manipolo Resistivo - cod. HGC303004
- Elettrodo Capacitivo 35 mm - cod. HGC303005
- Elettrodo Capacitivo 60 mm - cod. HGC303006



cod. HGC303001

MODELLO ATHERM

Ultimo modello di diatermia capacitiva e resistiva, con effetto di neuro-modulazione. È l'alleato ideale sia per i professionisti della salute, sia per i pazienti. Grazie alle sue 400 frequenze (da 300 a 700 kHz) e al suo sistema modulato (1-100 Hz), i terapisti potranno adattare ogni trattamento alle esigenze dei propri pazienti, ottenendo risultati eccellenti sia nel trattare patologie acute, sia croniche. D'altra parte, i pazienti troveranno sollievo in poco tempo, già a partire dalla prima seduta.

Specifiche tecniche

- Display a colori
- Programmi: 35 REHAB, 5 BEAUTY, 10 SPORT
- Modalità CUSTOM
- 10 Memorie Libere
- Potenza 200 W, frequenza 300÷700 kHz, modulazione fino a 100 Hz.

Componenti di serie

- Manipolo resistivo
- Manipolo capacitivo
- Elettrodi capacitivi 60 mm e 35 mm Ø
- Elettrodi resistivi 60 mm e 35 mm Ø
- Manipolo bipolare con elettrodo 50 mm Ø
- Piastra di ritorno D Confezione crema

- Elettrodo Resistivo 35 mm - cod. HGC303007
- Elettrodo Resistivo 60 mm - cod. HGC303008
- Piastra ritorno full cavo - cod. HGC303009
- Gel conduttivo Diatermia 1000 ml - cod. HGC303010
- Borsa Diatermia - cod. HGC303011

COMBINATI



cod. HGC306000

MODELLO COMBIMED 4000

Specifiche tecniche

- Display Touch screen a colori 10"
- Protocolli memorizzati e memorizzabili in memoria interna oltre 500

ULTRASUONI

- Uscite 1
- Frequenza 1/3 Mhz
- Potenza in MODELLO pulsata Da 0.1 a 3 W per cm²
- Potenza in MODELLO continua Da 0.1 a 2 W per cm²

LASERTERAPIA

- Uscite 1
- Lunghezza d'onda 905 nm
- Frequenza 200-10.000 Hz
- Emissione Continua
- Calcolo automatico joule

ELETTROTERAPIA

- Uscite 2 indipendenti
- Funzionamento In modalità CC e VC
- Forma d'onda 30 bassa e media frequenza, curva I/T

Componenti aggiuntivi ULTRASUONI

- TV5 Manipolo ultrasuoni 1/3 MHz, area emittente 5 cm² - cod. HGC306004
- TV8 Manipolo ultrasuoni 1/3 MHz, area emittente 8 cm² - cod. HGC306005

Componenti aggiuntivi LASERTERAPIA

- Manipolo laser 1 diodo 100 mW - cod. HGC306006
- Manipolo laser 3 diodi 300 mW - cod. HGC306007
- Manipolo laser 5 diodi 500 mW - cod. HGC306008
- Occhiale protezione laser IR modello OLV - cod. HGC300011

Componenti aggiuntivi ELETTROTERAPIA

- Elettrodo in gomma conduttiva 60 x 85 mm - cod. HGC300016
- Elettrodo in gomma conduttiva 50 x 50 mm - cod. HGC300015
- Spugna per elettrodi 60 x 85 mm - cod. HGC300018
- Spugna per elettrodi 50 x 50 mm - cod. HGC300017
- Fascia elastica 1000 x 50 mm - cod. HGC300019
- Fascia elastica 600 x 50 mm - cod. HGC300020
- Cavo uscita per elettroterapia 2 canali - cod. HGC300014
- Gel conduttivo 260ml - cod. HGC306017
- Gel conduttivo 1000ml - cod. HGC306018
- Smart Card - cod. HGC305004



cod. HGC306001

MODELLO COMBIMED 2200

Specifiche tecniche

- Display Grafico a colori 320x240 px Touch & scroll
- Protocolli memorizzati e memorizzabili in memoria interna: 100 Elettroterapia, 100 Ultrasuoni

ULTRASUONI

- Uscite 1
- Frequenza 1/3 Mhz
- Potenza in MODELLO pulsata Da 0.1 a 3 W per cm²
- Potenza in MODELLO continua Da 0.1 a 2 W per cm²

ELETTROTHERAPIA

- Uscite 2 indipendenti
- Funzionamento In modalità CC e VC
- Forma d'onda 30 bassa e media
- frequenza, curva I/T

Componenti aggiuntivi ULTRASUONI

- Manipolo ultrasuoni TV5 1/3 MHz area emittente 5 cm² - cod. HGC306002
- Manipolo ultrasuoni TV8 1/3 MHz area emittente 8 cm² - cod. HGC306003

Componenti aggiuntivi ELETTROTHERAPIA

- Elettrodo in gomma conduttiva 60 x 85 mm - cod. HGC300016
- Elettrodo in gomma conduttiva 50 x 50 mm - cod. HGC300015
- Spugna per elettrodi 60 x 85 mm - cod. HGC300018
- Spugna per elettrodi 50 x 50 mm - cod. HGC300017
- Fascia elastica 1000 x 50 mm - cod. HGC300019
- Fascia elastica 600 x 50 mm - cod. HGC300020
- Cavo uscita per elettroterapia 2 canali - cod. HGC300014
- Gel conduttivo 260ml - cod. HGC306017
- Gel conduttivo 1000ml - cod. HGC306018
- Smart Card - cod. HGC305004

COMBINATI

manipolo singolo



Componenti in dotazione

- 2 elettrodi in gomma silicone 70X100mm
- 2 spugne porta elettrodo 80X120mm
- 2 buste con 4 elettrodi 50X100mm
- 1 fascia ferma elettrodi 75X1200mm
- Alimentatore 15V 3A
- Cavo elettroterapia principale
- Manipolo ultrasuono 5 cm2
- Manuale di posizionamento degli elettrodi
- 2 elettrodi in gomma silicone 60X90mm
- 2 spugne porta elettrodo 70X100mm
- 2 buste con 4 elettrodi 50X50mm
- 1 fascia ferma elettrodi 75X600mm
- 2 cavi elettroterapia a due derivazioni rossi/neri
- Cavo alimentazione
- Cavo elettroterapia a una derivazione per terapia combinata
- Gel per ultrasuono

cod. HGC312000

Dispositivo professionale dotato della massima flessibilità terapeutica per il professionista grazie alle tre modalità applicative: ultrasuonoterapia (1 MHz – 3 MHz), elettroterapia e terapia combinata elettroterapia-ultrasuonoterapia.

La possibilità di lavoro in terapia combinata permette di sfruttare gli effetti terapeutici delle due tecniche offrendo in questo modo un dispositivo estremamente completo e facilmente adattabile a numerosi protocolli terapeutici.

Specifiche tecniche - modalità ULTRASUONOTERAPIA

- Alimentazione 100V-240V, 47Hz-63Hz, 1.35A con alimentatore 15V 3A Max.
- Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display grafico LCD
- Frequenza ultrasuono 1 MHz $\pm$ 10%, 3 MHz $\pm$ 10%
- Potenza 0.5 W – 10 W $\pm$ 20% con duty cycle $\geq$ 80% su 5 cm2 / 0.5 W – 15 W $\pm$ 20% con duty cycle $\leq$ 70% su 5 cm2
- Potenza effettiva 3 W/cm2 $\pm$ 20% (1 MHz) / 3 W/cm2 $\pm$ 20% (3 MHz)
- Modulazione di frequenza 100 Hz
- Duty cycle 10%-100% con step 10%
- Tempo impostabile massimo 30 minuti
- Area irradiante effettiva 5 cm2 $\pm$ 20%
- Fascio ultrasonico collimato
- Testina (materiale) alluminio adatta ad immersione
- Indicatore a led corretto contatto cute/testina

Specifiche tecniche - modalità ELETTROTERAPIA

- Generatore di onda quadra bifasica compensata
- Modalità di generazione a corrente costante o tensione costante
- Forme d'onda: TENS, EMS, Kotz (Russian), Interferenziale
- Tempo di terapia 1÷60 minuti
- Frequenza 1÷250 Hz
- Intensità impostabile 0÷100 mA
- Tensione impostabile 0÷100 V
- Larghezza d'impulso 30÷400 μ s
- Indicatore a led corretto contatto cute/elettrodi

Componenti aggiuntivi

- Manipolo UT1/UT2/UE testina 5 cmq - cod. HGC312002
- Manipolo UT2 testina 1 cmq - cod. HGC312003
- Cavo UE, sdoppiatore elettroterapia - cod. HGC312004
- Cavo UE, EMS/TENS, due derivazioni, 1pz - cod. HGC312005
- Cavo UE, EMS/TENS, una derivazione, 1pz - cod. HGC312006
- Alimentatore UT1, UT2, UE - cod. HGC312007



LAMPADA INFRAROSSI



Doppio utilizzo: con base a terra, facilmente spostabile, o con aggancio per posizionarlo direttamente sul tavolo di lavoro e non intralciare a terra.



cod. HGC317000

Questa lampada a infrarossi è dotata di una lampadina che produce luce infrarossa a onde corte (650nm-900nm) fino a 275W, che permette una penetrazione maggiore rispetto ad altri metodi e consente un trattamento termico localizzato.

La lampada può essere posizionata a diverse angolazioni e con diverse opzioni di articolazione, ha molteplici applicazioni della termoterapia per il miglioramento della circolazione, il sollievo del dolore muscolare e delle articolazioni.

La luce infrarossa stimola i mitocondri delle cellule, facendo rigenerare e riparare i danni più rapidamente, aiuta nella guarigione e migliora l'aspetto delle cicatrici, aiuta a ringiovanire la pelle, migliorandone l'aspetto, eliminando alcune imperfezioni ed eliminando i batteri, stimola la crescita dei capelli nelle persone affette da alopecia androgenica, migliora la funzione articolare in persone con artrite e dolore da artrite reumatoide. La radioterapia a infrarossi è, inoltre, particolarmente indicata in contratture, osteoartrite, artrite reumatoide, mal di schiena, spasmi muscolari, dopo aver svolto qualsiasi attività sportiva o in stati di tensione muscolare che causano dolore.

Una curiosità: negli anni '90, le lampade a infrarossi iniziarono a essere usate per aiutare gli astronauti, hanno rilevato che li aiutava migliorando processi come l'atrofia muscolare, la scarsa guarigione delle ferite e la perdita di massa ossea.

Specifiche tecniche

- Lampada 250 W - Ø 21 cm
- Base su carrello
- Lunghezza del braccio 90 cm (snodo a 45 cm)
- Classe II



LASER A SCANSIONE



MODELLO SL1367 cod. HGC307000

Lavora ad una potenza effettiva di 8W grazie all'utilizzo di un singolo diodo e ad una lunghezza d'onda di 940 nm.

- Effetto biostimolante e rigenerativo
 - Effetto analgesico
 - Effetto antinfiammatorio e antiedema
 - Effetto sul microcircolo
1. Motore passo passo: genera delle micro-oscillazioni permettendo di aumentare l'area di trattamento impostata fino al 5%.
 2. Impostazione automatica della superficie da trattare
 3. Area di scansione regolabile fino a 400 cm²
 4. Compatibile con un manipolo laser esterno

Specifiche tecniche

- Tipologia di scansione 1 diodo da 8 W
- Frequenza da 200 a 10.000 Hz
- Lunghezza d'onda 980 nm
- Display Grafico B/N 320x240 px
- Protocolli memorizzati e 200 memorizzabili su memoria interna

Componenti di serie

- Occhiale di protezione modello YG3
- Interlock

Componenti aggiuntivi per entrambi i modelli

- Manipolo laser 905 nm - 1 diodo 100 mW - cod. HGC307002
- Manipolo laser 905 nm - 3 diodi 100 mW - cod. HGC307003
- Manipolo laser 905 nm - 5 diodi 100 mW - cod. HGC307004
- Occhiale di protezione laser modello OLV - cod. HGC300011

MODELLO SL1366 cod. HGC307001

Il laser a scansione è una tecnologia operatore-indipendente che consente di trattare aree più vaste rispetto ai laser a contatto. Lavora con due sorgenti diodiiche da 2W con due diverse lunghezze d'onda:

808 nm + 940 nm.

La doppia lunghezza d'onda permette un elevato effetto antinfiammatorio e analgesico, ideale per il trattamento di patologie in forma acuta e/o con presenza di infiammazioni.

Specifiche tecniche

- Tipologia di scansione 2 diodi 2 W
- Frequenza da 200 a 10.000 Hz
- Lunghezza d'onda 808 nm + 940 nm, emissione in contemporanea
- Display Grafico B/N 320x240 px
- Protocolli memorizzati e 200 memorizzabili su memoria interna

Componenti di serie

- Occhiale di protezione modello YG3
- Interlock

- Occhiale di protezione laser modello YG3 - cod. HGC305001
- Porta-manipolo - cod. HGC307007
- Smart Card - cod. HGC305004

LASER A BASSA POTENZA



cod. HGC308000

È ideale per la stimolazione dei punti trigger o il trattamento delle aree locodolenti:

1. Effetto antinfiammatorio
2. Effetto sul sistema nervoso periferico (effetto antalgico e rigenerativo)
3. Effetto biostimolante e di rigenerazione tissutale
4. Effetto sul microcircolo e vasi sanguigni
5. Effetto immunomodulante
6. Effetto di fotoattivazione enzimatica

Specifiche tecniche

- Lunghezza d'onda 905 nm
- Display Grafico a colori 320x240 px Touch&Scroll
- Uscite 2 indipendenti
- Frequenza da 200 a 10.000 Hz
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200

Componenti di serie

- Manipolo laser (100 mW)
- Occhiale di protezione laser modello OLV
- Interlock
- Portamanipolo

Componenti aggiuntivi

- Manipolo laser 905 nm - 1 diodo 100 mW - cod. HGC307002
- Manipolo laser 905 nm - 3 diodi 100 mW (300 mW totali) - cod. HGC307003
- Manipolo laser 905 nm - 5 diodi 100 mW (500 mW totali) - cod. HGC307004
- Occhiale di protezione laser modello OLV- cod. HGC300011
- Porta-manipolo MLA1-MLA3 - cod. HGC307007
- Braccio ortostatico - cod. HGC308006
- Interlock - cod. HGC308007
- Smart Card - cod. HGC305004

LASER AD ALTA POTENZA



cod. HGC304000

Estrema efficacia e precisione di emissione: due laser ad alta potenza di grande eccellenza, prodotti interamente in Italia che permettono di superare velocemente la fase acuta del dolore garantendo risultati duraturi.

Risultati dalla prima seduta!

La laserterapia eroga in profondità un'elevata quantità di energia tale da riattivare il metabolismo cellulare, promuove il processo di riparazione dei tessuti e agisce simultaneamente su:

PROFONDO ED EFFICACE

1. Dolore acuto
2. Infiammazione
3. Edema

MODELLO HL1361

Specifiche tecniche

- Lunghezza d'onda 980 nm
- Potenza erogata 8 W
- Display Touch screen a colori 6"
- Protocolli memorizzati e 200 memorizzabili su memoria interna

Componenti di serie

- CRYSTAL YAG
- Manipolo laser in fibra ottica (solidale con l'apparecchiatura)
- 2 Occhiali di protezione laser modello YG3
- Pedale con protezione richiudibile 9005
- Interlock

Componenti aggiuntivi

- Occhiale di protezione laser modello YG3 - cod. HGC305001
- Occhiale di protezione laser modello OLV - cod. HGC300011
- Pedale HPLS con protezione richiudibile RAL9005 - cod. HGC305003
- Smart Card - cod. HGC305004



MODELLO HL2063
cod. HGC304001

Specifiche tecniche

- Lunghezza d'onda 1064 nm
- Potenza erogata 18 W
- Display Touch screen a colori 10.1"
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200
- Protocolli memorizzabili su USB

Componenti di serie

- CRYSTAL YAG
- Manipolo laser in fibra ottica (solidale con l'apparecchiatura)
- 2 Occhiali di protezione laser modello YG3
- Pedale con protezione richiudibile 9005
- Interlock

MODELLO HL2065
cod. HGC304002

Specifiche tecniche

- Lunghezza d'onda 1064 nm
- Potenza erogata 9 W
- Display Touch screen a colori 10.1"
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200
- Protocolli memorizzabili su USB

Componenti di serie

- CRYSTAL YAG
- Manipolo laser in fibra ottica (solidale con l'apparecchiatura)
- 2 Occhiali di protezione laser modello YG3
- Pedale con protezione richiudibile 9005
- Interlock

MODELLO HL2062
cod. HGC304003

Specifiche tecniche

- Lunghezza d'onda 808 nm + 980 nm
- Potenza erogata 14 W
- Display Touch screen a colori 10.1"
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200
- Protocolli memorizzabili su USB

Componenti di serie

- CRYSTAL YAG
- Manipolo laser in fibra ottica (solidale con l'apparecchiatura)
- 2 Occhiali di protezione laser modello YG3
- Pedale con protezione richiudibile 9005
- Interlock

MODELLO HL2064
cod. HGC304004

Specifiche tecniche

- Lunghezza d'onda 808 nm + 980 nm
- Potenza erogata 9 W
- Display Touch screen a colori 10.1"
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200
- Protocolli memorizzabili su USB

Componenti di serie

- CRYSTAL YAG
- Manipolo laser in fibra ottica (solidale con l'apparecchiatura)
- 2 Occhiali di protezione laser modello YG3
- Pedale con protezione richiudibile 9005
- Interlock

Componenti aggiuntivi per tutti i modelli

- Occhiale di protezione laser modello YG3 - cod. HGC305001
- Occhiale di protezione laser modello OLV - cod. HGC300011
- Pedale HPLS con protezione richiudibile RAL9005 - cod. HGC305003
- Smart Card - cod. HGC305004

LASERTERAPIA



cod. HGC309000

Dispositivo laser dotato di innovativo puntale per applicazione del fascio laser direttamente sulla zona di trattamento. La possibilità di programmare la potenza fino a 500 mW e il tempo di terapia fino a 30 minuti permette di soddisfare al meglio le esigenze più svariate dell'operatore professionale. Permette di intervenire con rapidità nel trattamento di patologie infiammatorie e degenerative in ambito ortopedico, neurologico, dermatologico riducendo significativamente i tempi di guarigione.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 300 x 150 x 120 mm
- Alimentazione 230 Vac, 50-60 Hz, $\pm 10\%$
- Potenza massima 500 mW $\pm 20\%$
- Percentuale di potenza emessa selezionabile 0%-100%
- Lunghezza d'onda emissione Diodo Laser 810 nm
- Divergenza del fascio 260 mrad
- Emissione continua
- Frequenza di emissione fissa
- Durata impulso fissa
- Modalità operativa continua o intermittente
- Luce led rossa di puntamento
- Manipolo con diodo (defocalizzato e con connessione dedicata)
- Tempo di trattamento programmabile 0-30 minuti
- Diametro dello spot incidente sulla pelle del paziente trattato < 10mm

Componenti di serie

- Apparecchio LA 500
- Manipolo con diodo
- Cinghie di fissaggio manipolo
- Occhiali protettivi

Componenti aggiuntivi

- Applicatore laser LA 500 - cod. HGC309001
- Carrello 3 ripiani, 4 ruote, 35x47x80 cm - cod. HGC309004



MAGNETOTERAPIA



cod. HGC310000



cod. HGC310001

Le apparecchiature per magnetoterapia generano un campo magnetico a bassa frequenza che migliora la rigenerazione dei tessuti, in particolar modo quelli ossei. Le principali indicazioni sono:

1. Fratture recenti e ritardi di consolidazione
2. Pseudoartrosi
3. Morbo di Sudeck e osteoporosi
4. Artropatie di natura infiammatoria e degenerativa
5. Arteriopatie obliteranti
6. Piaghe da decubito
7. Psoriasi

MODELLO 8400

Specifiche tecniche

- Display Grafico a colori 320x240 px Touch&Scroll
- Uscite 4
- Frequenza 1 - 100 Hz
- Potenza fino a 100 Gauss per canale
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200

Componenti di serie

Anello di metallo per controllo funzionalità

Componenti aggiuntivi per entrambi i modelli

- Cilindro W.I.S. 60 cm di diametro con carrello di scorrimento compatibile con tutti i lettini EME (φ 60x30 cm) - cod. HGC310002
- Cilindro W.I.S. Portatile diametro 60 cm con piedini (φ 60 cm - larghezza 30 cm) - cod. HGC310003
- Cilindro W.I.S. Portatile diametro 30 cm con piedini - cod. HGC310004
- Lettino scorrimento MANUALE in lega leggera di alluminio con carrello e solenoide W.I.S. (196x65xH 70 cm) - cod. HGC310005
- Lettino scorrimento ELETTRICO con telecomando, in lega leggera di alluminio con carrello e solenoide W.I.S. (196x65xH70 cm) - cod. HGC310006
- Lettino TOTAL BODY in lega leggera di alluminio con 2 carrelli e 2 solenoidi W.I.S. per trattamento total body (196x65xH70 cm) - cod. HGC310007
- Coppia di applicatori magneto (16x10x3,5 cm) - cod. HGC310008
- Cavo Magnetomed generatore-solenoidi - cod. HGC310009
- Smart Card - cod. HGC305004

MODELLO 7200

Specifiche tecniche

- Display Grafico a colori 320x240 px Touch&Scroll
- Uscite 2
- Frequenza 1 - 100 Hz
- Potenza fino a 100 Gauss per canale
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200

Componenti di serie

Anello di metallo per controllo funzionalità

ULTRASUONI



cod. HGC311000

cod. HGC311001

L'applicazione degli ultrasuoni si traduce in un'azione di massaggio cellulare ed intercellulare ad alta frequenza. I tessuti irradiati con ultrasuoni entrano a loro volta in vibrazione, con conseguente dispendio energetico e produzione di calore. Si verifica inoltre il fenomeno della cavitazione che attiva i processi di ossidazione e polimerizzazione.

Gli ultrasuoni sono usati principalmente per la riduzione del dolore.

Entrambi i modelli possono essere collegati ai dispositivi di elettroterapia Therapic 9200 e 9400 per trattamenti combinati.

1. Sensore di contatto automatico: i manipoli sono dotati di sensore che assicura il corretto contatto per un trattamento ottimale.
2. Manipoli impermeabili: per trattamenti subacquei.

MODELLO US1322

- Display Grafico a colori 320x240 px Touch&Scroll
- Uscite 2 indipendenti
- Frequenza 1/3 Mhz
- Potenza in MODELLO pulsata da 01. a 3 W per cm²
- Potenza in MODELLO continua da 01. a 2 W per cm²
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200

Componenti di serie

- 2 manipoli 1/3 Mhz area emittente di 5 cm² con sensore di contatto
- 2 portamanipolo

Componenti aggiuntivi per entrambi i modelli

- TV5 – Manipolo ultrasuoni 1/3 Mhz, area emittente 5 cm² - cod. HGC306002
- TV8 – Manipolo ultrasuoni 1/3 Mhz, area emittente 8 cm² - cod. HGC306003
- BO-U – Braccio Ortostatico per tutti i TV 1-3-5-8 - cod. HGC311004
- Cavo link per collegamento US-ET - cod. HGC311005
- Gel conduttivo 260 ml - cod. HGC306017
- Gel conduttivo 1000ml - cod. HGC306018
- Smart Card - cod. HGC305004

MODELLO US1321

- Display Grafico a colori 320x240 px Touch&Scroll
- Uscite 1
- Frequenza 1/3 Mhz
- Potenza in MODELLO pulsata da 01. a 3 W per cm²
- Potenza in MODELLO continua da 01. a 2 W per cm²
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200

Componenti di serie

- 2 manipoli 1/3 Mhz area emittente di 5 cm² con sensore di contatto
- 2 portamanipolo

ULTRASUONI

doppio manipolo



Componenti in dotazione

- 2 manipoli: 1 cm² e 5 cm²
- Alimentatore medicale
- Gel per ultrasuonoterapia

cod. HGC312001

Dispositivo professionale ad alta tecnologia con doppio manipolo (5 cm²-1 cm²) e possibilità di scelta della frequenza di lavoro (1 MHz-3 MHz). I due manipoli consentono all'operatore professionale di eseguire trattamenti su zone di diverse dimensioni offrendo in questo modo uno strumento perfettamente adattabile alle esigenze terapeutiche del paziente.

Specifiche tecniche

- Alimentazione 100V-240V, 47Hz-63Hz, 1.35A con alimentatore 15V 3A Max.
- Frequenza ultrasuono 1 MHz $\pm$ 10%, 3 MHz $\pm$ 10%
- Potenza 0.5 W – 10 W $\pm$ 20% con duty cycle $\geq$ 80% su 5 cm² // 0.5 W – 15 W $\pm$ 20% con duty cycle $\leq$ 70% su 5 cm² // 0.1 W – 2 W $\pm$ 20% con duty cycle $\geq$ 80% su 1 cm² // 0.1 W – 3 W $\pm$ 20% con duty cycle $\leq$ 70% su 1 cm²
- Potenza effettiva 3 W/cm² $\pm$ 20% (1 MHz) 3 W/cm² $\pm$ 20% (3 MHz)
- Modulazione di frequenza 100 Hz
- Duty cycle 10%-100% con step 10%
- Tempo impostabile massimo 30 minuti
- Area irradiante effettiva 5 cm² $\pm$ 20%; 1 cm² $\pm$ 20%
- Fascio ultrasonico collimato
- Testina (materiale) alluminio
- Adatto per uso esterno e per immersione
- Indicatore a led corretto contatto cute/testina
- 10 programmi preimpostati in cui l'operatore professionale può variare autonomamente

Componenti aggiuntivi

- Manipolo UT1/UT2/UE testina 5 cmq - cod. HGC312002
- Manipolo UT2 testina 1 cmq - cod. HGC312003
- Cavo UE, sdoppiatore elettroterapia - cod. HGC312004
- Cavo UE, EMS/TENS, due derivazioni, 1pz - cod. HGC312005
- Cavo UE, EMS/TENS, una derivazione, 1pz - cod. HGC312006
- Alimentatore UT1, UT2, UE - cod. HGC312007



ELETTROTERAPIA



cod. HGC313000



cod. HGC313001

L'elettroterapia è utilizzata per i seguenti principali scopi:

1. Allenamento del sistema neuromuscolare
2. Modulazione del dolore
3. Controllo o riduzione della spasticità
4. Rilascio transdermico di sostanze medicamentose
5. Miglioramento o mantenimento della mobilità articolare
6. Acceleramento della guarigione delle ferite
7. Risoluzione dell'edema

MODELLO TH1312

Specifiche tecniche

- Display grafico a colori 320x240 px Touch& Scroll
- Uscite 2
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200
- Funzionamento in modalità CC e VC
- Correnti erogate Bassa/Media Frequenza, curva I/T

Componenti di serie

- Cavo uscita ET 2 canali 1
- Elettrodi 60x85 mm 4
- Spugne per elettrodi 60x85 mm 4
- Elettrodi 50x50 mm 4
- Spugne per elettrodi 50x50 mm 4
- Fasce elastiche 1000 mm 2
- Fasce elastiche 600 mm 2

Componenti aggiuntivi per entrambi i modelli

- Cavo uscita 2 canali (CH 1-2) - cod. HGC300014
- Cavo uscita 2 canali (CH 3-4) (solo per TH1313) - cod. HGC313003
- Cavo uscita 4 canali (CH 1-2 / CH 3-4) - cod. HGC313004
- Elettrodo multiuso in gomma conduttiva mm 50x50 (2 mm) - cod. HGC300015// Elettrodo mm 60x85 - cod. HGC300016
- Spugna per elettrodo mm 50x50 - cod. HGC300017

MODELLO TH1313

Specifiche tecniche

- Display grafico a colori 320x240 px Touch& Scroll
- Uscite 4
- Protocolli memorizzati
- Protocolli memorizzabili su memoria interna 200
- Funzionamento in modalità CC e VC
- Correnti erogate Bassa/Media Frequenza, curva I/T

Componenti in dotazione

- Cavo uscita ET 2 canali 2
- Elettrodi 60x85 mm 8
- Spugne per elettrodi 60x85 mm 8
- Elettrodi 50x50 mm 8
- Spugne per elettrodi 50x50 mm 8
- Fasce elastiche 1000 mm 4
- Fasce elastiche 600 mm 4
- Spugna per elettrodo mm 60x85 - cod. HGC300018
- Fascia elastica lunga (1000x50 mm) - cod. HGC300019
- Fascia elastica corta (600x50 mm) - cod. HGC300020
- Cavo link per collegamento Ultrasuono - Elettroterapia - cod. HGC311005
- Smart Card - cod. HGC305004



Componenti in dotazione

- Guida in linea utente con istruzioni rapide di utilizzo fornite direttamente sul display
- Apparecchio con display grafico a 4 canali indipendenti
- Cavi di connessione elettrodi
- Elettrodi pregellati auto-adesivi
- Kit ionoforesi
- Penna cerca punti motori
- Batteria interna ricaricabile e alimentatore dedicato
- Manuale d'uso e manuale delle posizioni
- Borsa per il trasporto

cod. HGC314000

I-Tech Physio 4 è l'apparecchio professionale per elettroterapia dotato di 4 canali che consentono di effettuare contemporaneamente 2 trattamenti.

Specifiche tecniche

- Elettroterapia a 4 canali indipendenti con possibilità di collegare fino a 8 elettrodi
- Generatore di corrente costante
- Onda monofasica
- Intensità massima: 240 mApp, con regolazione a step di 0,5 mA
- Programmi preimpostati: WAVE, REHAB, EMS
- Memorie libere (Denervato, TENS, EMS, FES, Agonista/Antagonista)
- Display grafico per la visualizzazione di tutti i parametri di terapia
- Funzionamento a batteria ricaricabile o collegato direttamente a rete elettrica
- Selezione del trattamento per un singolo paziente o per due pazienti con programmi indipendenti
- Onda quadra bifasica compensata
- Onda diadinamica, interferenziale, alto voltaggio, kotz, neofaradica, osteogenesi
- Programma di stimolazione controllata
- Trattamento muscolo denervato con programmi preimpostati o con memorie libere impostabili dall'utente
- Feed-back utente: l'apparecchio riconosce se l'utente è collegato
- Dimensioni 180 x 110 x 50 mm

Componenti aggiuntivi

- Cavo EMS Ch1+Ch2, I-Tech Physio 4-EMG - cod. HGC314001
- Cavo EMS Ch3+Ch4, I-Tech Physio 4-EMG - cod. HGC314002
- Cavo ione blu Ch1, I-Tech Physio 4-EMG - cod. HGC314003
- Cavo ione red Ch3, I-Tech Physio 4-EMG - cod. HGC314004
- Cavo EMS CH1 blu, I-Tech Physio 4-EMG - cod. HGC314005
- Cavo EMS CH3 rosso, I-Tech Physio 4-EMG - cod. HGC314006
- Elettrodo bipolare EMG, 6pz - cod. HGC314007
- Cavo EMG, I-Tech Physio EMG - cod. HGC314008
- Alimentatore I-Tech Physio 4-EMG - cod. HGC314009

PRESSOTERAPIA



cod. HGC315000



cod. HGC315001

Le principali indicazioni terapeutiche dell'apparecchiatura per pressomassaggio peristaltico e drenaggio veno-linfatico sono: insufficienza circolatoria, stasi linfatica, idro-lipo-distrofia, linfedema, edema, recupero post-operatorio e ipotonia.

I gambali sono dotati di settori indipendenti, sovrapposti a spina di pesce, tramite i quali la spinta pressoria si sovrappone gradualmente senza lasciare interspazi durante il gonfiaggio. Lo sgonfiaggio di tutti i settori avviene in modo veloce e silenzioso. La possibilità di pre-gonfiaggio generale di tutti i settori a circa 30 mhg (+/-) rende il trattamento più veloce. Nella versione a 12 settori permette di trattare contemporaneamente arti inferiori e superiori.

MODELLO 9 SETTORI

- Display Grafico a colori 320x240 px Touch & Scroll
- Regolazione della pressione indipendente
- Tester di funzionamento della pressione per singolo settore
- Protocolli memorizzabili 21

Componenti aggiuntivi

- GC9 Kit point a 9 settori per il trattamento degli arti inferiori. Il Kit è costituito da: 2 gambali a 6 settori, 1 settore inguinale, 1 ventriera a 2 settori, chiusura tramite velcro - cod. HGC315002
- GC9/S Kit point a 9 settori per il trattamento degli arti inferiori con piede separato. Il Kit è costituito da: 2 piedi, 2 gambali a 4 settori, 1 settore inguinale, 1 ventriera a 2 settori, chiusura tramite velcro. Con settore piede separato - cod. HGC315003
- BC7/PRO Kit point arto superiore (composto da 1 bracciale di tipo professionale) a 7 settori - cod. HGC315004
- BC5 x 2 Kit point arti superiori (composto da 2 bracciali) a 5 settori - cod. HGC315005
- BC7 x 2 Kit point arti superiori a 7 settori (nr. 2 manicotti) - cod. HGC315006
- Smart Card - cod. HGC305004

MODELLO 12 SETTORI

- Display Touch Screen a colori 8"
- Regolazione della pressione indipendente
- Tester di funzionamento della pressione per singolo settore
- Protocolli memorizzabili 45

Componenti aggiuntivi

- BC7 x 2 Kit point arti superiori a 7 settori (nr. 2 manicotti) - cod. HGC315006
- GC12 Kit point arti inferiori, 12 settori indipendenti - cod. HGC315007
- Kit point arti inferiori e superiori per trattamenti TOTAL BODY - cod. HGC315008
- Smart Card - cod. HGC305004

PRESSOTERAPIA



cod. HGC316000

Terapia a compressione sequenziale – 4 uscite

Compressore a 4 uscite con regolazione elettronica.

Sistema di pressoterapia sequenziale, realizzato appositamente per il drenaggio linfatico ma anche per edemi, gambe e braccia gonfie e/o stanche, ritenzione idrica, cellulite, massaggi, etc. Le sezioni che compongono i bracciali, gambali e fascia addominale si gonfiano e si sgonfiano sequenzialmente grazie ai 2 programmi (A e B), eliminando e riducendo la possibilità di liquido stagnante.

È possibile deselezionare le sezioni agendo direttamente sul display. La compressione inizia dalla sezione distale e si muove fino alla sezione prossimale, aiutando l'incremento di drenaggio del fluido. La pressione del sistema può essere regolata tramite il display touch screen.

IL KIT SI COMPONE ORDINANDO SEPARATAMENTE LA POMPA (cod. HGC316000) E GLI ACCESSORI SOTTO RIPORTATI

Accessori per pressoterapia da definire in fase d'ordine

- Bracciale 4 sezioni, completo di tubi, taglia S/M - cod. HGC316001
- Bracciale 4 sezioni, completo di tubi, taglia L/XL - cod. HGC316002
- Gambale 4 sezioni, completo di tubi, taglia S/M - cod. HGC316003
- Gambale 4 sezioni, completo di tubi, taglia L/XL - cod. HGC316004
- Gambale 4 sezioni, completo di tubi, taglia XXL - cod. HGC316005
- Gambale 4 sezioni, completo di tubi, taglia XXXL - cod. HGC316006
- Fascia addominale 4 sezioni, completo di tubi, taglia S/M - cod. HGC316007
- Fascia addominale 4 sezioni, completo di tubi, taglia L/XL - cod. HGC316008

Componenti aggiuntivi

- Tubo a 4 vie doppio per gambali o bracciali - cod. HGC316009
- Estensione per gambale 10 cm (LTM566-L, LTM566-3XL) - cod. HGC316010

ACCESSORI



cod. HGC318000

CARRELLI POLIFUNZIONALI


Carrello polifunzionale componibile composto da ripiano con colonna e maniglia

Specifiche tecniche

- Materiale base, ripiano, e maniglia in acciaio verniciati a polveri
- Materiale colonna alluminio verniciata bianca (RAL9010)
- Ruote Antistatiche Ø 7,5 cm – Posteriori con freno
- Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza, così come gli optional
- Colonna bianca (RAL9010) – H:80 cm
- Base laser 45×50 cm - Ripiano 35×40 cm
- Peso del prodotto: 14 kg

Componenti di serie

- kit di 8 strisce h 70,5 cm (2 per colore: blu, rosso, giallo e verde)

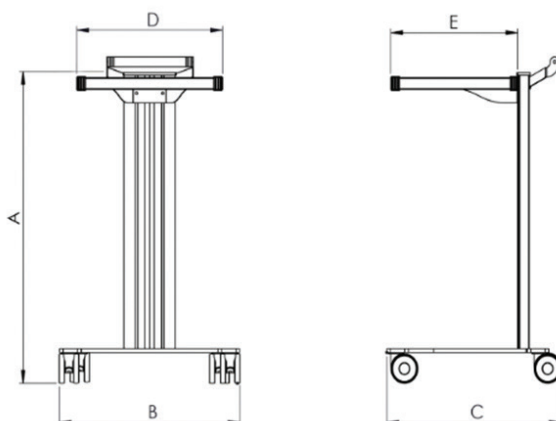

A	80 cm
B	50 cm
C	50 cm
D	40 cm
E	35 cm
Portata	20 kg



cod. HGC318001


Carrello polifunzionale componibile composto da 2 ripiani, 2 colonne, 2 maniglie

Specifiche tecniche

- Materiale base, ripiano, e maniglia in acciaio verniciati a polveri
- Materiale colonna alluminio verniciata bianca (RAL9010)
- Ruote Antistatiche Ø 7,5 cm
- Posteriori con freno
- Maniglia e ripiano posizionabili ad ogni altezza, così come gli optional
- Colonne bianche (RAL9010) - H:80 cm
- Base laser 45×53 cm, ripiano 35×40 cm
- Peso del prodotto: 25 kg

Componenti di serie

- 1 kit di 8 strisce h 70,5 cm (2 per colore: blu, rosso, giallo e verde)

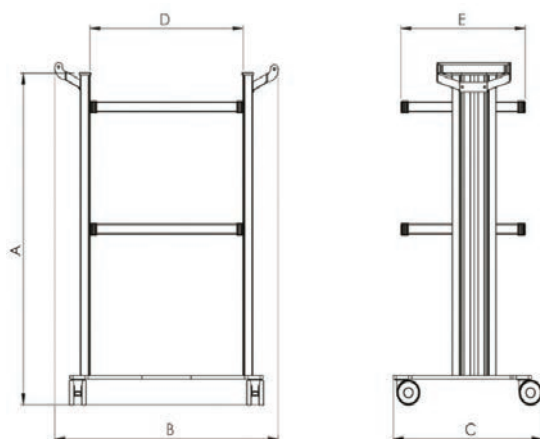

A	80 cm
B	63 cm
C	50 cm
D	40 cm
E	35 cm
Portata	30 kg

ACCESSORI



cod. HGC306020



cod. HGC306021



cod. HGC306022



cod. HGC306023



cod. HGC28137050

DIACREAM

1000 ml

Crema conduttrice per Trattamenti Fisioterapici con apparecchiature Elettromedicali per Diatermia, Radiofrequenza e Biostimolazioni in genere.

Alte prestazioni sia in fase Resistiva che Capacitiva. Facile da spalmare è realizzata con prodotti selezionati che vantano esclusive peculiarità impiegate anche in cosmetica.

Le particolari sostanze che compongono il prodotto garantiscono una buona resistenza al calore durante il trattamento, senza effetti di liquefazione o filamenti, favoriscono lo scorrimento dell'elettrodo a manipolo e rallentano il processo di asciugatura riducendo il consumo e i tempi necessari per il ripristino di ulteriore crema, contribuendo ad agevolare il lavoro del terapeuta.

DIACREAM rilascia una benefica azione emolliente e idratante sulla cute del paziente, tanto che a fine trattamento non si rende necessaria la rimozione della crema eccedente. DIACREAM presenta le caratteristiche di una crema cosmetica, viene completamente assorbita, non macchia, è completamente idrosolubile, non contiene formaldeide. NO PARABENI NO FORMALDEIDE

T-CREAM- RF PER VACUUMTERAPIA

500 ml

Crema conduttrice formulata per i trattamenti di radiofrequenza abbinati all'effetto ventosa (vacuum). Adatto sia sul viso che sul corpo.

Compatibile per trattamenti con macchinario T-Shape e simili.

Crema formulata appositamente per essere applicata sulla pelle prima del trattamento con tutte le tecnologie che abbinano la radiofrequenza al vacuum. Migliora lo scorrimento dei manipoli. Applicare direttamente sulla pelle la quantità giusta in proporzione dell'area da trattare. Si può utilizzare sul viso e sul corpo.

Non contiene Paraffina

FISIOECOGEL TRASPARENTE

1 kg

Gel conduttivo trasparente per ultrasuoni, luce pulsata e ecografie.

MASSAGECREAM

1000 ml

Crema formulata appositamente per massaggi.

LENZUOLO MEDICO IN ROTOLO

Confezione da 6 rotoli cm 50x48mt in diverse larghezze e lunghezze.



Sezione FISIOTERAPIA



La ricerca di tecnologie costruttive avanzate e dei materiali più corretti garantisce che le attrezzature e gli ausili proposti rappresentino sempre la risposta più corretta alle aspettative dei professionisti della riabilitazione. Altrettanto importante è porre grande attenzione anche all'aspetto estetico che si associa ad una perfetta funzionalità, perchè con "riabilitazione" si intendono sia misure preventive, sia misure per alleviare o eliminare limitazioni nelle capacità e possibilità di muoversi autonomamente. L'obiettivo è l'integrazione medica, professionale e sociale di persone con disabilità mediante il ripristino di importanti funzioni corporee: un servizio di progettazione di alta professionalità è a disposizione dei clienti per ambientare nel modo più appropriato ogni ambiente.

PARALLELE CHIUDIBILI

per deambulazione



Struttura in acciaio verniciato con corrimano a forma anatomica disponibile in legno o in acciaio verniciato, regolabile in altezza tramite sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona.

MODELLO IN LEGNO cod. HGC330000

Specifiche tecniche


- Lunghezza della base 300 cm
- Regolazione altezza corrimano 75-105 cm
- Larghezza corrimano 60 cm
- Larghezza della base 70 cm
- Portata del singolo corrimano 135 Kg

MODELLO IN ACCIAIO cod. HGC330001

Specifiche tecniche

- Lunghezza della base 300 cm
- Regolazione altezza corrimano 77-107 cm
- Larghezza corrimano 60 cm
- Larghezza della base 70 cm
- Portata del singolo corrimano 135 Kg

PARALLELE AD ANGOLO

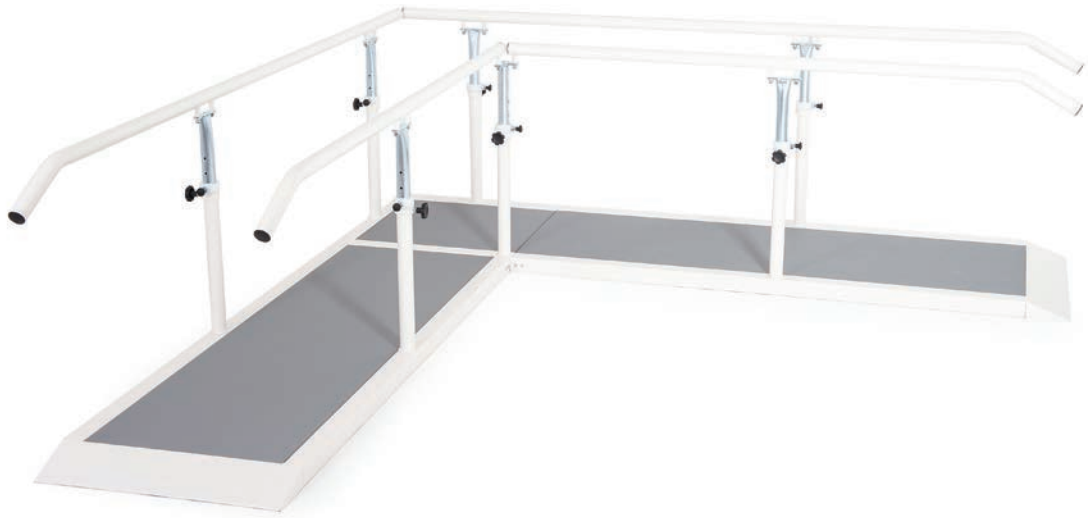

cod. HGC330007

Struttura in acciaio verniciato completa di piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo e di comode rampe di accesso. Corrimano, a forma anatomica in metallo verniciato, regolabili sia in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona.

Specifiche tecniche

- Regolazione altezza corrimano in acciaio 71.5-101.5 cm
- Larghezza piano camminamento 59 cm
- Larghezza della base 70 cm
- Lunghezza dei 2 piani di camminamento 200-270 cm
- Portata del singolo corrimano 135 Kg



*Volantini a regolazione
semplice e veloce*

PARALLELE LINEARI

per deambulazione, diverse misure



MODELLO 2 MT - cod. HGC330004



MODELLO 3 MT ACCIAIO - cod. HGC330003



MODELLO 3 MT LEGNO - cod. HGC330002

Struttura in acciaio verniciato completa di piano di camminamento in legno rivestito in materiale antiscivolo e di comode rampe di accesso. Corrimano, a forma anatomica in legno o in metallo verniciato, regolabili sia in larghezza che in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona.



MODELLO 4 MT ACCIAIO - cod. HGC330005

Specifiche tecniche

- Regolazione altezza corrimano in acciaio 71.5-101.5 cm
- Regolazione altezza corrimano in legno 73-103 cm
- Regolazione larghezza corrimano 40-80 cm
- Larghezza piano camminamento 59 cm
- Larghezza della base 70 cm
- Portata del singolo corrimano 135 Kg



MODELLO 6 MT ACCIAIO - cod. HGC330006

ACCESSORI



Stabilizzatore per parallele con base, utilizzabile singolarmente o doppio su tutti i modelli di parallele - cod. HGC330008



Set ostacoli/divaricatore con magnete per parallele con base cod. HGC330009



Piano concavo/convesso per parallele con base - cod. HGC330010
(non applicabile su parallele chiudibili cod. HGC330000 e HGC330001)



Telaio con divisori per parallele con base - cod. HGC330011
(non applicabile su parallele chiudibili cod. HGC330000 e HGC330001)



Sacchetto di calpestio:
 • riempito di sabbia - cod. HGC330012
 • riempito di granuli in PVC - cod. HGC330013



Rulli e bastoncini in legno lunghezza 20 cm:
 • Ø 3 cm - cod. HGC330014
 • Ø 1 cm - cod. HGC330015

SCALE



cod. HGC331001 - rampa 4 gradini
cod. HGC331002 - rampa 3 gradini



cod. HGC331003 - 2 rampe

Struttura in acciaio verniciato, parti scorrevoli zinco-cromato.

Corrimano, a forma anatomica in acciaio verniciato, regolabili in altezza con un sistema telescopico. I volantini impediscono allentamenti e possibili assestamenti dei corrimano durante il carico della persona. Gradini chiusi, rivestiti in PVC con antiscivolo, altezze diverse. Disponibile a 1 o 2 rampe.

Specifiche tecniche

- Portata singolo corrimano 135 kg
- Regolazione altezza corrimano 60-100 cm
- Gradino: larghezza cm 56 x profondità 30
- Altezza gradino: rampa a 4 gradini 13 cm, rampa a 3 gradini 16 cm

Componenti aggiuntivi

- Piano inclinato per rampa
Dimensioni 170 x 49 cm - cod. HGC331004





Scala a due rampe, posizionabile ad angolo o dritta



SPALLIERE



Spalliera svedese a 1 campata in legno verniciato al naturale, con pioli a sezione ovoidale, viene fornita completa di attacchi per fissaggio a parete.

La spalliera è utile nell'esecuzione di diversi esercizi, in particolare per esercizi preventivi e terapeutici contro dolori alla schiena.

MODELLO A UNA CAMPATA

cod. HGC333001 - fornita montata

Specifiche tecniche

- Portata 125 kg
- Altezza 240 cm

MODELLO A DUE CAMPATE

cod. HGC333002 - fornita montata

Specifiche tecniche

- Portata 125 kg
- Altezza 240 cm

Componenti aggiuntivi

- Parte sporgente applicabile a spalliera.
Dim. 87x64x40 cm - cod. HGC333007
- Poggiaschiena curvo.
Dim. 65x40x18 cm. Colore nero. - cod. HGC333005
- Panca agganciabile a spalliera.
Dim. 180x30 cm. Colore nero. - cod. HGC333006





Fornite smontate



MODELLO A UNA CAMPATA
cod. HGC333003 - fornita smontata

Specifiche tecniche

- Portata 125 kg
- Altezza 240 cm

MODELLO A DUE CAMPATE
cod. HGC333004 - fornita smontata

Specifiche tecniche

- Portata 125 kg
- Altezza 240 cm



SPECCHI



cod. HGC334000

MODELLO DA PARETE

Specchio quadrettato di cristallo temperato con reticolo cm 10×10. Montato su pannello di legno con cornice perimetrale di legno massiccio verniciato al naturale, è completo di attacchi a muro.

Specifiche tecniche

- Dimensioni cm 100×200



cod. HGC334001


MODELLO A CARRELLO

Specchio quadrettato di cristallo temperato con reticolo cm 10×10. Montato su pannello di legno con cornice perimetrale di legno massiccio verniciato al naturale. Mobile su carrello di acciaio verniciato con ruote piroettanti, inclinazione regolabile.

Specifiche tecniche

- Dimensioni cm 100×200



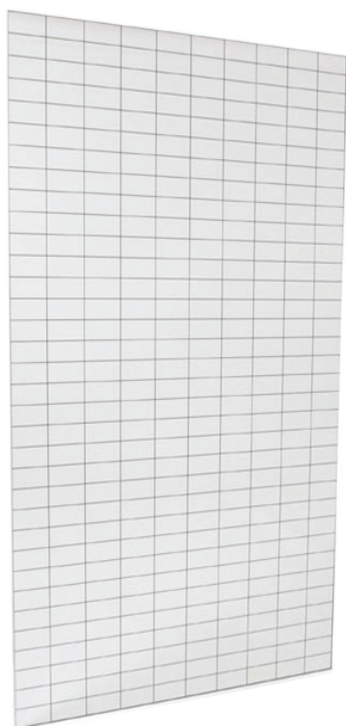

MODELLO QUADRETTATO

Specchio quadrettato di cristallo temperato con reticolo cm 10×5h. Montato su pannello con cornice perimetrale in alluminio. Disponibile in 2 misure.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 100×200 cm - cod. HGC334002
- Dimensioni 100X170 cm - cod. HGC334004



MODELLO LISCIO

Specchio liscio di cristallo temperato. Montato su pannello con cornice perimetrale in alluminio. Disponibile in 2 misure.

Specifiche tecniche

- Dimensioni 100×200 cm - cod. HGC334003
- Dimensioni 100X170 cm - cod. HGC334005



Componenti aggiuntivi per specchi con cornice in alluminio

- Carrello per specchio dim. 200 cm trasportabile ed inclinabile - cod. HGC334006
- Carrello per specchio dim. 170 cm trasportabile ed inclinabile - cod. HGC334007

ARREDO PER OUTDOOR

esercizio fisico all'aperto a qualsiasi età

L'invecchiamento è un processo fisiologico che colpisce tutti i sistemi del nostro corpo ed è importante che tutti, ma in particolare gli anziani, pratichino attività fisica per mantenere il proprio benessere.

Il Senior Park è un'offerta riabilitativa per mantenere una vita sana facendo esercizio all'aria aperta durante le uscite quotidiane, è un progetto sociale che mira a migliorare la qualità di vita durante la delicata fase della terza età, e che, grazie alla sua struttura modulare, rappresenta un investimento accessibile per tutti.

Altrettanto importante è l'offerta per i più piccoli: un Junior Park garantisce un'attività ludica all'aria aperta in totale sicurezza con tutti gli accorgimenti necessari per essere a misura di bimbo.

Ogni progetto deve essere ragionato nell'ottica dell'inclusività affinché chi lo sfrutta ne tragga il maggior rendimento possibile.

Scegli tutte le attrezzature perfette per il tuo ambiente e richiedi un preventivo!

Opportunità all'aria aperta per tutti, dai senior... ai junior!





*Attività per arti inferiori e superiori,
attrezzature per l'esercizio dell'equilibrio*

STANZA MULTISENSORIALE

relax o stimolazione che coinvolge i sensi




L'esigenza di accogliere ospiti che presentano disturbi di diverso genere comporta un'analisi attenta degli spazi al fine di conciliare le necessità di assistenza e cura con la funzionalità dei diversi ambienti. La decisione di allestire uno spazio fisico protetto capace di stimolare a livello sensoriale e percettivo il paziente è utile per contenere i disturbi comportamentali.

La stanza deve promuovere il rilassamento e i comportamenti adattativi tramite stimoli visivi, sonori, olfattivi e tattili.

In un ambiente multisensoriale o ipersensoriale e attraverso un intervento personalizzato, è possibile allenare gli utenti a migliorare la loro capacità di percezione dell'ambiente esterno e di se stessi. Questo avviene tramite la stimolazione o il rilassamento mirato di uno o più sensi.

Sulla base delle planimetrie fornite possiamo progettare e realizzare una stanza dedicata alle terapie che favorisca tanto il rilassamento quanto l'interazione dell'ospite per mezzo di stimoli multisensoriali, oppure quando è necessaria una soluzione più flessibile si può scegliere il *Corner*, che può essere facilmente installato e messo in funzione in pochi minuti.


Richiedi maggiori informazioni e un preventivo!

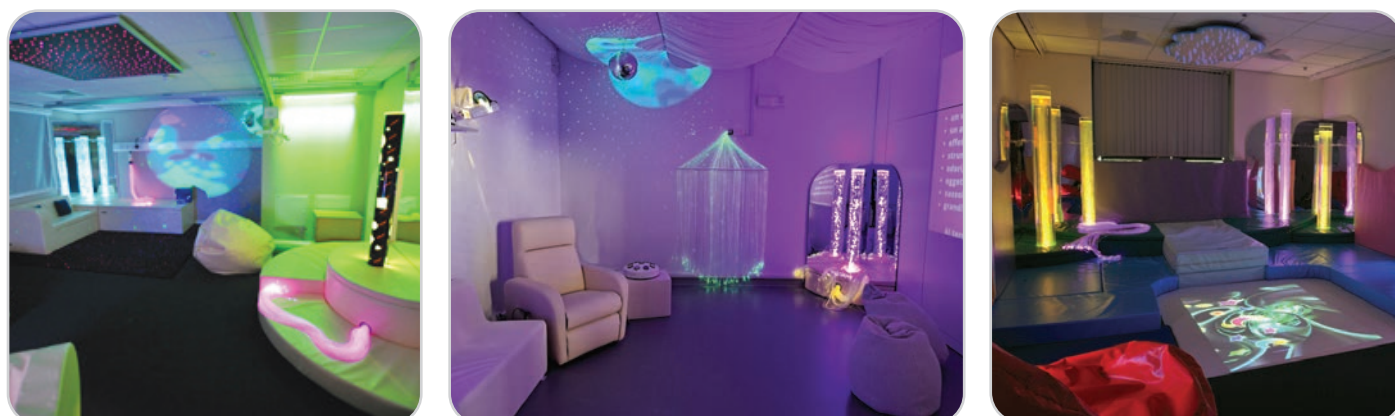



Diversi scenari tra cui scegliere:

- * Sott'acqua
- * La foresta
- * In riva al mare
- * Nello spazio

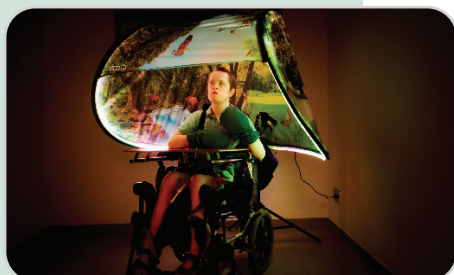

... il Corner!

L'innovativo Corner Snoozlen è una cupola sensoriale portatile che permette di portare l'esperienza Snoezelen a domicilio e senza dover effettuare modifiche all'ambiente.

Il bordo ha **370 luci LED**, protetti in una custodia in silicone, che si combinano per creare uno spettacolo di luci perfettamente sincronizzato con l'audio e personalizzato a seconda del tema scelto.

Scenari diversi, ognuno permette di effettuare l'esperienza in modalità intensa, più stimolante e luminosa, oppure calma e rilassante.



Semplice da montare in pochi secondi e riporre in pochissimo spazio.



ANCHE PER IL TARGET PIÙ DIFFICILE

Il Corner è stato progettato pensando agli utenti più difficoltosi da gestire: è realizzato in tessuto di poliestere antistrappo, le cuciture sono rinforzate, le luci sono protette ed il modulo sonoro è molto resistente.

Il Corner è disponibile in 2 versioni, per adulti e bambini



CORNER PER ADULTI

cod. HGC400010 - include:

- ✓ Cupola sensoriale con piedistallo
- ✓ Poltrona relax Verbano
- ✓ Aromadiffusore
- ✓ Set tattile
- ✓ Coperta ponderata

Componenti aggiuntivi

- Poltrona relax Lario
- oppure scegli la poltrona Lemo, per pazienti fragili
- Sacca



CORNER PER BAMBINI

cod. HGC400011 - include:

- ✓ Cupola sensoriale con piedistallo
- ✓ Seduta morbida SiedoSmac
- ✓ Aromadiffusore
- ✓ Set tattile

Componenti aggiuntivi

- SiedoSmac supplementare
- Smac
- Tappeto circolare a tema
- Sacca

GINNASTICA PROPRIOCETTIVA



PEDANA OSCILLANTE A SEMICILINDRO

Pedane oscillanti in legno verniciato rivestite in materiale antiscivolo per ginnastica propriocettiva e riabilitazione. Disponibili con dimensioni differenti:

- 170x60x14 cm - cod. HGC332001
- 80x60x13 cm - cod. HGC332002
- 60x40x10 cm - cod. HGC332003
- 40x35x9 cm - cod. HGC332004



PEDANA OSCILLANTE CON TRAVETTO CENTRALE

Dimensioni 60x40x10 cm - cod. HGC332005



DONDOLO BOBATH

Dondoli Bobath in legno verniciato rivestiti in materiale antiscivolo per ginnastica propriocettiva e riabilitazione. Con semisfera centrale, portata 120 kg, disponibili con dimensioni differenti:

- Ø 60 x 13 h cm - cod. HGC332006
- Ø 80 x 13 h cm - cod. HGC332007



SERIE DI TRE GRADONI

Gradoni in legno rivestiti in materiale antiscivolo. Sono indicati per tutte le terapie mirate all'allenamento posturale, per promuovere la corretta funzione muscolo-scheletrica, lavorare sull'allineamento corporeo, l'equilibrio e la coordinazione. Disponibili due modelli differenti per le altezze:

- 60x60x10-15-20 cm - cod. HGC332008
- 60x60x30-40-50 cm - cod. HGC332009



MOVIN'S STEP

Può essere utilizzato come step per attività cardiovascolare a basso impatto oppure come base mobile per esercitare il proprio equilibrio e la coordinazione dei movimenti.

La valvola consente di regolare il flusso d'aria permettendo così la scelta del livello di escursione del movimento. Portata raccomandata 120 kg.

Dim. 35x35x7 cm - cod. HGC332010



CORE BALANCE

È composto da una base rigida e da una cupola morbida colore verde removibile dalla base e gonfiabile secondo le esigenze individuali. Può essere utilizzato per diversi tipi di allenamento, dal fitness alla riabilitazione post-traumatica per ginocchia e caviglie. Portata raccomandata 120 kg.

Dim. Base Ø 47 x 25 h cm - Dim. Cupola Ø 40 x 20 h cm - cod. HGC332011



STABILITY WHEEL

Questa pedana propriocettiva si rivela un valido supporto per l'attività fisica e riabilitativa consentendo di svolgere esercizi finalizzati a migliorare equilibrio, tono muscolare e postura. Portata raccomandata 120 kg.

Dim. Ø 40 x 9 h cm - cod. HGC332012



DISCO SPORT

Ideale per esercizi di equilibrio, motricità e recupero funzionale. Portata raccomandata 120 kg.

Disco sport. Dim. Ø 55 - cod. HGC332013



DISCO DOME

Ideale per esercizi di equilibrio e step, il Disco dome è composto da una base rigida e da un disco morbido color arancio che può essere utilizzato anche singolarmente per chi vuole sperimentare esercizi di equilibrio più performanti.

Portata raccomandata 120 kg.

Dim. Ø 60 - cod. HGC332014

PALLE E PALLONI



Scopri la nostra gamma di palle e palloni, ideali per Pilates, allenamento funzionale, sportivo e preparazione atletica. Disponibili anche nella versione PLUS, per una maggiore sicurezza grazie allo sgonfiamento lento in caso di foratura. Prodotti certificati come Medical Device di Classe I, per garantire qualità e affidabilità.

GYMNIC CLASSIC

Palla utilizzata in molteplici applicazioni nella ginnastica rieducativa, in attività motorie, nel fitness e nell'aerobica, nel metodo Pilates, nell'allenamento funzionale, sportivo e nella preparazione atletica. Disponibile anche nel modello PLUS, che offre più sicurezza grazie alla capacità di sgonfiamento lento in caso di foratura. Prodotto Medical Device di Classe I.

Specifiche tecniche

- Peso raccomandato 120 kg
- Capacità di carico testata 300 kg

Modelli disponibili

- Gymnic classic Ø 45 cm. colore giallo - cod. HGC335001
- Gymnic classic Ø 55 cm. colore rosso - cod. HGC335002
- Gymnic classic Ø 65 cm. colore blu - cod. HGC335003
- Gymnic classic Ø 75 cm. colore giallo - cod. HGC335004
- Gymnic classic Ø 85 cm. colore rosso - cod. HGC335005
- Gymnic classic Ø 95 cm. colore blu - cod. HGC335006
- Gymnic classic Ø 120 cm. colore rosso - cod. HGC335007
- Gymnic classic plus Ø 55 cm. colore rosso - cod. HGC335008
- Gymnic classic plus Ø 65 cm. colore blu - cod. HGC335009
- Gymnic classic plus Ø 75 cm. colore giallo - cod. HGC335010

THERASENSORY

Su tutta la superficie della palla Therasensory si trovano piccoli rilievi che amplificano le sensazioni sensoriali e contemporaneamente forniscono un gradevole massaggio favorendo la circolazione sanguigna. Indicata nel recupero funzionale e nella ginnastica riabilitativa.

Specifiche tecniche

- Peso raccomandato 120 kg
- Capacità di carico testata 300 kg

Modelli disponibili

- Therasensory Ø 100 cm. colore rosso - cod. HGC335050
- Therasensory Ø 65 cm. colore verde - cod. HGC335051

PALLONE GOMMAPIUMA cod. HGC335011

Palla ideale per esercizi di potenziamento muscolare, ginnastica a terra e come supporto lombare. Colori assortiti

Dimensioni: Ø 20 cm Peso: 0,150 kg

PALLE E PALLONI



PHYSIO ROLL

Il Physio Roll nasce dall'unione di due palle formando così un'attrezzatura che consente una estrema varietà di utilizzo associata ad una maggiore stabilità rispetto alla classica palla. Utilizzato nel settore fisioterapico, ideale per tutti coloro che hanno difficoltà di coordinazione ed equilibrio, nelle persone affette da handicap, negli anziani, pensato anche per le scuole materne.

Specifiche tecniche

- Peso raccomandato 120 kg
- Capacità di carico testata 300 kg

Modelli disponibili

- Physio roll. Ø 30 cm. Lunghezza 50 cm. colore blu - cod. HGC335040
- Physio roll Ø 40 cm. Lunghezza 65 cm. colore rosso - cod. HGC335041
- Physio roll Ø 55 cm. Lunghezza 90 cm. colore giallo - cod. HGC335042
- Physio roll Ø 70 cm. Lunghezza 115 cm. colore blu - cod. HGC335043
- Physio roll Ø 85 cm. Lunghezza 130 cm. colore rosso - cod. HGC335044



SOFTGYM cod. HGC335052

Palla morbida, leggera e resistente che consente di svolgere un'ampia gamma di esercizi che spaziano dal potenziamento muscolare alla ginnastica dolce, può essere ripiegata e portata con sé ovunque. Facilmente gonfiabile a bocca grazie alla cannuccia inclusa nella confezione. Disponibile nel colore rosso.

Dimensioni: Ø 23 cm

Specifiche tecniche

- Peso raccomandato 80 kg
- Capacità di carico testata 100 kg



PALLE MEDICHE

Le palle mediche sono riempite esclusivamente con acqua. La loro superficie favorisce un buon grip nella presa.

Modelli disponibili

- Palla medica Ø 10 cm. Peso 0,5 kg. colore verde - cod. HGC335020
- Palla medica Ø 12 cm. Peso 1 kg. colore rosso - cod. HGC335021
- Palla medica Ø 15 cm. Peso 2 kg. colore giallo - cod. HGC335022
- Palla medica Ø 17 cm. Peso 3 kg. colore blu - cod. HGC335023
- Palla medica Ø 20 cm. Peso 4 kg. colore magenta - cod. HGC335024
- Palla medica Ø 23 cm. Peso 5 kg. colore arancione - cod. HGC335025

PALLE E PALLONI



PALLE PER RITMICA

Palle adatte per l'allenamento nella ginnastica ritmica.

Modelli disponibili

- Palla per ritmica Ø 16 cm. Peso 280 gr. Colori assortiti - cod. HGC335030
- Palla per ritmica Ø 18,5 cm. Peso 420 gr. colore Blu - cod. HGC335031



PALLE SENSORIALI

Morbide e gradevoli al tatto, grazie ai rilievi sulla superficie forniscono una benefica stimolazione dei punti di pressione. Realizzate in tre differenti misure per consentire un'ampia possibilità di applicazioni. La versione piccola è particolarmente indicata per il massaggio e gli esercizi manipolativi, mentre le due versioni più grandi sono ideali per la ginnastica dolce. Tutte e tre le misure sono indicate per la riflessologia e le tecniche di rilassamento.

Specifiche tecniche

- Peso raccomandato Ø 20 – Ø 28 80 kg
- Capacità di carico testata 100 kg

Modelli disponibili

- Sensyball Ø 10 cm. Peso 80 gr. (Conf. 2 pezzi) - cod. HGC335053
- Sensyball Ø 20 cm. Peso 330 gr. - cod. HGC335054
- Sensyball Ø 28 cm. Peso 400 gr. - cod. HGC335055



PALLE E PALLONI



PALLE RICCIO

Le palle riccio reflexball sono ideali per il massaggio, la riflessologia, la terapia delle mani e gli esercizi di rilassamento. Set 2 pezzi.

Modelli disponibili

- Palla riccio Ø 8 cm. colore verde. (conf. 2 pezzi) - cod. HGC335056
- Palla riccio Ø 9 cm. colore blu. (conf. 2 pezzi) - cod. HGC335057
- Palla riccio Ø 10 cm. colore verde. (conf. 2 pezzi) - cod. HGC335058




THERA FREEBALLS HAND cod. HGC335060

Piccole palline che grazie alla loro elasticità consentono di svolgere esercizi specifici per la riabilitazione della mano. Le Thera Freeballs Hand sono ideali anche per sviluppare la mobilità delle dita rinforzandone i muscoli.

Set composto da 2 palline di diverso diametro.

Colori: ROSSO e GIALLO Dimensioni: 1 pz Ø 50 mm + 1 pz Ø 40 mm

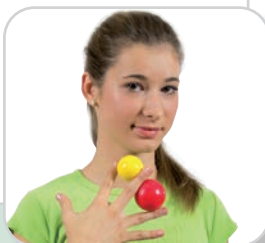

ACTIV ROLL cod. HGC335059

Un piccolo rullo con morbide punte per un confortevole massaggio. Activ Roll stimola la circolazione sanguigna a beneficio di tutto il corpo.

Usato per massaggi plantari e dorsali, riflessologia ed esercizi di sensibilizzazione cutanea. È possibile gonfiare il prodotto con una pompa ad ago per ottenere la rigidità desiderata.

Colore: GRIGIO SCURO Dimensioni: Ø 7,5 cm - L 15 cm



PALLE E PALLONI - ACCESSORI



BALL SUPPORT

Modelli disponibili

- Ball support mis. S per palloni Ø 45-55 cm - cod. HGC335061
- Ball support mis. M per palloni Ø 65-75 cm - cod. HGC335062



FLEXY PUMP cod. HGC335063
Pompa ad ago con prolunga flessibile.




POWER PUMP cod. HGC335064
Pompa manuale per gonfiare palle e palloni.



TAPPETI - Imbottiti

Disponibili in diverse misure ed altezze, da scegliere a seconda delle attività; l'interno in espanso elastico restituisce un'eccellente sensazione di comfort. Rivestimento ignifugo di classe 1, impermeabile e lavabile, con fondo antiscivolo.

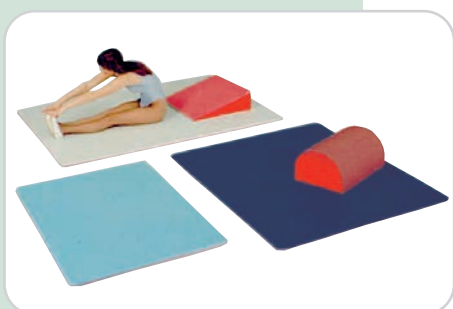

TAPPETO PROFESSIONALE cod. 110003

E' un tappeto molto compatto, sul quale la persona non affonda. Pertanto è perfetto per trattamenti riabilitativi perchè non disturba le reazioni di equilibrio. Il rivestimento è in un esclusivo materiale morbido al tatto, estremamente robusto, resistente ai più comuni agenti di deterzione e di disinfezione ed ignifugo di classe 1. Un profilo in gomma protegge tutto il perimetro.

Colori: BLU

Dimensioni: cm 200x140xH3



TAPPETI E TAPPETONI

Disponibili in diverse misure ed altezze, da scegliere a seconda delle attività; l'interno in espanso elastico restituisce un'eccellente sensazione di comfort. Rivestimento ignifugo di classe 1, impermeabile e lavabile, con fondo antiscivolo.

Modelli disponibili

- Tappeto cm 200x100xH5 - cod. 322101
- Tappeto cm 200x100xH10 - cod. 322102
- Tappeto cm 200x200xH5 - cod. 322103
- Tappeto cm 200x200xH10 - cod. 322104
- Tappeto cm 180x60xH5 - cod. 322302
- Tappeto pieghevole cm 180x60xH3 - cod. 321301



TAPPETI - Airex

Realizzati in speciale espanso a cellule chiuse, compatto ma molto elastico e confortevole, sono tappeti adatti a qualsiasi attività, indistruttibili ed indeformabili. Grazie ad uno speciale trattamento che inibisce la proliferazione di microrganismi sulla superficie garantiscono alti livelli di igiene.

Inoltre, essendo impermeabili, non trattengono umidità e possono essere immersi completamente in acqua, galleggiando.

Modelli disponibili

CORONA - CORONELLA, con angoli smussati, ideali per attività di riabilitazione individuale:

- Coronella dim. 120x60x1,5 cm peso 1,4 kg. colore blu - cod. HGC320007
- Coronella dim. 185x60x1,5 cm peso 2,2 kg. colore blu - cod. HGC320001
- Coronella dim. 185x60x1,5 cm peso 2,2 kg. colore rosso - cod. HGC320002
- Coronella dim. 185x60x1,5 cm peso 2,2 kg. colore ardesia - cod. HGC320003
- Coronella dim. 200x60x1,5 cm peso 2,2 kg. colore ardesia - cod. HGC320004
- Coronella dim. 200x60x1,5 cm peso 2,2 kg. colore blu - cod. HGC320005
- Coronella dim. 200x60x1,5 cm peso 2,2 kg. colore rosso - cod. HGC320006
- Corona dim. 185x100x1,5 cm peso 3,8 kg. colore blu - cod. HGC320008
- Corona dim. 185x100x1,5 cm peso 3,8 kg. colore rosso - cod. HGC320009
- Corona dim. 185x100x1,5 cm peso 3,8 kg. colore ardesia - cod. HGC320010

HERCULES - ATLAS, con angoli retti, facilmente accostabili per formare grandi superfici:



- Atlas dim. 200x125x1,5 cm peso 5,5 kg. colore rosso - cod. HGC320011
- Atlas dim. 200x125x1,5 cm peso 5,5 kg. colore verde acqua - cod. HGC320012
- Hercules dim. 200x100x2,5 cm peso 6,6 kg. colore blu - cod. HGC320013
- Hercules dim. 200x100x2,5 cm peso 6,6 kg. colore verde acqua - cod. HGC320014

FITLINE - PILATES, tappetini individuali per attività ginniche e di gioco:

- Fitline dim. 140x58x1 cm peso 1,2 kg. colore verde acqua - cod. HGC320019
- Fitline dim. 180x58x1 cm peso 1,5 kg. colore verde acqua - cod. HGC320015
- Fitline dim. 180x58x1 cm peso 1,5 kg. colore carbone - cod. HGC320016
- Fitline dim. 180x58x1 cm peso 1,5 kg. colore kiwi - cod. HGC320017
- Fitline dim. 180x58x1 cm peso 1,5 kg. colore rosa - cod. HGC320018
- Pilates dim. 190x60x0,8 cm peso 1,4 kg. colore antracite - cod. HGC320020

ACCESSORI

- Occhielli spess. 15 adatti per Coronella - cod. HGC321100
- Occhielli spess. 10 adatti per Fitline - cod. HGC321101
- Occhielli spess. 8 adatti per Pilates - cod. HGC321102
- Supporto a parete per occhielli - cod. HGC321103
- Supporto a parete a barra per Coronella e Fitline - cod. HGC321104
- Supporto a parete a barra per Corona e Hercules - cod. HGC321105

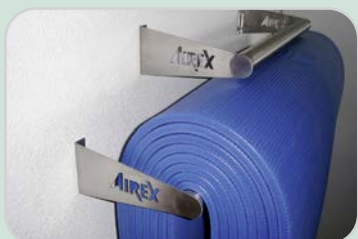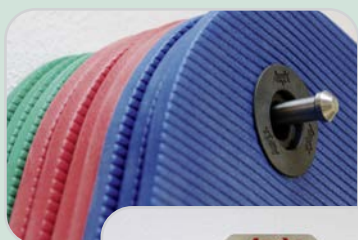



BALANCE - Airex

I modelli Balance sono stepper e supporti con una elasticità controllata, ideali per l'esecuzione di esercizi differenti, in prevalenza per l'allenamento dell'equilibrio.

Modelli disponibili

BALANCE PAD, pedana morbida ed indeformabile con superficie liscia, adatta per esercizi di propriocezione, allenamento ed esercizi riabilitativi anche in contesto domestico:

- dim. 41x50x6 cm peso 0,68 kg. colore blu - cod. HGC321000



BALANCE PAD ELITE, con le stesse caratteristiche del Balance Pad ma con superficie ruvida, a rilievo:

- dim. 41x50x6 cm peso 0,68 kg colore blu - cod. HGC321001
- dim. 41x50x6 cm peso 0,68 kg colore kiwi - cod. HGC321002
- dim. 41x50x6 cm peso 0,68 kg colore lava - cod. HGC321003
- dim. 41x50x6 cm peso 0,68 kg colore rosa - cod. HGC321004




BALANCE PAD XLARGE, pedana ad elasticità controllata con ampio spazio di utilizzo e superficie a rilievo:

- dim. 41x98x6 cm peso 0,99 kg col. blu - cod. HGC321006



BALANCE BEAM, una speciale pedana stretta, utilizzabile come una trave:

- dim. 160x24x6 cm peso 0,99 kg colore blu - cod. HGC321005

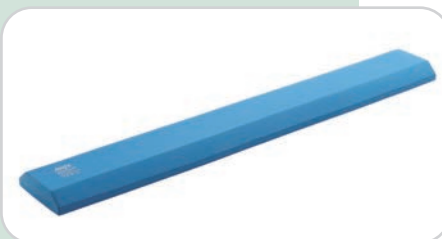



CUSCINI

Cuscini di forme e dimensioni differenti per svolgere attività con il fisioterapista e raggiungere sempre i migliori risultati possibili nella riabilitazione della persona. Tutti i cuscini hanno imbottitura in espanso densità 30 kg/m³ e rivestimento in similpelle lavabile, nel complesso sono ignifughi in classe 1IM.

Modelli e dimensioni disponibili

RULLI E CUSCINI CILINDRICI

- diam. cm. 25xL100 - cod. HGC325001
- diam. cm. 40xL100 - cod. HGC325002
- diam. cm. 30xL120 - cod. HGC325003
- diam. cm. 8xL20 - cod. HGC325011
- diam. cm. 15xL35 - cod. HGC325012
- diam. cm. 15xL50 - cod. HGC325013
- diam. cm. 25xL50 - cod. HGC325014
- diam. cm. 30xL30 - cod. HGC325015
- diam. cm. 30xL60 - cod. HGC325016

CUSCINI SEMICILINDRICI

- cm. 30x16xH8 - cod. HGC325021
- cm. 50x25xH12,5 - cod. HGC325022
- cm. 60x30xH15 - cod. HGC325023

CUBI E CUSCINI RETTANGOLARI

- cm. 30x30xH30 - cod. HGC325031
- cm. 40x40xH40 - cod. HGC325032
- cm. 40x20xH10 - cod. HGC325041
- cm. 50x25xH25 - cod. HGC325042

CUSCINI A CUNEO

- cm. 25x25xH10 - cod. HGC325051
- cm. 35x35xH10 - cod. HGC325052
- cm. 45x45xH15 - cod. HGC325053
- cm. 60x45xH15 - cod. HGC325054
- cm. 60x60xH15 - cod. HGC325055
- cm. 60x60xH30 - cod. HGC325056
- con foro, riv. solo blu cm. 40x34xH9 - cod. HGC325057

CUSCINI A TRAPEZIO

- cm. 40x50xH30/0 - cod. HGC325061
- cm. 40x50xH30/16 - cod. HGC325062
-



GINNASTICA PSICOMOTORIA

Serie di attrezzi per la ginnastica psicomotoria in ambiente scolastico o riabilitativo: insieme al fisioterapista è possibile realizzare esercizi specifici o percorsi per riabilitare o anche solo migliorare gradualmente la coordinazione e l'equilibrio del paziente. Gli attrezzi possono essere ordinati separatamente oppure in un pratico kit che può essere conservato in un carrello quando non in uso.



CARRELLO PORTA ATTREZZI cod. HGC336000

In legno, dimensioni 92x68x95 cm

KIT DI ATTREZZI PER CARRELLO cod. HGC336001

Carrello escluso, composto da:

- 1 bastone in legno cm 70, 1 cm 80 e 1 cm 90 e 4 bastoni in PVC cm 100,
- 4 coni forati altezza cm 30,
- 2 paia di clave in legno piccole,
- 1 paio di appoggi medi,
- 1 paio di appoggi piccoli,
- 1 paio di ceppi,
- 2 cerchi in nylon da cm 60, 2 da cm 70 e 2 da cm 80,
- 4 funicelle con manopole e ingrossamento centrale e 4 piombate, colori assortiti,
- 4 palle per ritmica da gr 420, colori assortiti,
- 1 palla medica da kg 2,
- 1 paio di cavigliere-polsiere da kg 1 (2x 0,5 kg),
- 2 sacchetti di calpestio in sabbia e 2 sacchetti in granuli di PVC,
- 2 elastici a banda colore verde (medio) 120x14,5 cm,
- 1 cuscino cilindro dim. cm 35x15 e 1 dim. cm 50x25.



BASTONE, in legno, in diverse lunghezze, oppure in PVC, misura unica:

- 70 cm - cod. HGC341030
- 80 cm - cod. HGC341031
- 90 cm - cod. HGC341032
- 100 cm - cod. HGC341033
- 120 cm - cod. HGC341034
- 150 cm - cod. HGC341035
- in PVC lunghezza 100 cm (conf. 4 pezzi) - cod. HGC341040

Accessori:

- mensola porta bastoni - cod. HGC341050


CERCHIO, in nylon a sezione piatta:

- Ø 60 cm - cod. HGC341001
- Ø 70 cm - cod. HGC341002
- Ø 80 cm - cod. HGC341003



CONO cod. HGC341010

Con 3 fori e 4 scanalature, altezza 30 cm, colori assortiti.

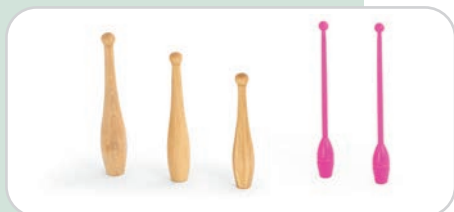

CLAVE, disponibili in legno, in 3 misure, oppure in nylon, in misura unica:

- piccole (conf. 2 pezzi) - cod. HGC341021
- medie (conf. 2 pezzi) - cod. HGC341022
- grandi (conf. 2 pezzi) - cod. HGC341023
- in nylon colorate (Conf. 2 pezzi) - cod. HGC341025

GINNASTICA PSICOMOTORIA



ELASTICO A BANDA, disponibile in diverse misure ed intensità:

- giallo extra leggero dim. 120 x 14,5 cm - cod. HGC342001
- rosso leggero dim. 120 x 14,5 cm - cod. HGC342002
- verde medio dim. 120 x 14,5 cm - cod. HGC342003
- blu forte dim. 120 x 14,5 cm - cod. HGC342004
- giallo extra leggero. Rotolo da 25 mt x 14,5 cm - cod. HGC342010
- rosso leggero. Rotolo da 25 mt x 14,5 cm - cod. HGC342011
- verde medio. Rotolo da 25 mt x 14,5 cm - cod. HGC342012
- blu forte. Rotolo da 25 mt x 14,5 cm - cod. HGC342013

Versione Latex free:

- con maniglie rosso extra leggero dim. 160x5 cm - cod. HGC342020
- con maniglie giallo leggero dim. 160 x 5 cm - cod. HGC342021
- con maniglie blu medio dim. 160 x 5 cm - cod. HGC342022
- con maniglie verde forte dim. 160 x 5 cm - cod. HGC342023
- rosso extra leggero, rotolo da 20 mt x 5 cm - cod. HGC342030
- giallo leggero, rotolo da 20 mt x 5 cm - cod. HGC342031
- blu medio, rotolo da 20 mt x 5 cm - cod. HGC342032
- verde forte, rotolo da 20 mt x 5 cm - cod. HGC342033

POWER LOOP, elastico ad anello:

- rosso extra leggero Ø 104 x altezza 1,25 cm - cod. HGC342040
- nero leggero Ø 104 x altezza 1,90 cm - cod. HGC342041
- giallo medio Ø 104 x altezza 2,85 cm - cod. HGC342042
- verde forte Ø 104 x altezza 4,45 cm - cod. HGC342043
- blu extra forte Ø 104 x altezza 6,35 cm - cod. HGC342044
- arancio super extra forte Ø 104 x alt.8,25 cm - cod. HGC342045

ELASTICO TUBING, Latex free, in diversi modelli e resistenze:

- rosso extra leggero, conf. da 10 mt - cod. HGC342060
- giallo leggero, conf. da 10 mt - cod. HGC342061
- viola medio, conf. da 10 mt - cod. HGC342062
- nero forte, conf. da 10 mt - cod. HGC342063
- con maniglie, rosso extra leggero Ø 160 cm - cod. HGC342050
- con maniglie, giallo leggero Ø 160 cm - cod. HGC342051
- con maniglie, viola medio Ø 160 cm - cod. HGC342052
- con maniglie, nero forte Ø 160 cm - cod. HGC342053
- ad anello rosso leggero - cod. HGC342070
- ad anello giallo medio - cod. HGC342071
- ad anello viola forte - cod. HGC342072
- ad anello nero extra forte - cod. HGC342073
- ad anello con maniglie rosso leggero - cod. HGC342080
- ad anello con maniglie giallo medio - cod. HGC342081
- ad anello con maniglie viola forte - cod. HGC342082
- ad anello con maniglie nero extra forte - cod. HGC342083
- a 8 con maniglie rosso leggero - cod. HGC342090
- a 8 con maniglie giallo medio - cod. HGC342091
- a 8 con maniglie viola forte - cod. HGC342092
- a 8 con maniglie nero extra forte - cod. HGC342093

Accessori:


- Maniglia per elastici a banda - cod. HGC342097
- Maniglia per elastici tubing - cod. HGC342098

GINNASTICA PSICOMOTORIA



POLSIERE/CAVIGLIERE, confezione da 2 pezzi:

- da 1 kg al paio (2x0,5 kg cad.) - cod. HGC343000
- da 2 kg al paio (2x1 kg cad.) - cod. HGC343001
- da 3 kg al paio (2x1,5 kg cad.) - cod. HGC343002
- da 4 kg al paio (2x2 kg cad.) - cod. HGC343003
- da 5 kg al paio (2x2,5 kg cad.) - cod. HGC343004
- da 6 kg al paio (2x3 kg cad.) - cod. HGC343005
- da 7 kg al paio (2x3,5 kg cad.) - cod. HGC343006
- da 8 kg al paio (2x4 kg cad.) - cod. HGC343007

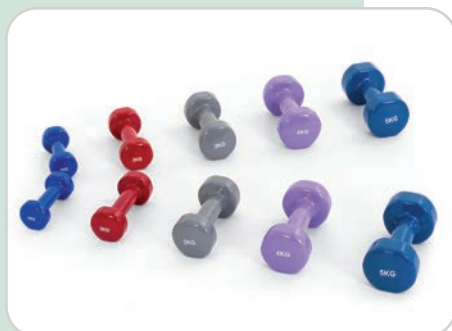

MANUBRI IN GHISA, ricoperti in vinile, confezione da 2 pezzi:

- da 1 kg. colori assortiti - cod. HGC344001
- da 2 kg. colori assortiti - cod. HGC344002
- da 3 kg. colori assortiti - cod. HGC344003
- da 4 kg. colori assortiti - cod. HGC344004
- da 5 kg. colori assortiti - cod. HGC344005

Accessori:

- Rastrelliera porta manubri - cod. HGC344010



ATTREZZATURE



ATTREZZATURE BAUMANN

Appoggi in legno, disponibili in 2 misure:

- medi, dim. 168x92x65 mm (conf. 2 pezzi) - cod. HGC345000
- piccoli, dim. 150x88x65 mm (conf. 2 pezzi) - cod. HGC345001

Ceppi in legno, dim. 140x65x65 mm (conf. 2 pezzi) - cod. HGC345010



FUNICELLA

Disponibile in 2 versioni:

- per saltelli, con maniglie e ingrossamento centrale - cod. HGC345020
- piombata, lunghezza 280 cm, colori assortiti - cod. HGC345030



MAGIC CIRCLE cod. HGC345040

Ø 38 cm colore nero



MINI TRAMPOLINO cod. HGC345050

Ø 90 cm, altezza 20 cm



FITBALL ROLLER cod. HGC345060

Ø 18 cm lunghezza 75 cm colore grigio



FOAM ROLL

Forma a cilindro in colore blu, 2 misure:

- Ø 15 cm lunghezza 90 cm - cod. HGC345071
- Ø 15 cm lunghezza 45 cm - cod. HGC345072

LETTINI DA VISITA E TERAPIA: tutti i codici e gli accessori

Elenco dei codici relativi a tutti i modelli e agli accessori per personalizzare lettino da visita o da terapia in base alle specifiche esigenze.

Scegli la configurazione perfetta per te!

Serie EXPERT



Serie SMART



Serie PRATIC



Serie FIX



Serie BOBATH



Serie TRACTION



Serie TILT



Serie POSTURAL



LINEA EXPERT

pag. 6

CODICE	DESCRIZIONE
264001PS	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264001PC	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264001CS	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264001CC	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264001HS	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264001HC	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264002PS	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264002PC	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264002CS	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264002CC	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264002HS	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264002HC	Letto visita EXPERT HG1 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
264003PS	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264003PC	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264003CS	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264003CC	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264003HS	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264003HC	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264004PS	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264004PC	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264004CS	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264004CC	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264004HS	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264004HC	Letto visita EXPERT HG2 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
264005PS	Letto visita EXPERT HG3 a 2 sez., piano sagomato reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264005PC	Letto visita EXPERT HG3 a 2 sez., piano sagomato reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264005CS	Letto visita EXPERT HG3 a 2 sez., piano sagomato reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264006CC	Letto visita EXPERT HG3 a 2 sez., 3 a 2 sez., piano sagomato reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264006HS	Letto visita EXPERT HG3 a 2 sez., piano sagomato reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264006HC	Letto visita EXPERT HG3 a 2 sez., piano sagomato reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264007PS	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264007PC	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., 3 reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264007CS	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264007CC	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264007HS	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264007HC	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264008PS	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264008PC	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., 3 reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264008CS	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264008CC	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264008HS	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264008HC	Letto visita EXPERT HG4 a 4 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort

CODICE	DESCRIZIONE
264009PS	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264009PC	Letto visita EXPERT HG5 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264009CS	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264009CC	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264009HS	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264009HC	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264010PS	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264010PC	Letto visita EXPERT HG5 a 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264010CS	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264010CC	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264010HS	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264010HC	Letto visita EXPERT HG5 a 3 sez., posiz. Trendelenburg, e posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
264011PS	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264011PC	Letto visita EXPERT HG6 a 5 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264011CS	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264011CC	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264011HS	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264011HC	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264012PS	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264012PC	Letto visita EXPERT HG6 a 5 2 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264012CS	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264012CC	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264012HS	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264012HC	Letto visita EXPERT HG6 a 5 sez., posiz. Trendelenburg, reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
264013PS	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264013PC	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., 3 reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264013CS	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264013CC	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264013HS	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264013HC	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264014PS	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264014PC	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., 3 reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264014CS	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264014CC	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264014HS	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264014HC	Letto visita EXPERT HG7 a 8 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
264015PS	Letto visita EXPERT HG8 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264015PC	Letto visita EXPERT HG8 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264015CS	Letto visita EXPERT HG8 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard

CODICE	DESCRIZIONE
264015CC	Letto visita EXPERT HG8 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264015HS	Letto visita EXPERT HG8 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264015HC	Letto visita EXPERT HG8 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
ACCESSORI	
264020	Supporto rotolo carta
264021	Sponde laterali ribaltabili
264022	Serie di 4 ruote retrattili
264023	Magnete di sicurezza
264024	Doppio clic + magnete di sicurezza
264025	Presa Svizzera
264026	Presa UK
264027	Supporto rotolo carta per letto HG1, HG2 e HG3

LINEA SMART

pag. 14

CODICE	DESCRIZIONE
264101PS	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264101PC	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264101CS	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264101CC	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264101HS	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264101HC	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264102PS	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264102PC	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264102CS	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264102CC	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264102HS	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264102HC	Letto visita SMART HG1 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
264103PS	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264103PC	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264103CS	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264103CC	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264103HS	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264103HC	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264104PS	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264104PC	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264104CS	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264104CC	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort

CODICE	DESCRIZIONE
264104HS	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264104HC	Letto visita SMART HG2 a 2 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
264105PS	Letto visita SMART HG3 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264105PC	Letto visita SMART HG3 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264105CS	Letto visita SMART HG3a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264105CC	Letto visita SMART HG38 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264105HS	Letto visita SMART HG3 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264105HC	Letto visita SMART HG3 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264106PS	Letto visita SMART HG3 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264106PC	Letto visita SMART HG3 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264106CS	Letto visita SMART HG3a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264106CC	Letto visita SMART HG38 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264106HS	Letto visita SMART HG3 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264106HC	Letto visita SMART HG3 a 3 sez., posizione seduta reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
264107PS	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. standard
264107PC	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a pedale, imbott. comfort
264107CS	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. standard
264107CC	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.65 comando a ped. circol., imbott. comfort
264107HS	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. standard
264107HC	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. idraul., piano cm.65, imbott. comfort
264108PS	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. standard
264108PC	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a pedale, imbott. comfort
264108CS	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. standard
264108CC	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80 comando a ped. circol., imbott. comfort
264108HS	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. standard
264108HC	Letto visita SMART HG4 a 4 sez., reg. alt. idraul., piano cm.80, imbott. comfort
ACCESSORI	
264020	Supporto rotolo carta
264021	Sponde laterali ribaltabili
264111	Serie di 4 ruote retrattili
264112	Magnete di sicurezza
264113	Doppio clic + magnete di sicurezza
264114	Presa Svizzera
264115	Presa UK

LINEA PRATIC

pag. 18

CODICE	DESCRIZIONE
HGC261001	Letto visita PRATIC 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.62, inclinaz. schien. a cremagliera
HGC261001R	Letto visita PRATIC 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.62, inclinaz. schien. a cremagliera, con ruote
HGC261002	Letto visita PRATIC 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.68, inclinaz. schien. elettr.
HGC261002R	Letto visita PRATIC 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.68, inclinaz. schien. elettr., con ruote
HGC261003	Letto visita PRATIC 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80, inclinaz. schien. elettr.
HGC261003R	Letto visita PRATIC 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.80, inclinaz. schien. elettr., con ruote
HGC261004	Letto visita PRATIC 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.90, inclinaz. schien. elettr.
HGC261004R	Letto visita PRATIC 2 sez., reg. alt. elettr., piano cm.90, inclinaz. schien. elettr., con ruote
HGC261005	Letto visita PRATIC 3 sez., reg. alt. elettr., piano cm.62, reg. dello schienale elettr., reg. sez. gambe con molla a gas
HGC261005R	Letto visita PRATIC 3 sez., reg. alt. elettr., piano cm.62, reg. dello schienale elettr., reg. sez. gambe con molla a gas, con ruote
HGC261006	Letto visita PRATIC Ginecologico 3 sez., reg. alt. elettr., piano cm.62, reg. dello schienale elettr., reg. sez. gambe con molla a gas
HGC261006R	Letto visita PRATIC Ginecologico 3 sez., reg. alt. elettr., piano cm.62, reg. dello schienale elettr., reg. sez. gambe con molla a gas, con ruote
ACCESSORI	
HGC261038	Pedaliera elettr. per elevazione letto - solo per letto Pratic2 largh. 62 e 80
HGC261039	Pedaliera elettr. per elevazione letto e alzatesta- solo per letto Pratic 2 largh. 68 e 90 e per letto Pratic 3 e ginecologico
	Asta flebo in alluminio per letto PRATIC 2- acquistabile SOLO UNITAMENTE AL Letto
HGC261040	Asta flebo in alluminio per letto Pratic 3 e ginecologico
HGC261041	Coppia braccioli per prelievo in PU per letto Pratic 3
HGC261030	Porta rotolo 60 cm per letto Pratic 2 - lato piedi - per letto largh. 62
HGC261031	Porta rotolo 60 cm per letto Pratic 2 - lato piedi - per letto largh. 68
HGC261032	Porta rotolo 60 cm per letto Pratic 2 - lato piedi - per letto largh. 80 e 90
HGC261033	Porta rotolo 80 cm per letto Pratic 2 - lato piedi - per letto largh. 80 e 90
HGC261034	Porta rotolo 60 cm per letto Pratic 2 - lato testa - per letto largh. 80 e 90
HGC261035	Porta rotolo 60 cm per letto Pratic 2 - lato testa - per letto largh. 68
HGC261036	Porta rotolo 60 cm per letto Pratic 3 e ginecologico - lato testa
HGC261037	Porta rotolo 80 cm per letto Pratic 2 - lato testa - per letto largh. 80 e 90

LINEA FIX

pag. 21

CODICE	DESCRIZIONE
HGC261101	Letto visita FIX HG1 a 2 sez., struttura in acciaio verinicato largh. cm. 60
HGC261102	Letto visita FIX HG2 a 3 sez., struttura in acciaio verinicato largh. cm. 60
HGC261103	Letto visita FIX HG3 GINECOLOGICO sez., struttura in acciaio verinicato largh. cm. 60
HGC261104	Letto visita FIX HG4 a 2 sez., struttura in legno largh. cm. 74
HGC261105	Letto visita FIX HG4 a 2 sez., struttura in legno largh. cm. 90
HGC261106	Letto visita FIX HG5 a valigetta a 3 sez., largh. cm. 64
ACCESSORI	
HGC261110	Supporto porta rotolo per letto FIX HG2
HGC261111	Supporto porta rotolo per letto FIX HG1
	Borsone per letto a valigetta

LINEA BOBATH

pag. 26

CODICE	DESCRIZIONE
264201	Letto BOBATH HG1 ad 1 sez. regolabile in alt. piano cm.100
264202	Letto BOBATH HG1 ad 1 sez. regolabile in alt. piano cm.120
264203	Letto BOBATH HG2 ad 2 sez. regolabile in alt. piano cm.100 schienale con molla a gas
264204	Letto BOBA TH HG2 ad 2 sez. regolabile in alt. piano cm.120 schienale con molla a gas
264205	Letto BOBATH HG2 ad 2 sez. regolabile in alt. piano cm.100 schienale con cremagliera
264206	Letto BOBATH HG2 ad 2 sez. regolabile in alt. piano cm.120 schienale con cremagliera
264211	Letto BOBATH HG3 ad 1 sez. regolabile in alt. piano cm.200x180 comando a pedale
264213	Letto BOBATH HG4 ad 1 sez. alt. fissa piano cm.200x120x50
264214	Letto BOBATH HG4 ad 1 sez. alt. fissa piano cm.200x180x50
264215	Letto BOBATH HG5 ad 2 sez., alt. fissa piano da cm 200x120x50
ACCESSORI	
264220	Serie di 4 ruote retrattili per letto Bobath HG1 e 2
264222	Serie di 4 ruote retrattili per letto Bobath HG3
264021	Sponde laterali ribaltabili
264224	Doppia pedaliera
264225	Magnete di sicurezza
264226	Doppio clic + magnete di sicurezza
264227	Presa Svizzera
264228	Presa UK

LINEA TRACTION

pag. 31

CODICE	DESCRIZIONE
264301	Letto TRACTION HG1 regolabile in altezza. Kit accessori: 3 cuscini di diverse misure, 2 imbragature pelviche e 2 toraciche, 1 mentoniera con archetto e bilancino
264302	Letto TRACTION HG2 alt. fissa. Kit accessori: 3 cuscini di diverse misure, 2 imbragature pelviche e 2 toraciche, 1 mentoniera con archetto e bilancino
ACCESSORI	
264314	Magnete di sicurezza
264315	Doppio clic + magnete di sicurezza
264316	Presca Svizzera
264317	Presca UK

LINEA TILT

pag. 33

CODICE	DESCRIZIONE
264401	Tavolo da statica TILT HG1 a 1 sez., alt. fissa, pedana poggiatesta intera fissa
264402	Tavolo da statica TILT HG1 a 1 sez., alt. fissa, pedana poggiatesta separata regolabile
264403	Tavolo da statica TILT HG2 a 4 sez., alt. fissa
264404	Tavolo da statica TILT HG3 a 2 sez., ad alt. regolabile
264405	Tavolo da statica TILT HG4 a 4 sez., ad alt. regolabile
ACCESSORI	
264410	Supporti ascellari
264411	Fascia imbottita
264412	Cinghia ferma pazienti 10 cm
264413	Tavolino per letto serie Tilt
264414	Magnete di sicurezza
264415	Doppio clic + magnete di sicurezza
264416	Presca Svizzera
264417	Presca UK

LINEA POSTURAL

pag. 37

CODICE	DESCRIZIONE
264501P	Letto visita POSTURAL HG1 con comando a pedale, senza foro largh. cm. 56
264501C	Letto visita POSTURAL HG1 a ped. circol. senza foro largh. cm. 56
264501CA	Letto visita POSTURAL HG1 a ped. circol., senza foro largh. cm. 56
264501H	Letto visita POSTURAL HG1 idraulico senza foro largh. cm. 56
264502	Letto visita POSTURAL HG2 alt. fissa senza foro largh. cm. 56
264503P	Letto visita POSTURAL HG3 con comando a pedale largh. cm. 65
264503CA	Letto visita POSTURAL HG3 a ped. circol., largh. cm. 65
264503H	Letto visita POSTURAL HG3 idraulico largh. cm. 65
264504P	Letto visita POSTURAL HG4 5 sez., con comando a pedale largh. cm. 65
264504C	Letto visita POSTURAL HG4 5 sez., a ped. circol. largh. cm. 65
264504H	Letto visita POSTURAL HG4 5 sez., idraulico largh. cm. 65
ACCESSORI	
264020	Supporto rotolo carta
264022	Serie di 4 ruote retrattili
264027	Supporto rotolo carta per letto HG1, HG2 e HG3
264513	Serie di 4 ruote per letto HG1 e HG2
264514	Asta regolabile in alt. , solo per letto HG1, 2 e 3
264515	Magnete di sicurezza
264516	Doppio clic + magnete di sicurezza
264517	Presa Svizzera
264518	Presa UK

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Fumagalli Care&Reha - Customer Care
tel. +39 031 3356 811
ordini@fumagallicare.com



Fumagalli Care&Reha srl
Via A. De Gasperi 50 - 20862 Arcore (MB)
tel (39) 031 33 56 811 - fax (39) 031 622 111
info@fumagallicare.com -
www.fumagallicare.com

Member of

